

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™



## Arbeitsstühle

Schön, wenn Sie einer  
so sitzen lässt

[dentsplysirona.com](https://dentsplysirona.com)



## Hugo – der Ergonomie-Profi

Hugo ist ein wichtiger Baustein im Dentsply Sirona-Ergonomie-Programm und vereint einzigartige Technologien. Er fördert intuitives ergonomisches Sitzen und unterstützt Sie dabei, während der Behandlung immer wieder die richtige Körperhaltung einzunehmen. Dynamisch, komfortabel, hygienisch und flexibel – die perfekte Ergänzung zu Ihrer Behandlungseinheit.



### Die Rückenlehne – für mehr Dynamik

Der dynamische Rücken von Hugo erlaubt Ihnen mehr Flexibilität beim Behandeln. Die Rückenlehne folgt der Bewegung und unterstützt in der jeweiligen Arbeits- und Entspannungs-Position. Die Wirbelsäule wird automatisch aufgerichtet und Muskelverspannungen werden wirkungsvoll vorgebeugt.



### Die Sitzfläche – für mehr Komfort

Die innovative Mechanik OptiMotion mit flexibler Neigung der vorderen linken oder rechten Sitzflächenhälfte garantiert mehr Bewegungsfreiheit und somit bestmögliche Patientenzugänglichkeit. Gleichzeitig werden Druckstellen an den Oberschenkeln deutlich reduziert. Das neue Klimapolster sorgt auch bei langem Sitzen für einen angenehmen Wohlfühleffekt.



### Die Stuhlbasis – für mehr Flexibilität

Hugo können Sie flexibel und individuell an die unterschiedlichen Körpergrößen innerhalb Ihres Praxisteams anpassen. Die Sitzhöhen-einstellung erfolgt auf Wunsch einfach und hygienisch über die Fußauslösetaste.



### Hugo Manual

Sitzhöhenverstellung per Hand



### Hugo Manual Plus

Sitzhöhenverstellung per Hand, mit Fußring



### Hugo Freehand

Sitzhöhenverstellung per Fußdruck



- 1** Durch den Einsatz neuer Technologien wird auf Bedienhebel verzichtet. Hugo stellt sich automatisch auf die jeweilige Sitzposition ein. Das hilft, Fehleinstellungen und gesundheitliche Belastungen zu vermeiden. Die Funktionsweise und die Gestaltung unterstützen darüber hinaus das hygienische Arbeiten.
- 2** Sie können ohne Aufpreis zwischen zwei Gasfeder-Längen wählen. So erreichen Sie je nach Körpergröße immer die ergonomisch korrekte Sitzhöhe.

- 3** Der austauschbare Tritteinsatz des Fußkreuzes erhöht die Langlebigkeit auch bei starker Beanspruchung.
- 4** Der optionale Fußring ermöglicht die problemlose Zusammenarbeit auch bei unterschiedlichen Körpergrößen von Zahnarzt und Assistenz. Beide arbeiten belastungsarm in einer ergonomisch korrekten Position.
- 5** Die neue Fußauslösung ermöglicht eine handfreie und deshalb hygienische Einstellung der Sitzhöhe.

Körpergröße* in cm	Sitzhöhe
ca. 150–180	Kurze Gasfeder 405–540 mm
ca. 170–205	Lange Gasfeder 505–645 mm

\* Angaben können je nach Benutzer abweichen.



## Theo – der Flexible

**NEU:** Theo komplettiert das ergonomische Arbeitsstuhl-Portfolio für Behandlungseinheiten von Dentsply Sirona. Der Sattelstuhl vereint die gesunde Körperhaltung des Stehens mit den Vorteilen eines stabilen und komfortablen Sitzens. Die hohe Sitzposition erlaubt einen optimalen Zugang zum Patienten. Kombiniert mit besonders komfortablen Polstern wird so eine bestmögliche ergonomische Unterstützung auch während langen Arbeitstagen erzielt.

- Ausgeklügelte Sitzflächenform, die Ihren Bewegungen folgt
- Austauschbarer Tritteinsatz im Fußkreuz für angenehme Beinposition
- Erhältlich mit bewährtem Premium-Klimapolster, sowie dem komfortablen Loungepolster
- Wahlmöglichkeit zwischen zwei Gasfeder-Längen für unterschiedliche Körpergrößen



### Klima Premium Polster

Das bewährte Klimapolster sorgt für einen besonderen Wohlfühleffekt im Sitzbereich: Die Stauwärme wird durch einen extra Polstereinsatz reduziert, was komfortables Sitzen bei Langzeitbehandlungen erst möglich macht.



### Lounge Polster

Für das gewisse Extra an Komfort ist Theo auch mit dem besonders weichen Lounge-Material erhältlich – ein bequemes und optisches Highlight zugleich.



### Einzigtiger Balance-Mechanismus

Durch dynamisches Anpassen der Sitzfläche lässt Theo Ihnen größtmögliche Flexibilität in Ihren Bewegungsabläufen. Der Bewegungsbereich des Balance Mechanismus kann individuell eingestellt werden – dafür ist nur ein Drehen des Rings notwendig. Folglich wird die Belastung auf Muskelgruppen und Bandscheiben spürbar reduziert, die Arbeitsposition kann lange aufrechterhalten und Schmerz vorgebeugt werden.



### Entlastendes Fußkreuz

Der Tritteinsatz auf dem Fußkreuz ermöglicht eine entlastende Beinposition. Zudem sind die Einsätze austauschbar, was die Langlebigkeit auch bei starker Beanspruchung erhöht.

## Carl – der Allrounder

Der Rundsitz Carl sorgt für maximale Bewegungsfreiheit und genügt den höchsten Ansprüchen an Komfort und Qualität. Die runde Sitzfläche hat eine bequeme Polsterung und ist „nahtlos“ hygienisch.

- Runde Sitzfläche mit komfortabler Polsterung
- Sitzflächenverstellung aus jeder Sitzposition
- Rückenlehne um 360° schwenkbar
- Wahlmöglichkeit zwischen zwei Gasfeder-Längen



**Carl Manual**

Sitzhöhenverstellung per Hand



**Carl Manual Plus**

Sitzhöhenverstellung per Hand, mit Fußring

## Die Farbwelten


### Die elegante Welt

Klassische, zeitlose Kombinationen für einen edlen Look.



### Die natürliche Welt

Sanfte, warme Farbtöne für ein beruhigendes Behandlungsklima.

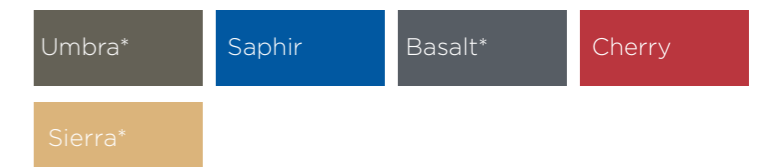

### Die vitale Welt

Farbenfrohe, frische Töne für eine moderne, lebendige Atmosphäre.



\* Für Theo: Polsterfarben auch als Lounge Polster erhältlich.

## Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH  
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland  
dentsplysirona.com

## Procedural Solutions

Preventive  
Restorative  
Orthodontics  
Endodontics  
Implants  
Prosthetics

## Enabling Technologies

CAD/CAM  
Imaging  
Treatment Centers  
Instruments