

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

 Dentsply
Sirona

Axano



reddot winner 2022

Quand l'innovation rencontre la fascination

dentsplysirona.com





Axano

Quand l'innovation rencontre la fascination

L'innovation traduit l'audace, la volonté de se remettre en question, de dépasser les limites. Chez Dentsply Sirona, l'innovation est dans notre ADN et se retrouve dans chacune de nos actions, dans chacun de nos produits et de nos services.

Dans l'univers des postes de traitement, nous avons toujours eu pour ambition d'offrir une expérience inédite de haute qualité avec chaque nouvelle génération de produits et d'anticiper les exigences de demain. Conception de pointe et fonctionnalités complètes se réunissent dans nos solutions intelligentes, numériques et adaptées à votre flux de travail.

Nous développons une approche globale de l'innovation pour vous donner la liberté de vous consacrer pleinement à vos patients.



Innovation et fascination. Et le traitement dentaire devient une expérience.

Axano est synonyme d'une véritable expérience de traitement via la combinaison de l'innovation, de l'intuition et des avantages d'un poste de traitement moderne adapté à vos besoins. Les mises à jour régulières du logiciel permettent de garder un poste de traitement à la pointe des nouvelles technologies aujourd'hui et dans les années à venir.

Conception intelligente

Axano combine une conception intelligente avec un grand confort et des fonctions de traitement innovantes. Les fonctions Ambient Light and Smart Touch s'associent pour créer un concept moderne et élégant.

Optimisation du flux de travail

Via de nouvelles fonctionnalités, Axano améliore votre flux de travail en apportant davantage de confort mais aussi plus d'efficacité tout au long du traitement et de fiabilité dans les processus d'hygiène. Cela se traduit par de nombreux avantages pour votre cabinet et vos patients.

Expérience numérique

Quand la simplicité des commandes accroît la satisfaction : l'interface utilisateur innovante Smart Touch vous offre une expérience numérique adaptable selon vos besoins spécifiques.





Smart Touch - l'interface utilisateur intuitive

Dotée d'une technologie multi-touch* innovante, Smart Touch offre un affichage interactif avec des fonctions claires et structurées.

L'interface utilisateur peut être facilement personnalisée pour répondre à vos attentes.

* Technologie multitactile



Smart Delivery Pro - la voie de coulissement motorisée

Smart Delivery Pro met l'élément praticien à votre portée à tout moment et s'adapte à votre hauteur de travail grâce à la fonction de réglage latéral et vertical. Ainsi, vous traitez vos patients de manière ergonomique.



Smart Control - la commande au pied bidirectionnelle ergonomique

Smart Control est un élément de commande multifonctionnel offrant une prise en charge dans le fonctionnement du poste de traitement. Accédez immédiatement aux fonctions essentielles et naviguez facilement sur votre Smart Touch grâce au curseur affiché sur l'écran. Cette pédale sans fil est intuitive et permet à votre esprit et à vos mains d'être libres pour un traitement ergonomique.



Conception intelligente

Performance et inspiration.

Le traitement des patients devient un plaisir avec Axano.




Design et performance. Et vous associez l'élégance à l'aspect fonctionnel.

Les éléments praticien et assistante Axano présentent un design innovant, élégant et minimaliste. Doté d'une surface en verre moderne facile à nettoyer, le nouvel écran graphique Smart Touch permet de rendre le traitement plus intuitif. De plus, la fonction Ambient Light intégrée apporte une touche d'élégance à votre cabinet. Cette fonctionnalité offre des caractéristiques de couleurs personnalisables que vous pouvez régler pour améliorer l'ambiance du cabinet.

Smart Touch

Le grand affichage Smart Touch de 10,3 pouces offre un haut degré de confort pour une utilisation intuitive et conviviale. Équipé d'une vaste panoplie d'options personnalisables, Axano offre une nouvelle expérience en matière de conception. En outre, la surface en verre de haute qualité s'intègre parfaitement au design global et facilite le nettoyage et l'entretien.



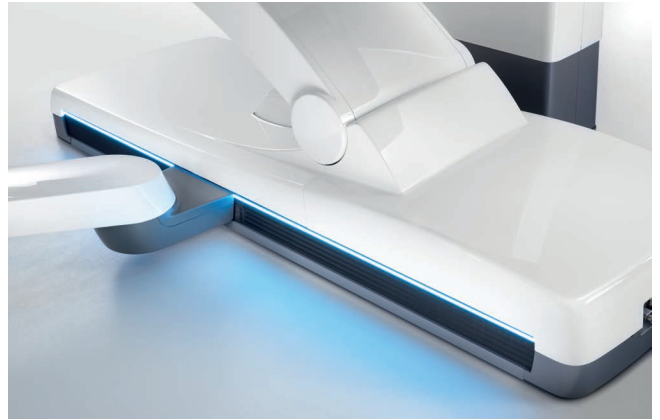

Ambient Light

Présente à la fois sur le fauteuil, les éléments praticien et assistante, ainsi que le Smart Delivery Pro, la fonction Ambient Light contribue à créer une ambiance agréable et réconfortante. La variété des options de couleur permet de créer une atmosphère unique conçue pour s'adapter à l'esthétisme de votre cabinet. Vous pouvez également sélectionner des couleurs spécifiques pour les assortir à la sellerie du fauteuil. De plus, l'Ambient Light verte indique qu'un processus d'hygiène est en cours.



Exclusivité et couleur. Et vous exposez vos goûts en matière de design.

Axano occupe une place centrale dans votre salle de traitement : le design joue donc un rôle essentiel dans la création d'un environnement favorable pour vous et vos patients. Nous sommes conscients de cette importance. Aussi, pendant la phase de développement, nous avons concentré nos efforts pour que chacun de nos postes de traitement soit fabriqué avec soin et présente la solidité requise pour durer dans le temps et résister à l'utilisation quotidienne.

De plus, vous pouvez faire votre choix parmi une large palette de teintes de sellerie. Vous pouvez également choisir la sellerie innovante Lounge afin de proposer un confort optimal à vos patients. Cette option offre également des choix de personnalisation supplémentaires, comme la sélection des surpiqûres.

Teintes de sellerie

Le monde de l'élégance



Carbone*

Merlot*

Platine

Pacifique*

Prune*

Le monde du naturel



Ombré*

Saphir

Basalte*

Cerise

Sierra*

Le monde de la vitalité



Aloe


Aqua

Flamingo

Orchidée*

*Également disponibles pour la sellerie Lounge.

Couleurs surpiqûres**

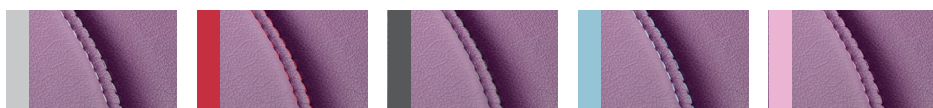

Standard

Rouge

Gris foncé

Bleu

Rose

**Également disponibles pour la sellerie Lounge.







Optimisation du flux de travail

Fiabilité et efficacité. Consacrez plus de temps à ce qui est important pour vous.



Efficacité et flexibilité. Et vous êtes présent pour vos patients.

Chaque processus est bien coordonné pour faciliter chaque mouvement. Exactement comme vous le souhaitez. Que vous effectuiez le traitement seul ou avec votre équipe, Axano s'adapte à vos besoins du moment et offre à la fois des flux de travail efficaces et un confort de commande - pour votre bien-être et celui de vos patients.

Une optimisation de l'accessibilité grâce au plateau central : le split concept*

Les éléments praticien et assistante peuvent être positionnés rapidement et indépendamment l'un de l'autre, pour basculer facilement de la réalisation des traitements en équipe à la réalisation en solo. Le plateau supplémentaire permet de rationaliser chaque mouvement.



*principe de dissociation



Connexions d'instruments 6+2

Vos principaux éléments de travail et de commande sont clairement disposés grâce aux 6 positions d'instruments et peuvent être librement configurés pour répondre à vos besoins. La caméra peut notamment être rangée dans un logement supplémentaire. Un moteur électrique supplémentaire pour les traitements d'implantologie peut également être connecté.



Élément assistante

La conception épurée et claire de l'élément assistante accompagne l'équipe du cabinet dans son travail quotidien.



LEDview Plus

LEDview Plus offre une intensité lumineuse, une couleur de lumière et une surface de champ optimale pour offrir la bonne visibilité lors de chaque traitement. Le mode composite intégré vous permet de prendre tout le temps nécessaire pour traiter les matériaux d'obturation sans qu'ils ne durcissent trop vite. La lumière peut être positionnée et actionnée individuellement à l'aide d'un capteur sans contact.



Crachoir motorisé

Le crachoir est motorisé, ce qui lui permet de pivoter en fonction des besoins. En outre, la position de rinçage est programmable et permet de réaliser un traitement rapide et sûr.

Posture et ergonomie. Et votre journée de travail est simplifiée.

Bien plus qu'une posture saine : une ergonomie adaptée est essentielle pour votre travail quotidien. En effet, les flux de travail peuvent être automatisés et ne vous font gagner du temps que si chaque mouvement est effectué précisément. Avant toute chose, vous prendrez soin de votre corps en ayant les conditions requises pour adopter la bonne posture.

Traitement en station debout

La fonction de réglage en hauteur de l'élément praticien permet de déplacer automatiquement le Smart Delivery Pro vers votre position de travail. Toutefois, si vous décidez de travailler debout, il vous permet de traiter vos patients tout en restant debout, ce qui constitue une option ergonomique supplémentaire.

Appuie-tête motorisé

Pour le positionnement du patient, les réglages d'inclinaison et d'extension de l'appui-tête peuvent être enregistrés pour chaque patient* avec la position du fauteuil.

*Uniquement avec Sidexis 4





Positionnement vertical du point de bouche

Axano connaît et mémorise votre hauteur de travail ergonomique : il déplace automatiquement le point de bouche de vos patients vers la position qui vous convient. Cette fonctionnalité place toujours la bouche du patient dans la même position de traitement mémorisée pour la mâchoire supérieure et inférieure, quelle que soit la taille du patient.



Positionnement ergonomique du patient

La fonction ErgoMotion synchronise les mouvements du dossier et de l'assise pour un positionnement ergonomique de la colonne vertébrale. De plus, vos patients peuvent se détendre pendant leur traitement grâce à la fonction de massage et de soutien lombaire. Les moteurs du fauteuil sont silencieux et peuvent également être ajustés à différentes vitesses.

Préparation et sécurité. Et vous effectuez des traitement de haute qualité.

L'intégration des fonctions de traitement Endo, Implant et Face permet une transition en douceur entre le diagnostic, l'explication et le traitement. Pendant le traitement endo ou implantaire, l'interface utilisateur Smart Touch affiche les étapes de manière claire et compréhensible. De plus, elle permet une utilisation intuitive et avec les mains libres grâce à la pédale Smart Control.

Fonction implantologie


Avec la fonction Implant, vous pouvez sélectionner le système d'implant spécifique que vous allez utiliser dans la bibliothèque intégrée. En outre, les paramètres critiques tels que la vitesse, le couple et la quantité de liquide de refroidissement sont inclus, permettant une pose d'implants sûre, stérile et efficace. Grâce à la fonction Implantologie intégrée, les appareils externes ne sont pas nécessaires.

Fonction endodontie

La précision du contrôle de couple, l'ApexLocator* et la bibliothèque de fichiers unique simplifient votre flux de travail tout en permettant une sécurité clinique optimale. En outre, l'affichage moderne de la progression et de la sélection des limes facilite l'utilisation. Le paramètre de complexité du canal radulaire permet d'optimiser le couple et la vitesse des limes, réduisant ainsi le risque de retraitement. Le processus et la progression du traitement sont visibles sur l'écran Sivision.**

* Localisateur d'Apex

** Uniquement avec Sidexis 4

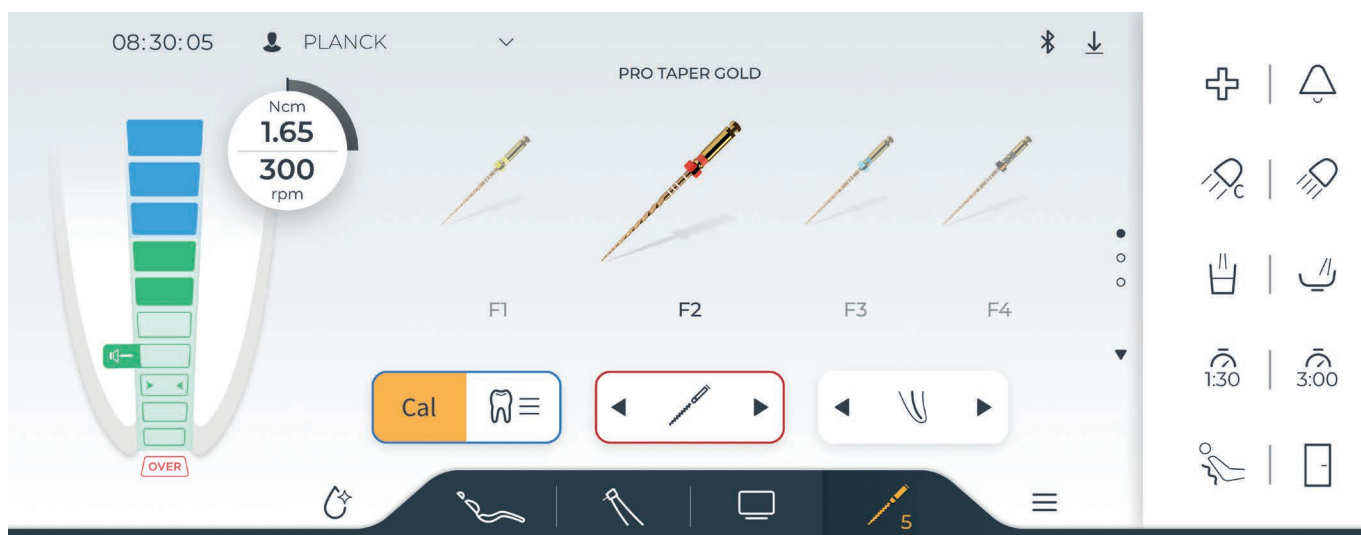

Fonction Face (fluorescence-aided caries excavation*)

Grâce à la lumière fluorescente indiquant les zones cariées, la fonction Face permet de vous aider lors du processus d'excavation. Pour cela, il suffit d'activer Face, de vérifier, puis d'effectuer le traitement comme à l'accoutumée.


*Excavation des caries assistée par fluorescence



Communication patient et confiance. Et vous renforcez la relation avec vos patients.

La communication est essentielle pour instaurer un lien de confiance et une bonne relation avec vos patients. Grâce à la caméra SiroCam AF+ et à l'écran Sivision 22 pouces du poste de traitement, vous pouvez commenter les images intra-orales, les radiographies ou les empreintes optiques avec vos patients directement depuis le fauteuil. Au cours du traitement, vous pouvez les accompagner pas à pas, ce qui contribuera à renforcer leur confiance et à les rassurer.



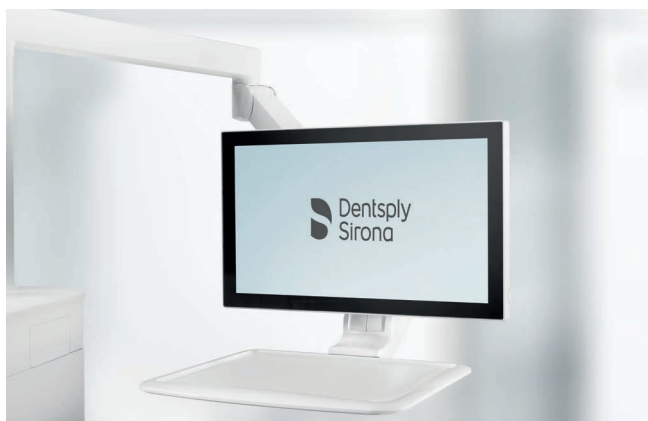

Écran Sivision

Vous pouvez accroître la transparence de votre traitement en utilisant l'écran Sivision 22 pouces pour afficher les différents supports auxquels vous faites référence lors de votre diagnostic. Vos patients se sentiront inclus dans le processus car l'élément visuel contribuera à améliorer leur compréhension de la situation et de l'évaluation clinique.



SiroCam AF+

La caméra SiroCam AF+ optimise la visualisation et la documentation de vos traitements : elle allie la qualité d'image à la simplicité de fonctionnement grâce à la fonction de mise au point automatique. Par ailleurs, lorsqu'elle est associée à l'écran Sivision 22 pouces, vous pouvez voir vos images immédiatement et obtenir une vision efficace et claire de la situation de traitement.



Traitement des images

Vous pouvez sélectionner et modifier les images intra-orales directement sur l'interface utilisateur Smart Touch. Par exemple, vous pouvez marquer les images en couleur et ajouter des annotations pour documenter vos résultats cliniques. Pendant la consultation, vous pouvez afficher différents éléments de la base de données média directement sur l'élément praticien comme support supplémentaire.



Support Smart Device

Plus d'options : vous pouvez utiliser le support Smart Device pour intégrer une tablette dans vos flux de travail lors du traitement. Il suffit de la fixer au plot magnétique de votre élément praticien et d'en faire un élément actif de votre communication avec les patients, par exemple, lorsque vous utilisez l'application Sidexis iX pour communiquer votre diagnostic de traitement. C'est simple, rapide et les mains restent libres.

Hygiène et optimisation du flux de travail. Et vous gagnez un temps précieux.

Des normes d'hygiène élevées avec un minimum d'effort peuvent devenir la norme avec Axano. Tout est orienté vers l'exécution efficace des mesures d'hygiène, des surfaces lisses et faciles à nettoyer aux composants démontables et aux adaptateurs d'assainissement intégrés.

Processus d'hygiène guidés

Le poste de commande de l'hygiène sur le Smart Touch indique les prochains processus d'hygiène à effectuer. Vous pouvez également utiliser le poste de commande d'hygiène pour lancer des processus d'hygiène automatiques dans le cadre d'un rinçage régulier et d'une désinfection intensive mensuelle. Par exemple, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que les cordons des instruments, les tuyaux d'aspiration et le crachoir soient automatiquement rincés avec un agent de nettoyage.

La lumière d'ambiance (Ambient Light) renforce les mesures d'hygiène car elle indique quand un processus est en cours, permettant à l'équipe du cabinet de voir le statut du poste de traitement à distance, ce qui fait gagner du temps et évite le déplacement pour vérification.



Back : Retour

Duration : Durée

Assistant Élément : Élément assistant(e)

Dentist Élément : Élément praticien

Flushing Process complete : Processus terminé

Put down instruments : Reposez les instruments

Done : Terminé



Adaptateurs d'assainissement pour le nettoyage des cordons des instruments

Les adaptateurs d'assainissement intégrés et amovibles permettent un nettoyage et une désinfection faciles des cordons des instruments. Pour rincer régulièrement les voies d'eau, il suffit de connecter directement vos cordons d'instruments aux adaptateurs d'assainissement.



Connecteurs amovibles pour un nettoyage rapide des tuyaux d'aspiration

Les tuyaux d'aspiration peuvent être automatiquement rincés à l'aide d'un seul bouton entre les traitements ou pendant les traitements plus longs. L'agent nettoyant est automatiquement ajouté. Le crachoir peut également être inclus dans le processus de nettoyage.



Pièces amovibles

Toutes les pièces sensibles à l'hygiène sont amovibles, stérilisables et/ou thermo-désinfectables dans le but d'optimiser la protection contre la contamination croisée. Le crachoir peut également être retiré pour être nettoyé facilement et rapidement.



Des surfaces faciles à entretenir

Axano est conçu pour une gestion efficace de l'hygiène. Les surfaces sont lisses et faciles à nettoyer et à désinfecter.



Dentsply
Sirona

Expérience numérique

Flux de travail et intuition.

La personnalisation est au bout des doigts.





Numérisation et design. Et vous contrôlez tout le processus.



Visualisation claire

Les informations importantes sont affichées clairement à l'aide d'icônes et d'images faciles à identifier.

Personnalisation

La fonction Drag&Drop* permet de réorganiser rapidement et facilement les boutons de l'interface utilisateur et de les placer où vous le souhaitez pour un accès efficace.

* Glisser-Déposer

Avec Smart Touch, toutes les fonctions essentielles sont accessibles rapidement et facilement et peuvent être utilisées de manière intuitive. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser la disposition des boutons et des fonctions sur l'interface utilisateur grâce à la fonction Drag&Drop, ce qui vous permet de configurer votre écran en fonction de vos préférences et de vos besoins. Ainsi, vous restez attentif à votre patient lors du traitement.



Commande des médias

Vous pouvez accéder aux médias, les modifier et les contrôler à l'aide de Smart Touch sans jamais devoir passer par un autre ordinateur.

Utilisation facile

Le nouveau design et les options de personnalisation offrent une utilisation intuitive.

Dynamique et flux de travail numérique. Et vous travaillez dans un seul et même processus.

Axano peut être intégré de manière transparente dans les processus de votre cabinet et vous offrir, ainsi qu'à vos patients, une expérience numérique fascinante. Ainsi, vous accédez facilement aux données ou aux médias stockés de vos patients tout au long de leur traitement.

Contrôle des applications PC avec Smart Touch

L'interface utilisateur Smart Touch vous permet de contrôler le traitement tout en profitant des avantages d'un cabinet interconnecté, directement à votre poste de traitement.

Le logiciel Sivision View s'intègre parfaitement dans Sidexis 4

Sivision View vous assiste pendant la consultation et lors de l'explication des traitements à vos patients : vous pouvez afficher des fichiers tels que des images radiographiques, des présentations ou des vidéos à partir de votre base de données média. D'autre part, vous pouvez également enregistrer les positions de traitement pour chaque patient, et le plugin* Endo prend en charge l'affichage de l'ApexLocator sur l'écran.

*logiciel d'extension



Service et réseau. Et le bon service est à votre disposition.

Le service Axano est à l'image d'Axano lui-même - efficace et numérique. Si votre Axano est enregistré, vous recevrez une aide rapide et directe en cas de besoin de maintenance. Améliorez les performances de votre poste de traitement en évitant les pannes. Avec le logiciel de service Axano, vous pouvez facilement planifier la maintenance et réduire les temps d'arrêt.



Votre Axano. Options et équipements personnalisés.



Pratique

- 2x BL ISO F moteur électrique (ou bien BL E)
- Cordon de turbine
- Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL
- Éclairage LEDview Plus
- Jusqu'à 2 tabourets Hugo ou Carl à un prix avantageux



Endo

- Fonction endodontique, y compris les système de limes à mouvement réciproque
- ApexLocator avec affichage sur l'écran Sivision
- Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec éclairage



Implant

- Fonction d'implantologie
- Pompe intégrée pour solution saline
- BL Implant E moteur électrique avec lumière
- Contre-angle Implant 20:1



Sivision

- Alimentation de la caméra sur l'élément praticien
- SiroCam AF+
- Écran 22" Sivision
- Colonne du scialytique avec adaptateur pour écran (supplément pour l'adaptation de l'écran sur le plateau (tray))



Kit ApexLocator



Pompe intégrée pour solution saline



Moteur électrique BL Implant E (avec lumière)



Jeu de vannes pour la connexion d'appareils externes




Plateau de rangement pour la lampe à photopolymériser SmartLite Pro



SiroCam AF+ sur le support supplémentaire



Écran Sivision 22" sur la colonne du scialytique ou du plateau

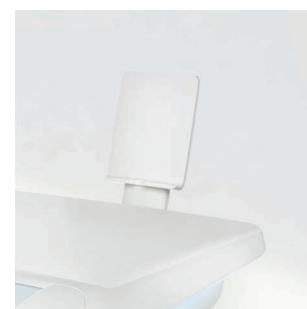

Support Smart Device pour tablette



Tabourets Hugo, Theo, Carl



Modèle sur unit Heliodent Plus



Négatoscope pour radiographies panoramiques



Accoudoirs

Vos options individuelles.

Voici la liste complète de l'équipement standard et des fonctionnalités optionnelles.

Fauteuil	
Positions du fauteuil personnalisées pour chaque patient*	■
Appuie-tête motorisé avec réglages automatiques spécifiques à chaque patient*	■
Ambient Light	□
Sellerie Premium Thermo	□
Sellerie Lounge, avec surpiqûre colorée sur demande	□
Fonction de soutien lombaire/massage	■
Accoudoir pivotant à droite	□
Accoudoir gauche	□
Pédale bidirectionnelle	■
Smart Control	■
Jeu de vannes pour la connexion d'appareils externes	□
Coussin réhausseur pour patients de petite taille	□
ErgoMotion	■
Vitesse de déplacement réglable	■

Élément praticien	
(équipé de Smart Touch, 6 positions, poignées et porte-instrument amovibles)	
Smart Delivery	■
Smart Delivery Pro	□
Sprayvit avec lumière	□
1er entraînement (pour moteur ou turbine)	■
2e entraînement (pour moteur ou turbine)	■
3e entraînement (pour moteur ou turbine)	■
4e entraînement (pour moteur ou turbine)	□
Moteur électrique BL E	□
Moteur électrique BL ISO F	□
Cordon pour turbine	■
Pièce à main à ultrasons SiroSonic TL	□
Fonction Face (fluorescence-aided caries excavation)	□
Fonction d'implantologie	□
Pompe intégrée pour solution saline	□
Moteur électrique BL Implant E	□
Contre-angle Implant 20:1	□
Fonction endodontique, y compris les systèmes de limes à mouvement réciproque	□
ApexLocator avec affichage sur l'écran Sivision	□
Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec éclairage	□
Interface USB	■
Commande mains libres avec contrôle du curseur	■
Support Smart Device pour tablette	□
Négatoscope pour radiographies panoramiques	□

Élément assistante	
(avec écran tactile, support 4 positions amovible)	
Sprayvit avec lumière	□
Dispositif d'aspiration	■
Pompe à salive	■
Dispositif d'aspiration chirurgicale	□
2e tuyau d'aspiration	□
Plateau de rangement pour la lampe de traitement thermique SmartLite Pro	□
Connexion 12 V de type médical	□

Groupe d'eau	
Dispositif de désinfection avec fonctions de désinfection et d'assainissement permanentes	■
Nettoyage chimique du flexible d'aspiration et du crachoir	■
Vanne de crachoir pour aspiration humide	■
Jeu d'extension séparateur automatique	□
Séparateur d'amalgames	□
Bol en verre du crachoir pivotant motorisé Amovible	■
Système d'hygiène avec modules de nettoyage amovibles et fonction d'autopurge	■
Fonction Aqua (alimentation en eau autonome)	■

Communication avec le patient	
SiroCam AF+	□
Écran Sivision 22" sur plateau, plateau inclus	□
Écran Sivision 22" sur la colonne du scialytique	□
Alimentation de la caméra sur l'élément praticien	□
Jeu de câbles pour connexion PC	□

Tabourets de travail	
(ressort à gaz court ou long en option)	
Hugo mains libres (avec commande au pied bidirectionnelle)	□
Hugo Manual (avec levier manuel)	□
Hugo Manual Plus (avec levier manuel et pédale)	□
Carl Manual (avec levier manuel)	□
Carl Manual Plus (levier manuel et pédale)	□
Theo	□

Autres options	
Plateau Sirona	□
Modèle sur unit LEDview Plus	■
Modèle plafonnier LEDview Plus	■
Adaptateur pour combinaison de plafonnier Heliodent Plus/LEDview Plus	□
Adaptateur pour modèle sur unit Heliodent Plus	□
Miroir patient	□
Support de caméra pour l'éclairage	□

■ Compris dans l'appareil de base ou l'ensemble
□ En option

* Disponible avec Sidexis 4

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

Axano. Indications : Poste de traitement pour cabinet dentaire. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

LEDview Plus. Indications : Eclairage opératoire pour poste de traitement dentaire. Classe : I. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

SiroCam F/AF /AF+. Indications : Caméra pour l'enregistrement de radiographies intra-orales. Classe : I. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

Sprayvit M. Indications : Seringue multifonction utilisée pour l'alimentation en fluides (ou en air) chauffée ou non et l'éclairage lors des traitements dentaires. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

Heliodent Plus. Indications : Appareil pour radiologie dentaires, servant à réaliser des radiographies intraorales pour l'examen et le diagnostic des affections des dents, de la mâchoire et des structures buccales. Classe / Organisme certificateur : IIb / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

CEREC AI. Indications : Unité de prise d'empreinte pour la fabrication assistée par ordinateur de restaurations dentaires. Classe : I. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

Moteur BL/ ISO/ BL Implant. Indications : Moteur destiné à l'entraînement de pièces-à-main et de contre-angles rotatifs et oscillants en connexion avec une unité de soins dentaires. En fonction du modèle, le moteur peut également être utilisé pour les mesures endométriques. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

Sidexis 4. Indications : Logiciel de gestion, analyse et diagnostic de radiographies numériques/ numérisées. Gestion et analyse de clichés optiques numériques. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

WaveOne® Gold. Indications : Instruments pour la mise en forme et le nettoyage du système canalair. Classe/Organisme certificateur : IIa / CE 2797. Fabricant : Maillefer Instruments Holding SARL.

RECIPROC®/ RECIPROC® blue. Indications : Instruments pour la préparation et le retraitement du système radiculaire (retrait du matériau d'obturation et d'obturateurs à tuteurs à base de gutta-percha). Contre-indications : en cas de courbure apicale brusque. Les instruments RECIPROC® blue se composent d'instruments à usage unique stériles non restérilisables, conçus pour la préparation et le traitement d'une seule molaire. La réutilisation des instruments et notamment leur stérilisation ne sont pas possibles. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : VDW GmbH.

Contre-angles/ Pièces-à-main (T1/T2/T3). Indications : Les pièces-à-main et les contre-angles sont prévus pour maintenir et actionner les fraises en vue d'un usinage rotatif ou vibrant destinés aux applications suivantes : élimination de la matière carieuse et des obturations dentaires, préparation des cavités et des couronnes dans la substance dentaire dure, traitement des surfaces des dents et des restaurations, traitement des matériaux de prothèses dentaires : couronnes, obturations, bridges (rouge, bleu, vert) / prophylaxie (PROPHY, bleu, vert) / densification de matériau (CONDENS) / endodontologie (contre-angles ENDO, bleu, vert) / endométrie (ENDO 6 L) / implantologie, chirurgie, traitement des os (bleu, vert, Kirschner-Meyer) / prothétique (pièces à main, bleu, vert, EVA). Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH.

SmartLite® Pro. Indications : Lampe pour polymériser des matériaux dentaires à base de camphoroquinone polymérisant à une longueur d'onde comprise entre 450-480 nm pour l'embout Cure et des matériaux à base de CQ et/ou d'autres photo-initiateurs absorbant la lumière violette entre 405-480 nm pour l'embout Polycure. Classe : I. Fabricant : Dentsply DeTrey GmbH. REV. 02/2022.

Dentsply Sirona France

Immeuble Le Colbert - 7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex

N° Service Clients : 01 30 97 66 00 | Fax Service Clients : 01 30 97 65 82

Email : sc-dentaire@dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

 **Dentsply
Sirona**