

L'expérience d'orthodontie  
par aligneurs qui donnera  
le sourire au praticien et  
au patient



## Des solutions inspirées par le patient

Les aligneurs SureSmile® proposent des solutions tout au long du traitement pour que les patients soient satisfaits du premier aligneur jusqu'à la fin du traitement. Maintenant, avec SureSmile® VPro™ et les Contentions SureSmile®, vous pouvez offrir à vos patients plus de raisons de choisir les aligneurs SureSmile® pour obtenir le sourire de leurs rêves.



# Vous déterminez l'objectif du traitement - nous fournissons le plan

Grâce au logiciel de planification de traitement SureSmile®, il est facile de télécharger des empreintes numériques, des radiographies et des photos du patient à partir de presque n'importe quelle source. Vous pouvez compter sur les experts du laboratoire digital SureSmile® pour faire le reste et vous envoyer une proposition de traitement optimisée. Ou, si vous préférez, vous pouvez le personnaliser selon vos propres préférences. Notre plateforme ouverte est compatible avec les caméras Dentsply Sirona ainsi que toutes celles couramment utilisées sur le marché.

## Accédez à votre plan de traitement à tout moment, où que vous soyez

Lorsque le laboratoire digital SureSmile® aura créé la proposition de traitement initiale, vous la recevrez pour la revoir et l'approuver. Le logiciel SureSmile® permet un examen approfondi du cas de chaque patient grâce à un large éventail d'outils. Notre logiciel est basé sur un navigateur, vous pouvez donc revoir vos plans de traitement, que vous soyez dans votre cabinet, chez vous ou en voyage.

### Sélectionnez l'option SureSmile® qui convient le mieux à chaque patient



Forfait comprenant un nombre illimité d'aligneurs de traitement et d'ajustement pendant 3 ans à compter de la fabrication des premiers aligneurs, et incluant maintenant SureSmile® VPro™.


Vous ne payez que les aligneurs dont vous avez besoin, idéal pour les cas moins complexes. Peut inclure SureSmile® VPro™ avec des frais supplémentaires.

## Les aligneurs SureSmile® - la solution de gouttières transparentes de Dentsply Sirona

Tout au long du traitement et au-delà, vous bénéficiez du soutien de Dentsply Sirona, qui a plus de 100 ans d'expérience dans les solutions de santé bucco-dentaire. SureSmile® a plus de 20 ans d'expérience dans la fourniture de solutions de traitement orthodontique. Lorsque vous choisissez les aligneurs SureSmile®, vous pouvez être rassuré en sachant que vous avez le soutien de décennies d'expérience dentaire.

## Une technologie de pointe

Les aligneurs SureSmile® sont fabriqués par des experts qui utilisent les dernières technologies et des matériaux éprouvés. Des caractéristiques uniques permettent de les personnaliser, même pour les cas les plus difficiles. Un traitement précis des données et un contrôle qualité approfondi garantissent une adaptation, une durabilité et des aligneurs transparents, pratiquement indétectables.

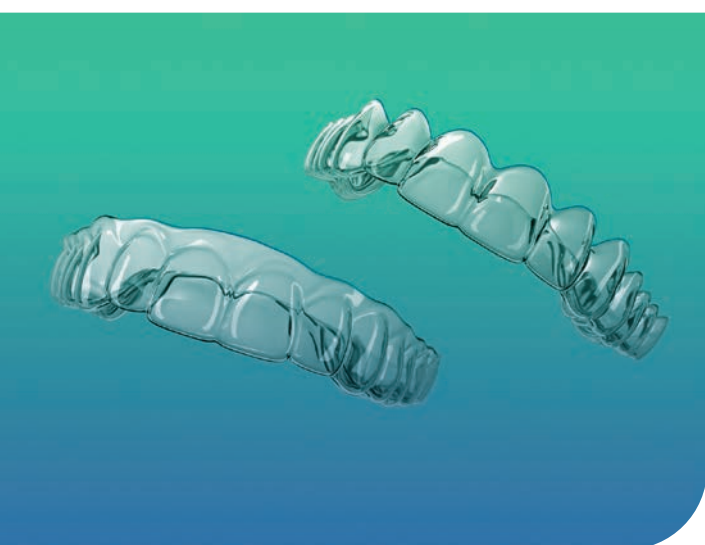

### Le confort passe par une ligne de découpe variable

Avec les aligneurs SureSmile®, vous pouvez personnaliser le design de votre ligne de découpe. Un processus automatisé de découpe au laser de haute précision est utilisé pour offrir le meilleur confort possible. Les bords des aligneurs SureSmile® sont lisses, que vous choisissiez une ligne de découpe droite ou festonnée.

La **ligne de découpe droite** suit la gencive à une distance constante, que vous déterminez. Un léger chevauchement de la gencive peut avoir un effet positif sur la transmission de la force et même réduire le nombre de taquets nécessaires.

La **ligne de découpe festonnée** suit le tracé de la gencive et est encore moins visible que la ligne de coupe droite.


## Un contrôle qualité rigoureux

Les aligneurs SureSmile® vous donnent, ainsi qu'à vos patients, confiance dans le processus de traitement. Chaque proposition de traitement subit des contrôles de qualité rigoureux et est validée par un expert clinique de notre laboratoire digital.




## Une transmission de forces adaptée

Les aligneurs SureSmile® intègrent des matériaux de haute performance pour gérer plusieurs taquets et sont personnalisables.

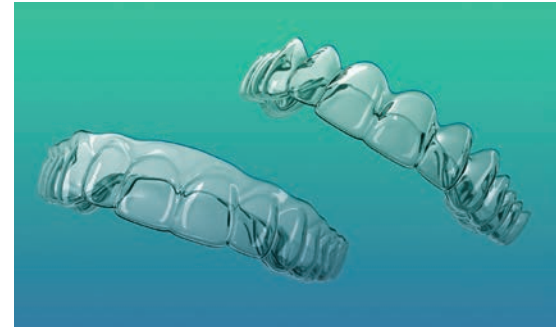

## Amélioration de la planification du traitement

La modification des dents en 3D permet au praticien de prendre le contrôle du plan de traitement. Les praticiens ont la possibilité de déplacer les dents précisément là où ils le souhaitent. La modification des mouvements de chaque dent permet une planification et une approbation plus efficaces du traitement.

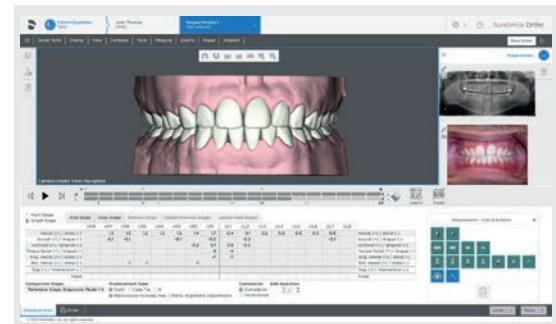


## Des sourires sur mesure

Lorsque les données radiographiques sont fournies, elles sont enregistrées dans un modèle 3D pour superposer les photos afin de planifier la position finale des dents pour qu'elles soient en accord avec les caractéristiques naturelles du visage de votre patient.



## Timeline et programmation du stripping (IPR)

Notre logiciel présente une animation graphique du plan de traitement de votre patient. La timeline indique quand les taquets doivent être placés, à quels rendez-vous la réduction interproximale (IPR) doit être effectuée et sur quelles dents.

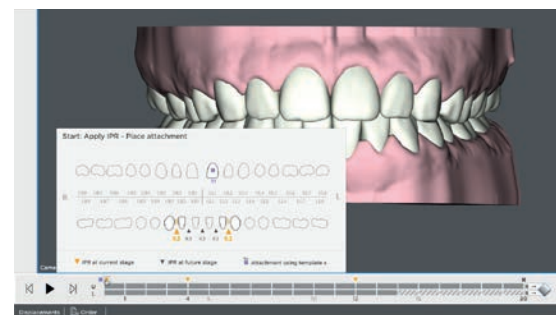

# Intégration transparente

Nous avons mis à profit notre expérience en matière de planification numérique des traitements orthodontiques, combinée à notre expérience en tant qu'entreprise de solutions dentaires, pour vous proposer un moyen simple d'intégrer vos réglages initiaux et des plans de traitement qui permettent de prévoir l'évolution du patient et d'obtenir des résultats convaincants.

Le flux de travail de planification de traitement SureSmile® peut être intégré de manière transparente dans tous les cabinets. Notre logiciel est basé sur un navigateur, ce qui évite le téléchargement sur votre ordinateur. Les étapes sont les suivantes :



## Collecter les informations du patient

Des photos et une empreinte numérique sont prises lors du premier rendez-vous. Le flux de travail de planification du traitement SureSmile® accepte les scans provenant de la caméra intra-orale Primescan® et d'autres caméras couramment utilisées. En option pour les traitements par aligneurs : Données radiographiques pour un diagnostic plus complet.



## Prévisualiser le nouveau sourire

Vos patients pourront voir à quoi pourrait ressembler leur nouveau sourire avant de commencer le traitement. Créez facilement des visualisations 3D en utilisant les données précises de la caméra intra-orale Primescan® et lancez la commande d'aligneurs SureSmile®, tout en restant au fauteuil.




## Soumettre la prescription

Faites confiance à nos spécialistes du laboratoire digital ou précisez vos préférences de traitement.



## Valider ou modifier le plan de traitement

Tous les plans de traitement soumis au laboratoire digital SureSmile® sont soumis à un processus de planification complet et un contrôle qualité par un spécialiste du laboratoire digital.

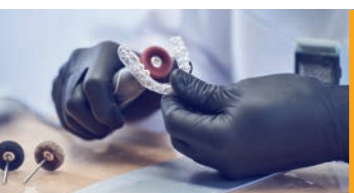

## Fabriquer les aligneurs

Une fois que vous avez approuvé le plan de traitement, les aligneurs SureSmile® sont fabriqués sur mesure à l'aide d'un procédé innovant.



## Commencer le traitement

Lorsque le kit patient, le SureSmile® VPro™ et les aligneurs SureSmile® arrivent dans votre cabinet, il est temps de commencer le traitement.



## Maintenir les résultats

Lorsque le traitement est terminé, les Contentions SureSmile® sont essentielles pour garantir que le nouveau sourire du patient reste droit.

# Des patients plus heureux

SureSmile® VPro™ est un dispositif à vibrations à haute fréquence que les patients peuvent utiliser à domicile pour faciliter l'insertion des aligneurs. Le SureSmile® VPro™ peut réduire la gêne occasionnée et réduire la durée du traitement lorsqu'il est utilisé cinq minutes par jour avec les aligneurs.<sup>1-3</sup>

## Aider vos patients à protéger leur investissement

N'oubliez pas de commander les Contentions SureSmile® conçues pour prévenir la récurrence dentaire et protéger l'investissement des patients dans leur sourire.

## Application SureSmile® VPro™

Les patients peuvent connecter l'application SureSmile® VPro™ avec leur dispositif afin de :

- Suivre l'utilisation quotidienne du SureSmile® VPro™
- Recevoir des rappels pour utiliser le dispositif et changer les aligneurs selon la prescription
- Surveiller la batterie du SureSmile® VPro™
- Partager avec vous les résultats et les photos des progrès



## Formation et soutien à chaque étape du processus

En tant que praticien SureSmile®, vous recevrez une assistance experte adaptée aux objectifs de votre cabinet. Suivez notre programme d'intégration en ligne avec la plateforme SureSmileU®. Accédez à des formations par le biais de la Dentsply Sirona Academy, une vaste bibliothèque de ressources éducatives et de formations en personne. Recevez une assistance en cabinet grâce à notre équipe d'experts de vente sur le terrain, de spécialistes de l'implémentation clinique et d'experts techniques et cliniques de notre hotline qui travaillent ensemble pour vous aider à réussir.

**Associez-vous à la marque d'aligneurs de Dentsply Sirona, le leader mondial des soins bucco-dentaires depuis plus de 100 ans et aidez à répandre le pouvoir contagieux du sourire.**



Contactez votre représentant Dentsply Sirona  
ou visitez [SureSmile.com](https://www.SureSmile.com) pour apprendre comment  
vous pouvez offrir la confiance d'un sourire aligné à vos patients.



[www.SureSmile.com](https://www.SureSmile.com)

**SureSmile Ortho** : Indication : logiciel pour soin orthodontique avec acquisition d'image, planification et administration du traitement, suivi des soins et conception du système d'appareils sur mesure. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE 0123. Fabricant : OraMetrix Inc. Rev : 03/2023

**SureSmile Aligner** : Indication : logiciel pour soin orthodontique avec acquisition d'image, planification et administration du traitement, suivi des soins et conception du système de gouttières d'alignement sur mesure. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE 0123. Fabricant : OraMetrix Inc. Rev : 03/2023

**Aligneurs SureSmile** : Dispositif médical sur mesure. Indication : Gouttières en plastique transparent de marque ESSIX utilisées pour des traitements orthodontiques sur mesure. Classe : IIa. Fabricant : OraMetrix Inc. Rev : 03/2023

**Contentions SureSmile** : Dispositif médical sur mesure. Indication : Gouttières en plastique transparent de marque ESSIX utilisées pour la contention et la prévention des récurrences à la fin d'un traitement orthodontique. Classe : IIa. Fabricant : OraMetrix Inc. Rev : 03/2023

**SureSmile VPro™** : Indication : Appareil de vibrations à haute fréquence (HFV) destiné aux patients qui suivent un traitement orthodontique avec des aligneurs pour faciliter les mouvements mineurs des dents antérieures. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE2797. Fabricant : Dentsply LLC Rev : 03/2023

**Dentsply Sirona France**

Immeuble Le Colbert - 7ter, rue de la porte de Buc - 78008 Versailles Cedex

**Contact Hotline SureSmile**

[suresmile-fr-support@dentsplysirona.com](mailto:suresmile-fr-support@dentsplysirona.com)

01 30 97 65 10

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

