

Dentsply Sirona Imaging Solutions

歯科用X線撮影装置  
フラッグシップモデル

# Axeos

 アクセオス

Experience the difference

優れた画像を提供し、治療計画用ソリューションへとつなげる  
Digital Dentistry のためのパノラマ／セファロ／CT複合機です。

Debut!



Ø17cm×13cm

3D撮影範囲

- 直径17×高さ13cm **New!**
- 直径11×高さ10cm
- 直径8×高さ8cm
- 直径5×高さ5.5cm



reddot winner 2020

# Axeos

## Experience the difference



### 臨床における信頼性

診断、治療の精度、臨床の安全性を高めるための優れた画像を提供



パノラマテクノロジー「DCSセンサー」

Direct Conversion Sensor(DCS)を用いたパノラマX線撮影。X線が電気信号に直接変換されるため、従来のシステムのような光変換に伴う信号ロスが生じず、精細度の高い画像が得られます。



低被ばくモード「LOW DOSE」

2DのX線と同じ線領域にて3D撮影が可能。画像処理により、低減された線量でも骨のような骨密度の構造を画像として収集、歯列矯正やインプラント治療の領域においても便利かつ効果的に使用できます。



アーチファクトを大幅軽減「MARS」

メタル等はCT画像上でアーチファクトと呼ばれる障害陰影を発生させる原因となり、誤診につながります。デンツプライシロナ独自のアルゴリズムにより自動的にアーチファクトを軽減しました。

### スマートコネクティビティ

多数の治療計画ソフトウェアにより、シームレスでスムーズに統合されたワークフロー




画像診断ソフトウェア「SIDEXIS 4」

直感的でわかりやすいインターフェース。画像を一画面で表示させることで、患者さんにも説明しやすく、コンサルテーションツールとしても活用できます。



インプラントプランニングソフトウェア「SICATインプラント」

CBCTデータと口腔内スキャナーデータのマッチングにより、インプラントプランニングとサージカルガイドを製作することも可能です。

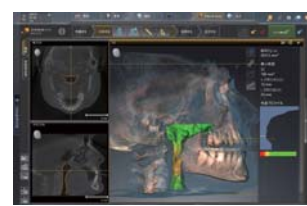

気道解析用ソフトウェア「SICATエア」

閉塞性睡眠時無呼吸症(OSA)治療、矯正治療、筋機能療法、全顎的包括治療等にも活用可能な3Dソリューションです。

### UXデザイン

革新的なデザインと使いやすさにより、診療スタッフ・患者さんに快適な撮影環境を提供



イーザーパッドpro

ボタン・シンボルがわかりやすく並んでいるため、操作が簡単。パッド自体はX線室の状況に合わせてフレキシブルに回転・角度調整が可能。



確実なポジショニング

バイトブロックの角度により最適な咬合平面を認識。電動の三点式ヘッドサポートハンド、位置決めEVIビームライトなどにより画像再現性を高めます。



キャビネット・コスミックライト

バイトブロックなどが収納可能なキャビネット付き。暗いイメージのレントゲン室を明るく保つコスミックライト。



操作シミュレーション

販売名：アクセオス 一般的名称：アーム型X線CT診断装置 認証番号：302AKBZX00062000 管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器  
販売名：シdexis4 一般的名称：汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム 認証番号：227AABZIO0103000 管理医療機器  
販売名：オーソフォス XG 3D 一般的名称：アーム型X線CT診断装置 認証番号：222AABZIO0193000 管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器

ご用命は

### 製造販売元 デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

#### ■各ショールーム

- |        |                   |      |                   |
|--------|-------------------|------|-------------------|
| ■札幌    | Tel: 011-709-5800 | ■横浜  | Tel: 045-440-1521 |
| ■盛岡    | Tel: 019-604-2340 | ■静岡  | Tel: 054-653-2711 |
| ■庄内    | Tel: 0235-29-1217 | ■名古屋 | Tel: 052-251-8467 |
| ■仙台    | Tel: 022-266-4020 | ■大阪  | Tel: 06-6243-6636 |
| ■埼玉    | Tel: 048-799-2931 | ■広島  | Tel: 082-546-2301 |
| ■東京・銀座 | Tel: 03-5148-7895 | ■福岡  | Tel: 092-518-1800 |

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

BG 3901PD