

SmartLite® FOCUS

スマートライト フォーカス

軽くてシンプルな操作性と使いやすさに
フォーカスした『ペンタイプLED照射器』です。

- ・軽くて持ちやすい
- ・臼歯部にも当てやすい
- ・照射時に熱くならない
- ・照射光が減衰しにくい
- ・ボタン操作がカンタン



軽くてシンプルな操作性と
『ペンタイプLED照射器』で



使いやすさにフォーカスした す。

軽くて持ちやすい

重さわずか90gと軽く、手にフィットしやすい設計のため、照射中に手振れすることなく誰でもカンタンに扱えます。

重量わずか

90g


スリムな形状で臼歯部にも当てやすい

スリーブがストレートで、ヘッドもコンパクトなため、お子様や開口量の少ない患者さんの臼歯部にも当てやすいデザインです。また、スリーブは 330° 回転しますので口腔内のどの部位にも無理なく光を当てることができます。

330°



先端は330°
回転可能

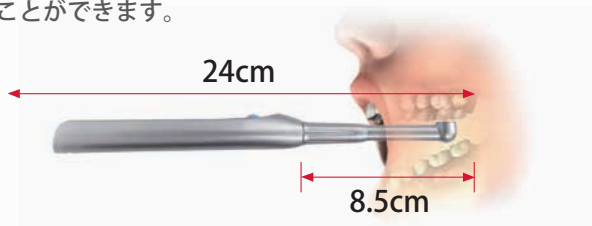

照射時に、熱くならない

照射時に発生する熱を、本体側に逃がすように設計されているため、歯肉付近の照射や、有髄歯への刺激など患者さんへ負担をかけずにご使用いただけます。

熱の流れ



照射距離が離れても減衰しにくい

光直進性が高く、窩底部やレジンコアなど照射距離があいてしまうような症例でも光量を保ったままの照射が可能です。



スマートライト FOCUS



当社従来品

ボタン操作が簡単で迷わない


照射モードの選択や、時間設定などの複雑な設定は必要ありません。ボタンはひとつだけ、一度押すと照射がスタートし、もう一度押すと止まるので、任意の時間で照射時間を設定できます。最大で 20 秒までの照射が可能です。

1Touch



- バッテリーパックは、歯科医院で交換可能
- 最短 10 分で急速充電可能*

* バッテリー切れ、残量が少ない時は、5分で使用できる容量まで自動で急速充電されます。

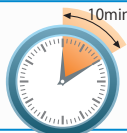

バッテリー交換が必要な際も、機器を預けずに交換できます

仕 様

■ 寸 法	L240mm×W31mm
■ 重量(照射器)	90g
■ 波長域	460-490nm
■ 出 力	1,000mW/cm ²
■ 照射口径	約 10mm

■ 充電時間	最大 3 時間
■ 電圧・周波数	100-240VAC 50/60Hz
■ 照射可能時間	40 分(完全充電時)
■ バッテリー	LSD バッテリー(低自己放電型電池)

製品一覧



製品コード：64450020

スマートライト FOCUS イントロキット

標準価格：169,010 円

スマートライト FOCUS リフィル	1 個
スマートライト FOCUS 用バッテリー	1 個
スマートライト FOCUS 用スリーブ	300 枚
スマートライト FOCUS 用シールド	5 個
スマートライト FOCUS 用充電器	1 個
スマートライト FOCUS 用アダプター	1 個



製品コード：64450021

スマートライト FOCUS 用 バッテリー

標準価格：18,140 円



製品コード：64450040

スマートライト FOCUS 用 シールド (5 個入)

標準価格：8,820 円



製品コード：64450030

スマートライト FOCUS 用 スリーブ (300 枚入)

標準価格：5,880 円



製品コード：64450050

スマートライト FOCUS 用 ACアダプター (1 個)

標準価格：9,070 円



製品コード：64450070

スマートライト FOCUS 用 充電器 (1 個)

標準価格：20,410 円

販売名：スマートライト FOCUS 一般的名称：歯科重合用光照射器 医療機器届出番号：13B1X10236Y03870 クラス分類：クラスⅠ（一般医療機器）特定保守管理医療機器

*表示価格は、2023年7月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座 8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-461-868 FAX:0120-120-689

www.dentsplysirona.com