

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY



# Dentsply Sirona Treatment Centers

歯科用ユニット総合カタログ

[dentsplysirona.com](https://dentsplysirona.com)



Treatment Center  
Website



# Dentsply Sirona Pro spec treatment

デンツプライシロナのトリートメントセンターは診療室そのものの。

術者や医療チームにとって操作性がよく効率性に優れ、患者さんの快適性にも配慮され設計されています。シンプルな操作で効果をもたらすハイジーン性能や耐久性を実現したデンタルユニットです。

## エルゴノミック デザイン



トリートメントセンターの美しいフォルムは術者にも患者さんにも優しく使いやすい、人間工学的に考えられた機能美です。

## 直感的な 操作




液晶タッチパネルなどのユーザーインターフェースによりほぼすべてのユニットの操作を直感的に実行することができます。フットコントローラーやフットスイッチは足元でインスツルメントやチェアの調整をハンズフリーで行うことができ、診療に集中することができます。

## 患者さんの 快適性



独特なシート形状は患者さんの診療中の負担を和らげる、水に浮いたような心地よい姿勢を取ることができます。頸椎を支えるヘッドレストは首や頭部のストレスを軽減します。スムーズでゆっくりとした動作は、患者さんの不安を取り除きリラックスして治療を受けられるように配慮されています。患者さんの快適性はより良い治療結果をもたらすと私たちは考えています。

## 術者やチームの 効率性

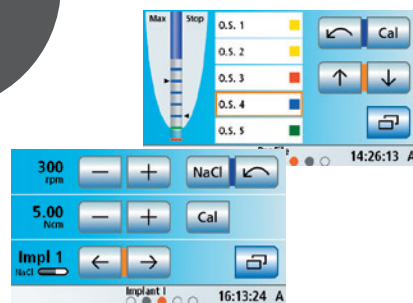

インプラント機能（生理食塩水供給装置付）、歯内療法機能（根管長測定機能付）、患者コミュニケーション機能をビルトインすることで、治療前後の準備や清掃作業が短縮され診療効率アップにつながります。

※機種によりオプション追加できる機能に違いがあります。

Axano

Innovation meets fascination.

# Axano

デンツプライシロナトリートメントセンターの  
フラッグシップモデルAxano。  
イノベーションが日々の診療に“ときめき”を生み出します。

## デジタルエクスペリエンス

Axanoは、ご利用中の診療プロセスにシームレスに統合可能であり、  
歯科医療従事者にも患者さんにも魅力的なデジタル体験を提供  
します。

保存されている患者さんのデータやメディアにアクセスし、透明性の  
あるコンサルテーションを提供します。

## 優れたワークフロー

スマートフォンを触るように操作が可能なSmart Touchユーザー  
インターフェースをはじめ、高さ調節が可能な電動走行型ドクター  
ユニット、可視化された衛生管理フロー、操作性を向上させたフット  
コントローラー。これらがよりシンプルで洗練されたワークフローの  
構築を可能とします。

## スマートデザイン

Axanoは人間工学により術者・患者さん双方に高い快適性をもたら  
します。必要な機能はビルトインし、診療室内をすっきりと清潔に保つ  
ことが可能となります。診療室を彩るだけでなく衛生管理ステップの  
可視化を担うAmbient lightを搭載。各コンポーネントが一体化した  
治療台を発表した1980年代から変わらないコンセプトが時代と  
共に昇華し、Axanoのデザインを作り上げています。



Smart Touch  
ユーザーインターフェース



スマートコントロール

標準仕様リスト	
パシエントチェア	モータードライブヘッドレスト プレミアムシート スマートコントロール フットコントローラー 4wayフットスイッチ エルゴモーション 左アームレスト アンビエントライト 外部接続用バルブセット
ドクターユニット	スマートデリバリープロ スマートタッチ ユーザーインターフェース インスツルメントホルダー：6/ハンガー シリンジ：スプレービットM ×1 切削回路：タービン ×1、モーター ×2 シビジョンレディ シリコンマット

ウォーターユニット	オートマチックセパレーター コップ自動給水 モータードライブ旋回式 ガラス製カスピドボウル サクシジョンホース自動洗浄機能 清浄水供給システム 洗浄剤添加機能 パージ/オートパージ/サンニテーション機能
アシスタントユニット	インスツルメントホルダー：4/ハンガー シリンジ：スプレービットM ×1 吸引回路：バキューム ×1、排唾管 ×1 シリコンマット
オペレーティングライト	無影灯LEDビュープラス



Sinius

More efficiency

Sinius

効率性と快適性、そして美しさを備えた  
バランスに優れた自信のトリートメントセンター

### Efficiency Classの利点

- 直感的操作が可能な4.3インチ液晶タッチスクリーン「EasyTouchユーザーインターフェイス」
- 厳しいヨーロッパ基準のハイジーンコンセプトを実現。簡単な操作で衛生管理を実施可能です。
- ユニークな流線形のフォルムは患者さんにもデンタルチームにも好評です。
- 多様な機能・装備が直感的に使用可能で術者のストレスを低減します。

### 快適さと効率性の調和

患者さんの快適さは、先生のメリットです。長時間の診療でも患者さんの快適さを保つ多くの工夫がSiniusにはあります。患者さんが快適に診療を受けられることで、先生は治療に集中することができます。

- モータードライブヘッドレストは患者さんの頸椎を優しくホールドし、無理なく適切な診療ポジションに導きます。
- 独自の診療姿勢と体にフィットするバックレストにより長時間の診療でも患者さんは疲れにくく、快適に受診できます。
- プレミアムシートは全体でバランス良く患者さんの体重を受けることで、薄型ながら良好な座り心地を約束します。
- 将来に口腔内カメラやモニターなどを後付け可能です。



Sinius スライドトラックシステム



Sinius TS オーバーアーム



Sinius CS ホイップアーム

標準仕様リスト	
パシエントチェア	モーターヘッドレスト 無線フットコントローラー 4wayフットスイッチ エルゴモーション機能 左アームレスト 外部接続用バルブ ベースプレート
ドクターユニット	インストルメントホルダー：5ハンガー 4.3インチEasyTouchユーザーインターフェイス 切削回路×2 (LEDライト付:タービン×1、モーター×1) LEDライト付5ウェイシリンジ スプレービットM シビジョンレディ

ウォーターユニット	コップ自動給水 ガラス製スピットン サクシオンホース自動洗浄機能 清浄水供給システム 水回路洗浄システム 洗浄剤添加機能
アシスタントユニット	LEDライト付5ウェイシリンジ スプレービットM サクシオン・バキューム回路 各×1 シリコンマット
オペレーティングライト	LEDビュープラス



Performance you can rely on

# Intego pro

Intego proはIntegoの上位モデルとして、より高い機能と装備で診療ワークフローを効率化します。

## Integoの機能・装備をさらにパワーアップ

- 4.3インチ液晶タッチパネルを装備したEasyTouchユーザーインターフェイスは多様な機能を直感的に操作できます。  
※アドバンス/イノベーションパッケージのIntego proに装備
- 衛生管理機能を上位モデルと同等にアップグレード可能です。サクシジョン・排唾管ホース内部を自動的に洗浄する「サクシジョンオートクリーンシステム」が標準装備されています。  
清潔な水で治療を行うことができる「清浄水供給システム」、水回路を強力に洗浄する「サニテーション」、サクシジョンラインを洗浄剤で清掃できる「洗浄剤添加機能」をオプションで装備することができます。
- ガラス製スピットンと自動給水機能(オートコック)を標準装備。
- 効率的な診療ワークフローを実現するために、Intego proを必要な仕様にカスタマイズできます。WaveOneGoldを使用可能な歯内療法機能、口腔内カメラや22インチモニターを装備することが可能です。



Intego pro CS ホイップアーム



Intego pro TS オーバーアーム

標準仕様リスト	
ペーシエントチェア	有線C+フットコントローラー ダブルジョイントヘッドレスト 4wayフットスイッチ エルゴモーション機能 左アームレスト ベースプレート
ドクターユニット ハンギングホース仕様 または ホイップアーム仕様	インストルメントホルダー：5ハンガー Easy Padユーザーインターフェイス 切削ドライブ回路×2(LEDライト付:タービン×1、モーター×1) LEDライト付3ウェイシリンジ スプレービットE

ウォーターユニット	オートマチックセパレーター オートコック(自動給水機能) サクシジョンホース自動洗浄システム マニュアル旋回式カスピドボウル(ガラス製) ウォーターヒーター
アシスタントユニット (コンフォートタイプ)	インストルメントホルダー：4ハンガー サクシジョン・バキューム回路 各×1 LEDライト付3ウェイシリンジ スプレービットE Touch Padユーザーインターフェイス
オペレーティングライト	LEDビュープラス



Performance you can rely on

# Intego

Integoは上位機種と基本コンセプトを共有したモデルです。人間工学に基づいた快適性と効率性、スタイリッシュで優美なデザインはそのままにシンプルな構成のパフォーマンスクラスのトリートメントセンターです。

### 3つのアドバンテージ

●エルゴノミックデザイン

Integoは上位クラスで実証済みの美しいデザインを継承するとともに、人間工学的設計により、スムーズな診療ワークフローと快適な患者さんのコンフォートを両立しています。

●ドイツ製品質

Integoは高品質な素材を使用し、高い品質保証基準によりドイツ・ベンツハイム工場で製造され、信頼性と耐久性に優れています。

●グレートバリュー

普及クラスとして開発されたIntegoは同クラスの経済性を持ちながら高い機能と装備を実現しています。

●豊富なオプション

診療スタイルに合わせたカスタマイズが可能です。

★シリンジ、エアータンク、マイクロモーター、超音波スケーラー\*は全てLEDライト付の温水供給です。

★ボトルタイプ清浄水供給システム、バージ&サニテーション機能、サクションホース自動洗浄システムをオプションで付けることにより高いハイジーン基準を達成可能です。

★EasyPadユーザーインターフェースにより多様なインスツルメントコントロールと各種のメモリーが可能です。

※オプション



Intego TS オーバーアーム



Intego CS ホイップアーム

標準仕様リスト	
ペーシエントチェア	プレミアムシート ダブルジョイントヘッドレスト 有線C+フットコントローラー 4wayフットスイッチ エルゴモーション機能 左アームレスト ベースプレート 外部機器用バルブセット
ドクターユニット	インスツルメントホルダー：5ハンガー Easy Padユーザーインターフェース 切削ドライブ回路×2(LEDライト付タービン×1、モーター×1) LEDライト付3ウェイシリンジ スプレービットE

ウォーターユニット	コンパクトタイプ オートマッチセパレーター マニュアル旋回式カスビドボウル ウォーターヒーター
アシスタントユニット	コンフォートタイプ(2・4ハンド治療対応) インスツルメントホルダー：4ハンガー サクション・バキューム回路 各×1 LEDライト付3ウェイシリンジ スプレービットE Touch Padユーザーインターフェース
オペレーティングライト	LEDビュープラス




# ent center

## 高いレベルの ハイジーン コンセプト



厳しいヨーロッパ基準に準拠したハイジーンシステムを装備。清拭性の高いデザイン、ユニット内の水の自動入れ替えやサクシヨンの自動洗浄、さらには水回路の消毒システムなどチームの手間をかけず感染予防を行うための機能が備わっています。

## 信頼性

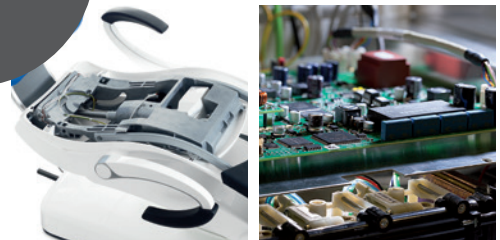

ヨーロッパの厳しい基準に準拠した素材や製造工程、品質管理プログラムによって製造されたデンツプライシロナのトリートメントセンターは、アルミダイキャスト製の頑丈なフレームや、多くの安全スイッチなどが毎日の診療を支えます。

# Working stool line-up

## Hugo (フーゴ)

デンツプライシロナのエルゴノミクスプログラムを体現したフラッグシップモデル



### Hugo マニュアル

座面下部のレバーによる  
マニュアル高さ調整

### Hugo マニュアルプラス

フットレスト付き、  
座面下部のレバーによる  
マニュアル高さ調整

### Hugo フリーハンド

フットリングでの  
高さ調整により衛生的

## Theo (ゼオ)

着座の安定性と快適性を兼ね備えた  
サドルスツール



### Theo

熱がこもりにくい  
サーモシート採用モデル

### Theo ラウンジシート

見た目にも美しい  
ラウンジシートモデル

## Carl (カール)

背もたれが360°回転し、診療中の姿勢を  
サポート



### Carl マニュアル


座面下部のレバーによる  
マニュアル高さ調整

### Carl マニュアルプラス

フットレスト付き、  
座面下部のレバーによる  
マニュアル高さ調整

### 高さの目安

ロング	身長 170cm~200cm
ショート	身長 150cm~180cm

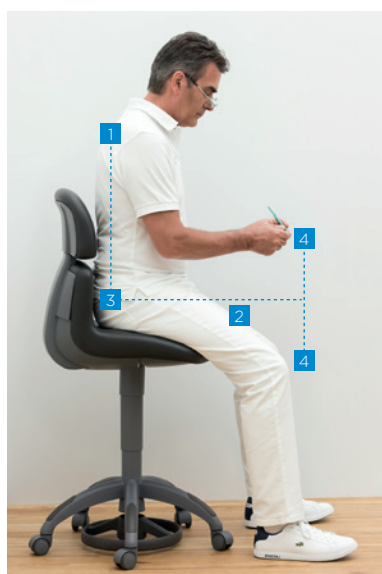

## 健康的な座位診療姿勢の基本

- 1 深く座り、上半身をまっすぐにして背を伸ばします
- 2 腰は太ももよりも高くします
- 3 作業を休止するときだけ、背もたれに背をつけます
- 4 膝と手の距離は、患者さんの頭部を囲みいれるスペースを確保する程度に広げてください。

一般的名称:歯科用ユニット 販売名:トリートメントセンター Axano 認証番号:304AABZX00055000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器  
 一般的名称:歯科用ユニット 販売名:シロナ SINIUS 認証番号:224AABZI00065000 管理医療機器 特定保守管理医療機器-設置管理医療機器  
 一般的名称:歯科用ユニット 販売名:シロナ INTEGO 認証番号:226AABZI00151000 管理医療機器 特定保守管理医療機器-設置管理医療機器  
 一般的名称:歯科用ユニット 販売名:シロナ INTEGO pro 認証番号:228AABZI00067000 管理医療機器 特定保守管理医療機器-設置管理医療機器  
 一般的名称:汎用歯科用照明器 販売名:LEDビュープラス 届出番号:13B1X10236S50006 一般医療機器

### 製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

www.dentsplysirona.com

### ■各ショールーム

■札幌 Tel: 011-709-5800  
 ■盛岡 Tel: 019-604-2340  
 ■仙台 Tel: 022-266-4020  
 ■埼玉 Tel: 048-799-2931  
 ■東京・銀座 Tel: 0120-461-868  
 ■横浜 Tel: 045-440-1521

■静岡 Tel: 054-653-2711  
 ■名古屋 Tel: 052-251-8467  
 ■大阪 Tel: 06-6243-6636  
 ■広島 Tel: 082-546-2301  
 ■福岡 Tel: 092-518-1800

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

100785\_202209\_BT 3806PD




# ent center

高いレベルの  
ハイジーン  
コンセプト



厳しいヨーロッパ基準に準拠したハイジーンシステムを装備。清拭性の高いデザイン、ユニット内の水の自動入れ替えやサクシンの自動洗浄、さらには水回路の消毒システムなどチームの手間をかけず感染予防を行うための機能が備わっています。

信頼性

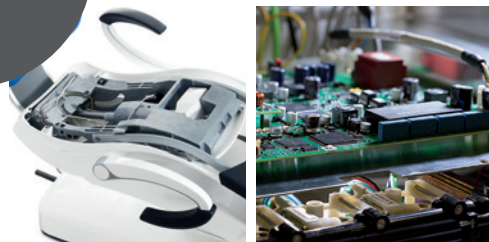

ヨーロッパの厳しい基準に準拠した素材や製造工程、品質管理プログラムによって製造されたデンツプライシロナのトリートメントセンターは、アルミダイキャスト製の頑丈なフレームや、多くの安全スイッチなどが毎日の診療を支えます。

## Working stool line-up

### Hugo (フーゴ)

デンツプライシロナのエルゴノミクスプログラムを体現したフラッグシップモデル



**Hugo マニュアル**  
座面下部のレバーによる  
マニュアル高さ調整

**Hugo マニュアルプラス**  
フットレスト付き、  
座面下部のレバーによる  
マニュアル高さ調整

**Hugo フリーハンド**  
フットリングでの  
高さ調整により衛生的  
高さ調整

### Theo (ゼオ)

着座の安定性と快適性を兼ね備えたサドルシート



**Theo**  
熱がこもらない  
サーモシート採用モデル

**Theo ラウンジシート**  
見た目にも美しい  
ラウンジシートモデル

### Carl (カール)

背もたれが360°回転し、診療中の姿勢をサポート




**Carl マニュアル**  
座面下部のレバーによる  
マニュアル高さ調整

**Carl マニュアルプラス**  
フットレスト付き、  
座面下部のレバーによる  
マニュアル高さ調整

#### 高さの目安

ロング	身長 170cm~200cm
ショート	身長 150cm~180cm

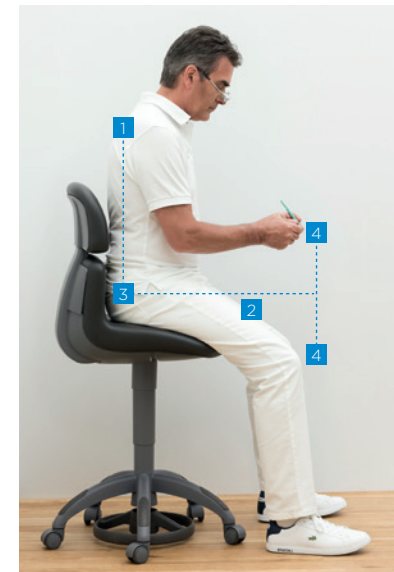

## 健康的な座位診療姿勢の基本

- 1 深く座り、上半身をまっすぐにして背を伸ばします
- 2 腰は太ももよりも高くします
- 3 作業を休止するときだけ、背もたれに背をつけます
- 4 膝と手の距離は、患者さんの頭部を囲み入れるスペースを確保する程度に広げてください。

一般的な名称: 歯科用ユニット 販売名: トリートメントセンター Avano 認証番号: 3044ABZK00055000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器  
 一般的な名称: 歯科用ユニット 販売名: シロノ SINUS 認証番号: 224AAZ00065000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器  
 一般的な名称: 歯科用ユニット 販売名: シロノ INTEGO 認証番号: 222AAZ0011510000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器  
 一般的な名称: 歯科用ユニット 販売名: シロノ INTEGO pro 認証番号: 222AAZ00067000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器  
 一般的な名称: 汎用歯科用照明器 販売名: LEDビューラス 認証番号: 13B1X10236550006 一般医療機器

製造販売元  
デンツプライシロナ株式会社  
www.dentsplysirona.com

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

- 各ショールーム
- 札幌 Tel: 011-709-5900
  - 盛岡 Tel: 019-604-2340
  - 仙台 Tel: 022-266-4020
  - 埼玉 Tel: 048-799-2931
  - 東京・銀座 Tel: 0120-461-868
  - 横浜 Tel: 045-440-1521
  - 静岡 岡 Tel: 054-653-2711
  - 名古屋 岡 Tel: 052-251-8467
  - 大阪 Tel: 06-6243-6636
  - 広島 島 Tel: 082-546-2301
  - 福岡 岡 Tel: 092-518-1800

100785\_202209\_BT\_3806PD

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY

Dentsply  
Sirona

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY

Dentsply  
Sirona

Dentsply Sirona

## Treatment Centers

歯科用ユニット総合カタログ

dentsplysirona.com



Treatment Center  
Website

# Dentsply Sirona Pro spec treatment

デンツプライシロナのトリートメントセンターは診療室そのもの。術者や医療チームにとって操作性がよく効率性に優れ、患者さんの快適性にも配慮され設計されています。シンプルな操作で効果をもたらすハイジーン性能や耐久性を実現したデンタルユニットです。

エルゴノミック  
デザイン



トリートメントセンターの美しいフォルムは術者にも患者さんにも優しく使いやすい、人間工学的に考えられた機能美です。

直感的な  
操作




液晶タッチパネルなどのユーザーインターフェースによりほぼすべてのユニットの操作を直感的に実行することができます。フットコントローラーやフットスイッチは足元でインストルメントやチェアの調整をハンズフリーで行うことができ、診療に集中することができます。

患者さんの  
快適性



独特なシート形状は患者さんの診療中の負担を和らげる、水に浮いたような心地よい姿勢を取ることができます。頸椎を支えるヘッドレストは首や頭部のストレスを軽減します。スムーズでゆっくりとした動作は、患者さんの不安を取り除きリラックスして治療を受けられるように配慮されています。患者さんの快適性はより良い治療結果をもたらすと私たちは考えています。

術者やチームの  
効率性

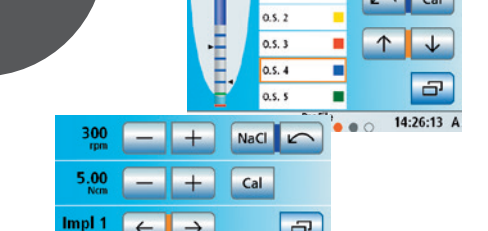

インプラント機能(生理食塩水供給装置付)、歯内療法機能(根管長測定機能付)、患者コミュニケーション機能をビルトインすることで、治療前後の準備や清掃作業が短縮され診療効率アップにつながります。

※機種によりオプション追加できる機能に違いがあります。



Innovation meets fascination.

# Axano

デンツプライシロナトリートメントセンターの  
フラッグシップモデルAxano。  
イノベーションが日々の診療に“ときめき”を生み出します。

## デジタルエクスペリエンス

Axanoは、ご利用中の診療プロセスにシームレスに統合可能であり、  
歯科医療従事者にも患者さんにも魅力的なデジタル体験を提供  
します。  
保存されている患者さんのデータやメディアにアクセスし、透明性の  
あるコンサルテーションを提供します。

## 優れたワークフロー

スマートフォンを触るように操作が可能なSmart Touchユーザー  
インターフェースをはじめ、高さ調節が可能な電動走行型ドクター  
ユニット、可視化された衛生管理フロー、操作性を向上させたフット  
コントローラー。これらがよりシンプルで洗練されたワークフローの  
構築を可能とします。

## スマートデザイン

Axanoは人間工学により術者・患者さん双方に高い快適性をもたらし  
ます。必要な機能はビルトインし、診療室内をすっきりと清潔に保つ  
ことが可能となります。診療室を彩るだけでなく衛生管理ステップの  
可視化を担うAmbient lightを搭載。各コンポーネントが一体化した  
治療台を発表した1980年代から変わらないコンセプトが時代と  
共に昇華し、Axanoのデザインを作り上げています。



Smart Touch  
ユーザーインターフェース



スマートコントロール

標準仕様リスト	
パシエントチェア	モータードライブヘッドレスト プレミアムシート スマートコントロール フットコントローラー 4wayフットスイッチ エルゴモーション 左アームレスト アンビエントライト 外部接続用バルブセット
ドクターユニット	スマートデリバリープロ スマートタッチ ユーザーインターフェース インスツルメントホルダー：6ハンガー シリンジ：スプレーピットM×1 吸引回路：バキューム×1、排唾管×1 切削回路：タービン×1、モーター×2 シビジョンレディ シリコンマット

ウォーターユニット	オートマッチングセパレーター コップ自動給水 モータードライブ回転式 ガラス製カスピッドボウル サクションホース自動洗浄機能 清浄水供給システム 洗浄剤添加機能 バージ/オートバージ/サニテーション機能
アシスタントユニット	インスツルメントホルダー：4ハンガー シリンジ：スプレーピットM×1 吸引回路：バキューム×1、排唾管×1 シリコンマット
オペレーティングライト	無影灯LEDビュープラス

More efficiency

# Sinius

効率性と快適性、そして美しさを備えた  
バランスに優れた自信のトリートメントセンター

## Efficiency Classの利点

- 直感的操作が可能で4.3インチ液晶タッチスクリーン「EasyTouchユーザーインターフェイス」
- 厳しいヨーロッパ基準のハイジーンコンセプトを実現。簡単な操作で衛生管理を実施可能です。
- ユニークな流線形のフォルムは患者さんにもデンタルチームにも好評です。
- 多様な機能・装備が直感的に使用可能で術者のストレスを低減します。

## 快適さと効率性の調和

患者さんの快適さは、先生のメリットです。長時間の診療でも患者さんの  
快適さを保つ多くの工夫がSiniusにはあります。患者さんが快適に  
診療を受けられることで、先生は治療に集中することができます。

- モータードライブヘッドレストは患者さんの頸椎を優しくホールドし、無理なく適切な診療ポジションに導きます。
- 独自の診療姿勢と体にフィットするバックレストにより長時間の診療でも患者さんは疲れにくく、快適に受診できます。
- プレミアムシートは全体でバランス良く患者さんの体重を受けることで、薄型ながら良好な座り心地を約束します。
- 将来に口腔内カメラやモニターなどを後付け可能です。



Sinius スライドトラックシステム



Sinius TS オーバーアーム



Sinius CS ホイップアーム

標準仕様リスト	
パシエントチェア	モーターヘッドレスト 無線フットコントローラー 4wayフットスイッチ エルゴモーション機能 左アームレスト 外部接続用バルブ ベースプレート
ドクターユニット	インスツルメントホルダー：5ハンガー 4.3インチEasyTouchユーザーインターフェイス 切削回路×2 (LEDライト付タービン×1、モーター×1) LEDライト付5ウェイシリンジ スプレーピットM シビジョンレディ

ウォーターユニット	コップ自動給水 ガラス製スピッドボウル サクションホース自動洗浄機能 清浄水供給システム 水回路洗浄システム 洗浄剤添加機能
アシスタントユニット	LEDライト付5ウェイシリンジ スプレーピットM サクションバキューム回路 各×1 シリコンマット
オペレーティングライト	LEDビュープラス

Performance you can rely on

# Intego pro

Intego proはIntegoの上位モデルとして、  
より高い機能と装備で診療ワークフローを効率化します。

## Integoの機能・装備をさらにパワーアップ

- 4.3インチ液晶タッチパネルを装備したEasyTouchユーザーインターフェイスは多様な機能を直感的に操作できます。  
※アドバンス/イノベーションパッケージのIntego proに装備
- 衛生管理機能を上位モデルと同等にアップグレード可能です。サクション・排唾管ホース内部を自動的に洗浄する「サクションオートクリーニングシステム」が標準装備されています。  
清潔な水で治療を行うことができる「清浄水供給システム」、水回路を強力に洗浄する「サニテーション」、サクションラインを洗浄剤で清掃できる「洗浄剤添加機能」をオプションで装備することができます。
- ガラス製スピッドと自動給水機能(オートコック)を標準装備。
- 効率的な診療ワークフローを実現するために、Intego proを必要な仕様にカスタマイズできます。WaveOneGoldを使用可能な歯内療法機能、口腔内カメラや22インチモニターを装備することができます。



Intego pro CS ホイップアーム



Intego pro TS オーバーアーム

標準仕様リスト	
パシエントチェア	有線C+フットコントローラー ダブルジョイントヘッドレスト 4wayフットスイッチ エルゴモーション機能 左アームレスト ベースプレート
ドクターユニット ハンギングホース仕様 または ホイップアーム仕様	インスツルメントホルダー：5ハンガー Easy Padユーザーインターフェイス 切削回路×2 (LEDライト付タービン×1、モーター×1) LEDライト付3ウェイシリンジ スプレーピットE

ウォーターユニット	オートマッチングセパレーター オートコック(自動給水機能) サクションホース自動洗浄システム マニュアル回転式カスピッドボウル(ガラス製) ウォーターヒーター
アシスタントユニット (コンパクトタイプ)	インスツルメントホルダー：4ハンガー サクションバキューム回路 各×1 LEDライト付3ウェイシリンジ スプレーピットE Touch Padユーザーインターフェイス
オペレーティングライト	LEDビュープラス

Performance you can rely on

# Intego

Integoは上位機種と基本コンセプトを共有したモデルです。  
人間工学に基づいた快適性と効率性、スタイリッシュで優美な  
デザインはそのままにシンプルな構成のパフォーマンスクラスの  
トリートメントセンターです。

## 3つのアドバンテージ

- エルゴノミックデザイン  
Integoは上位クラスで実証済みの美しいデザインを継承するとともに、人間工学的設計により、スムーズな診療ワークフローと快適な患者さんのコンフォートを両立しています。
- ドイツ製品質  
Integoは高品質な素材を使用し、高い品質保証基準によりドイツ・ペンツハイム工場で製造され、信頼性と耐久性に優れています。
- グレートバリュー  
普及クラスとして開発されたIntegoは同クラスの経済性を持ちながら高い機能と装備を実現しています。
- 豊富なオプション  
診療スタイルに合わせたカスタマイズが可能です。

★シリンジ、エアータービン、マイクロモーター、超音波スケーラー®は全てLEDライト付の温水供給です。

★ボルトタイプ清浄水供給システム、バージ&サニテーション機能、サクションホース自動洗浄システムをオプションで付けることにより高いハイジーン基準を達成可能です。

★EasyPadユーザーインターフェースにより多様なインスツルメントコントロールと各種のメモリーが可能です。

※オプション

標準仕様リスト	
パシエントチェア	プレミアムシート ダブルジョイントヘッドレスト 有線C+フットコントローラー 4wayフットスイッチ エルゴモーション機能 左アームレスト 外部機器用バルブセット
ドクターユニット	インスツルメントホルダー：5ハンガー Easy Padユーザーインターフェイス 切削回路×2 (LEDライト付タービン×1、モーター×1) LEDライト付3ウェイシリンジ スプレーピットE



Intego TS オーバーアーム



Intego CS ホイップアーム

ウォーターユニット	コンパクトタイプ オートマッチングセパレーター マニュアル回転式カスピッドボウル ウォーターヒーター
アシスタントユニット	コンパクトタイプ(2.4ハンド治療対応) インスツルメントホルダー：4ハンガー サクションバキューム回路 各×1 LEDライト付3ウェイシリンジ スプレーピットE Touch Padユーザーインターフェイス
オペレーティングライト	LEDビュープラス