

WE
KNOW
ENDO.



WaveOne® Gold

Navigati pe canal
cu incredere

 Dentsply
Sirona
Endodontics




Proiectat cu ultima tehnologie reciprocativa

Simplitatea sistemului WaveOne® cu un singur ac este acum imbunatatita in WaveOne® Gold. Realizat cu o metalurgie avansata, este urmatoarea generatie de performanta a Dentsply Sirona.



- Creste marja de siguranta*, in timp ce reduce timpul prepararii intr-o gama larga de cazuri**
- Optimizat cu un design avansat realizat de cei mai importanți endodonti
- Este parte dintr-o solutie completa care include produse de obturatie ce corespund formei canalului preparat cu WaveOne® Gold
- Familia WaveOne® Gold include acum si un ac unic pentru realizarea glide path-ului cu miscare reciproca pentru simplitate chiar de la inceput

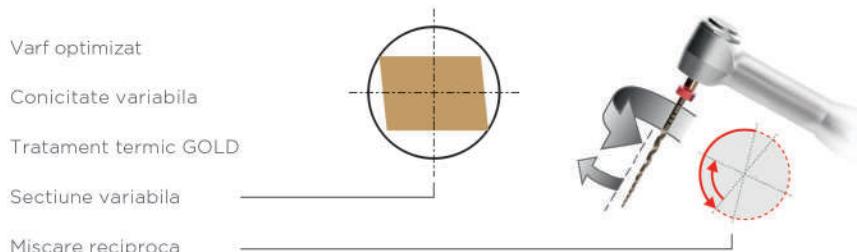

Colorat in cod ISO



Conicitate variabila

020 7% Marime Small



025 7% Marime Primary



035 6% Marime Medium



045 5% Marime Large

*comparabil cu WaveOne®

**rezultate din teste de laborator interne


WaveOne® Gold

Simplitate pentru tine, siguranta pentru pacienti

Creste siguranta pacientilor

- Acul WaveOne® Gold este cu 50% mai rezistent la oboseala ciclica decat acul WaveOne® Primary
- Efect de insurubare redus** comparativ cu sistemele standard rotative


Rezistenta la oboseala ciclica**

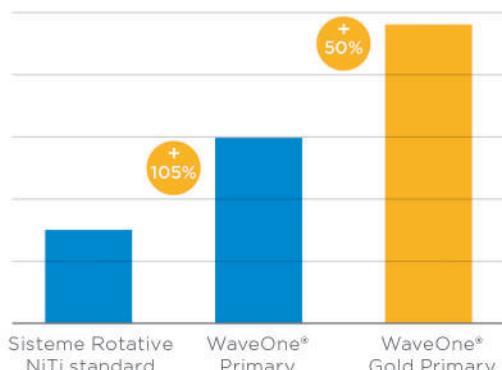

Acopera o gama mai largă* de morfologii de canal

- Flexibilitate marita a acului multumita tehnologiei Gold
- Gama de marimi extinsa (Small, Primary, Medium, Large)


Flexibilitate**

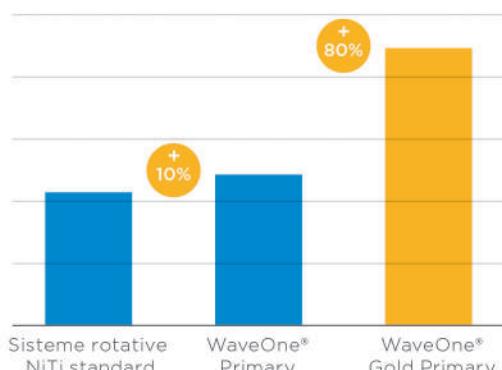

Scurteaza timpul de preparare

- Creste eficienta de taiere
- Un singur ac pe tratament se traduce si prin scaderea timpului de preparare si irigare

Timpul de preparare a canalului**

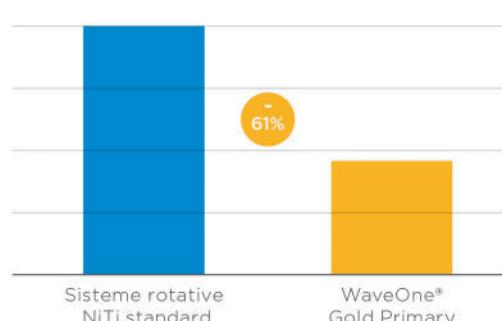


*comparabil cu WaveOne®

**rezultate din teste de laborator interne



Urmatoarea generatie de performanta

Dentsply Sirona a facut echipa cu cei mai buni medici endodonti pentru a dezvolta WaveOne® Gold.

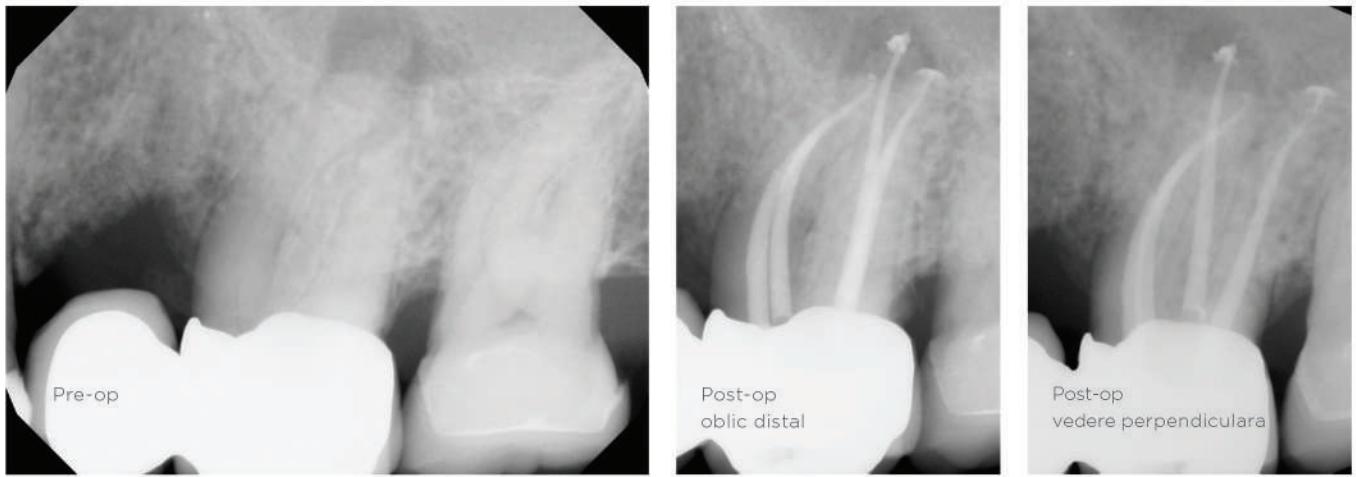

Cu amabilitatea D-lui Dr. J. Webber

Echipa de proiectare - Dr. C. Ruddle, Dr. J. Webber, Dr. W. Pertot, Dr. S. Kuttler

Prepararea canalului nu a fost mai usoara ca acum

De la lansarea din 2011, sistemul Dentsply Sirona WaveOne® a determinat un nou standard in tehnica prepararii de canal.

In intreaga lume, medici dentisti si endodonti si-au exprimat aprecierea pentru simplitatea pe care o aduce WaveOne® efortului de a oferi tratamente de calitate pacientilor.

WaveOne® Gold aduce procedurilor endodontice un sistem cu un singur ac si cu o metalurgie avansata pentru prepararea canalului. Mai mult, am optimizat diametrul varfurilor, conicitatea si sectiunea transversala pentru a produce un ac care imbunatateste cu adevarat siguranta, eficienta si flexibilitatea in timpul prepararii canalului. WaveOne® Gold duce simplitatea si succesul tratamentului la un alt nivel.

O solutie completa

Familia WaveOne® Gold asigura o solutie completa de tratament care asigura incredere si preparatii predictibile.

Motor

X-Smart® Plus si X-Smart IQ™ pentru simplitate sunt pre-programate pentru a fi utilizate cu WaveOne® Gold

Glide Path

WaveOne® Gold Glider optimizeaza calea de alunecare inainte de prepararea cu WaveOne® Gold Primary**

Prepararea

Acele WaveOne® Gold sunt disponibile in 4 dimensiuni cu 3 lungimi de lucru (21, 25, 31 mm) pentru o gama larga de cazuri

Obturatia

Produse dedicate de obturatie WaveOne® Gold: conuri de hartie, conuri de gutaperca cu conicitate variabila Conform Fit™ si GuttaCore® obturatoare cu miez din gutaperca crosslink

Solutii restaurative Dentsply Sirona

Va rugam sa consultati website-ul nostru www.dentsplysirona.com pentru solutii restaurative.

WaveOne® Gold Glider

Creaza calea cu incredere



Noul ac pentru glide path a fost realizat in colaborare cu o echipa de experti endodonti: Dr. E. Berrutti, Dr. G. Cantatore, Dr. A. Castellucci, Dr. S. Kuttler, Dr. W. Pertot, Dr. C. Ruddle, Dr. J. Webber, Dr. J. West.

Optimizati forma preparatiei cu un singur ac cu miscare reciproca pentru glide path, parte din sistemul WaveOne® Gold.

- Respecta forma naturala a canalului
- Creste siguranta tratamentului datorita cresterii flexibilitatii si rezistentei marite la oboseala ciclica
- Steril si gata pentru utilizare unica, lucru care pastreaza eficienta de taiere, reduce posibilitatea fracturarii si previne contaminarea intre pacienti

WaveOne® Gold Glider se foloseste exclusiv cu miscare reciproca cu motoarele compatibile Dentsply Sirona. Setarile sunt pre-programate.

O secenta pentru cele mai multe cazuri

Scouting

ReadySteel®



010 02 - 25mm

Glide Path

WaveOne® Gold Glider



015 02 - 25mm
Variable Taper


Shaping

WaveOne® Gold




Size Primary,
025 07 - 25mm
Variable Taper


O rezistenta mai scazuta la indoire decat PathFile, pentru o mai mare flexibilitate multumita tratamentului **gold

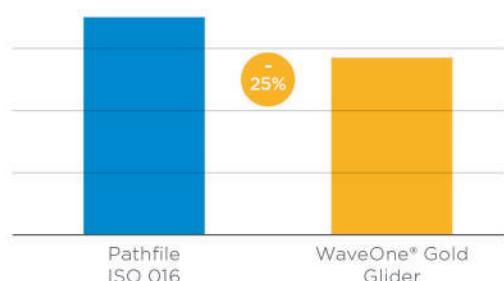

O rezistenta mai buna la oboseala ciclica**

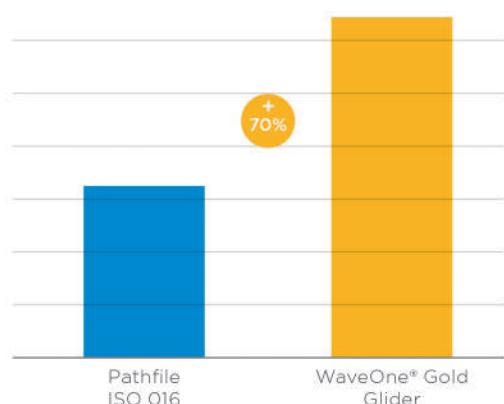

Aceeași secțiune transversală ca acul WaveOne® Gold

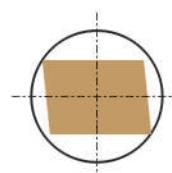

O selectie extinsa de produse

Cu adaugarea acului pentru glide path, sistemul WaveOne® Gold iti ofera usurinta unei intregi clase de produse care de la inceput lucreaza impreuna.

Familia initiala de produse WaveOne® Gold



Familia extinsa de produse WaveOne® Gold sub noua sigla Dentsply Sirona




Gutaperca pentru WaveOne® Gold noul standard de aur

Conform Fit™

Conurile master din gutaperca pentru WaveOne® Gold sunt fara latex si reformulate pentru a se adapta precis in preparatiile realizate cu instrumentele WaveOne® Gold

- Transfer al caldurii imbunatatit pana la 4 mm
- Adaptare precisa si tug back exact
- Fara latex pentru siguranta pacientului
- Parte dintr-o solutie bazata pe un sistem

Con de gutaperca ce ofera un volum superior de umplere apicala**

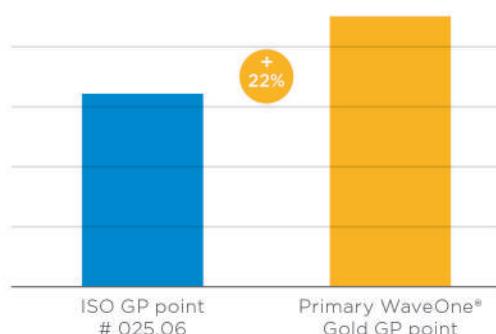

Usor de identificat: un cod de culori identic acelor



Conuri de hartie si GuttaCore® pentru WaveOne® Gold



Conuri de hartie


- Conurile de hartie sunt impachetate in pachete sterile de cate 5 bucati
- Gata de utilizare, parte dintr-un sistem complet si usor de identificat

GuttaCore® pentru WaveOne® Gold

Obturatoarele GuttaCore® au un miez din gutaperca crosslink care impinge gutaperca incalzita de jur imprejur in 3 dimensiuni in intreaga anatomie a canalului.

- O tehnica eficienta care ofera usurinta unei singure insertii, astfel ca pacientii petrec mai putin timp pe scaun.
- Curgerea gutapercii incalzite umple complet intregul sistem canalicular.
- GuttaCore® ajunge acolo unde gutaperca traditionala nu poate ajunge.

Usor identificabile: 4 dimensiuni (small, primary, medium, large) si stabilitate dimensionala imbunatatita cu pana la 40% comparativ cu acele WaveOne® Gold

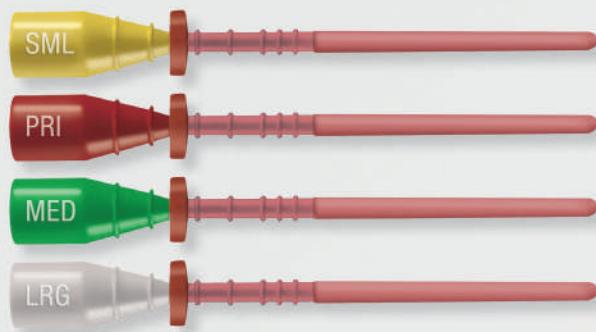



Lista de produse

Ace pentru glide path cu miscare reciproca

Glider - 015, 02 cu conicitate variabila

3x	21mm	B ST WIGG 321 015
3x	25mm	B ST WIGG 325 015
3x	31mm	B ST WIGG 331 015
6x	21mm	B ST WIGG 621 015
6x	25mm	B ST WIGG 625 015
6x	31mm	B ST WIGG 631 015

Ace de preparare cu miscare reciproca

Small - 020, 07 cu conicitate variabila

3x	21mm	A 0753 221 GOS 03
3x	25mm	A 0753 225 GOS 03
3x	31mm	A 0753 231 GOS 03
6x	21mm	A 0756 221 GOS 03
6x	25mm	A 0756 225 GOS 03
6x	31mm	A 0756 231 GOS 03

Primary - 025, 07 cu conicitate variabila

3x	21mm	A 0753 221 GOP 03
3x	25mm	A 0753 225 GOP 03
3x	31mm	A 0753 231 GOP 03
6x	21mm	A 0756 221 GOP 03
6x	25mm	A 0756 225 GOP 03
6x	31mm	A 0756 231 GOP 03

Medium - 035, 06 cu conicitate variabila

3x	21mm	A 0753 221 GOM 03
3x	25mm	A 0753 225 GOM 03
3x	31mm	A 0753 231 GOM 03
6x	21mm	A 0756 221 GOM 03
6x	25mm	A 0756 225 GOM 03
6x	31mm	A 0756 231 GOM 03

Large - 045, 05 cu conicitate variabila

3x	21mm	A 0753 221 GOL 03
3x	25mm	A 0753 225 GOL 03
3x	31mm	A 0753 231 GOL 03
6x	21mm	A 0756 221 GOL 03
6x	25mm	A 0756 225 GOL 03
6x	31mm	A 0756 231 GOL 03

Ace assortite cu miscare reciproca

1x Small/Primary/Medium/Large	
21mm	A 0754 221 G9A 03
25mm	A 0754 225 G9A 03
31mm	A 0754 231 G9A 03

Blister cu secentva WaveOne® Gold

25mm B ST WIGS 325 AST



Conuri de hartie absorbante WaveOne® Gold

Cutie de 180x conuri de hartie sterile


Small	A 175W 000 005 03
Primary	A 175W 000 009 03
Medium	A 175W 000 009 03
Large	A 175W 000 009 03



Conform Fit™ conuri de gutaperca pentru WaveOne® Gold

Cutie cu 60x de conuri de gutaperca cu conicitate variabila

Small	A 175X 000 005 00
Primary	A 175X 000 009 00
Medium	A 175X 000 009 00
Large	A 175X 000 009 00

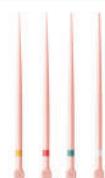

GuttaCore® pentru WaveOne® Gold

Blister cu 6x obturatoare

Small	B NS GCWG 500 SML
Primary	B NS GCWG 500 PRI
Medium	B NS GCWG 500 MED
Large	B NS GCWG 500 LRG



Cutie cu 30x obturatoare (5 blistere)

Small	B NS GCWG C00 SML
Primary	B NS GCWG C00 PRI
Medium	B NS GCWG C00 MED
Large	B NS GCWG C00 LRG

Thermafil pentru WaveOne Gold



Large	6 buc.	A175B0000L00
Medium	6 buc.	A175B0000M00
Primary	6 buc.	A175B0000P00
Small	6 buc.	A175B0000S00
Large	30 buc.	A175OP0000L00
Medium	30 buc.	A175OP0000M00
Primary	30 buc.	A175OP0000P00
Small	30 buc.	A175OP0000S00



Motoare X-SMART® Plus
Motoare X-SMART IQ™

A1032
A1054

Cuptor ThermaPrep® 2



230V (EU)	A 0176 230 002 00
230V (UK)	A 0176 230 002 33
115V	A 0176 115 002 00



Maillefer Instruments Holding Sàrl
Chemin du Verger 3
CH-1338 Ballaigues
Switzerland
0086
dentsplymaillefer.com

Dentsply
Sirona
Endodontics