

Astra Tech Implant EV

Описание

Astra Tech Implant EV — это винтообразный дентальный имплантат, выраженная шероховатая поверхность которого достигается благодаря применению запатентованной технологии пескоструйной обработки и последующей обработке в растворе фтористоводородной кислоты. Внешняя коронарная часть имплантата покрыта микрорезьбой — MicroThread.

Имплантаты соединяются с абатментами посредством конического типа соединения Conical Seal Design, благодаря чему достигается прочное и надежное крепление.

Имплантат Astra Tech Implant EV обладает уникальной индексацией зоны соединения с возможностью фиксации компонентов в одном положении, в шести стандартных положениях или использования компонентов без индексации.

Материал изготовления

«Коммерчески чистый» титан 4 класса, согласно стандарту ASTM F67.

Упаковка и хранение

Упаковка состоит из картонной внешней коробки, содержащей пластиковый блистер, запечатанный крышкой. Внутри блистера находится внутренняя упаковка с имплантатом. Крышка блистера служит стерильным барьером, и содержимое блистера стерильно. Изделие стерилизовано излучением. Запрещается использовать компоненты после истечения срока годности. Компоненты должны храниться в запечатанных оригинальных упаковках в сухом месте при комнатной температуре, то есть 18–25 °С.

Применение


Более подробная информация приведена в последней версии соответствующего методического руководства..



>>


Дизайн имплантатов

REF	Имплантат	A	B	C	D	E	F	L	M
3.0	26301 Astra Tech Implant EV 3.0 S - 8 mm	3.05	3.0	2.5	2.1	3.5	2.0	8.0	M1.4
	26302 Astra Tech Implant EV 3.0 S - 9 mm	3.05	3.0	2.5	1.8	3.5	2.5	9.0	M1.4
	26303 Astra Tech Implant EV 3.0 S - 11 mm	3.05	3.0	2.5	1.8	4.0	2.5	11.0	M1.4
	26304 Astra Tech Implant EV 3.0 S - 13 mm	3.05	3.0	2.5	1.8	4.0	2.5	13.0	M1.4
	26305 Astra Tech Implant EV 3.0 S - 15 mm	3.05	3.0	2.5	1.8	4.0	2.5	15.0	M1.4
3.6	26310 Astra Tech Implant EV 3.6 S - 6 mm	3.65	3.6	3.0	2.7	2.6	2.0	6.3	M1.6
	26311 Astra Tech Implant EV 3.6 S - 8 mm	3.65	3.6	3.0	2.7	3.5	2.0	8.0	M1.6
	26312 Astra Tech Implant EV 3.6 S - 9 mm	3.65	3.6	3.0	2.5	3.5	2.5	9.0	M1.6
	26313 Astra Tech Implant EV 3.6 S - 11 mm	3.65	3.6	3.0	2.5	3.5	2.5	11.0	M1.6
	26314 Astra Tech Implant EV 3.6 S - 13 mm	3.65	3.6	3.0	2.5	3.5	2.5	13.0	M1.6
	26315 Astra Tech Implant EV 3.6 S - 15 mm	3.65	3.6	3.0	2.5	3.5	2.5	15.0	M1.6
	26316 Astra Tech Implant EV 3.6 S - 17 mm	3.65	3.6	3.0	2.5	3.5	2.5	17.0	M1.6
4.2	26320 Astra Tech Implant EV 4.2 S - 6 mm	4.25	4.2	3.6	3.3	2.6	2.0	6.3	M1.8
	26321 Astra Tech Implant EV 4.2 S - 8 mm	4.25	4.2	3.6	3.3	3.5	2.0	8.0	M1.8
	26322 Astra Tech Implant EV 4.2 S - 9 mm	4.25	4.2	3.6	3.1	3.5	2.5	9.0	M1.8
	26323 Astra Tech Implant EV 4.2 S - 11 mm	4.25	4.2	3.6	3.1	3.5	2.5	11.0	M1.8
	26324 Astra Tech Implant EV 4.2 S - 13 mm	4.25	4.2	3.6	3.1	3.5	2.5	13.0	M1.8
	26325 Astra Tech Implant EV 4.2 S - 15 mm	4.25	4.2	3.6	3.1	3.5	2.5	15.0	M1.8
	26326 Astra Tech Implant EV 4.2 S - 17 mm	4.25	4.2	3.6	3.1	3.5	2.5	17.0	M1.8
	26331 Astra Tech Implant EV 4.2 C - 8 mm	4.24	3.6	3.0	2.7	4.0	2.0	8.0	M1.8
	26332 Astra Tech Implant EV 4.2 C - 9 mm	4.24	3.6	3.0	2.5	4.0	2.5	9.0	M1.8
	26333 Astra Tech Implant EV 4.2 C - 11 mm	4.24	3.6	3.0	2.5	4.0	2.5	11.0	M1.8
4.8	26340 Astra Tech Implant EV 4.8 S - 6 mm	4.85	4.8	4.2	3.9	2.6	2.0	6.3	M2
	26341 Astra Tech Implant EV 4.8 S - 8 mm	4.85	4.8	4.2	3.9	3.5	2.0	8.0	M2
	26342 Astra Tech Implant EV 4.8 S - 9 mm	4.85	4.8	4.2	3.7	3.5	2.5	9.0	M2
	26343 Astra Tech Implant EV 4.8 S - 11 mm	4.85	4.8	4.2	3.7	3.5	2.5	11.0	M2
	26344 Astra Tech Implant EV 4.8 S - 13 mm	4.85	4.8	4.2	3.7	3.5	2.5	13.0	M2
	26345 Astra Tech Implant EV 4.8 S - 15 mm	4.85	4.8	4.2	3.7	3.5	2.5	15.0	M2
	26346 Astra Tech Implant EV 4.8 S - 17 mm	4.85	4.8	4.2	3.7	3.5	2.5	17.0	M2
	26351 Astra Tech Implant EV 4.8 C - 8 mm	4.84	4.2	3.6	3.3	4.0	2.0	8.0	M2
	26352 Astra Tech Implant EV 4.8 C - 9 mm	4.84	4.2	3.6	3.1	4.0	2.5	9.0	M2
	26353 Astra Tech Implant EV 4.8 C - 11 mm	4.84	4.2	3.6	3.1	4.0	2.5	11.0	M2
5.4	26360 Astra Tech Implant EV 5.4 S - 6 mm	5.45	5.4	4.8	4.5	2.6	2.0	6.3	M2
	26361 Astra Tech Implant EV 5.4 S - 8 mm	5.45	5.4	4.8	4.5	3.5	2.0	8.0	M2
	26362 Astra Tech Implant EV 5.4 S - 9 mm	5.45	5.4	4.8	4.3	3.5	2.5	9.0	M2
	26363 Astra Tech Implant EV 5.4 S - 11 mm	5.45	5.4	4.8	4.3	3.5	2.5	11.0	M2
	26364 Astra Tech Implant EV 5.4 S - 13 mm	5.45	5.4	4.8	4.3	3.5	2.5	13.0	M2
	26365 Astra Tech Implant EV 5.4 S - 15 mm	5.45	5.4	4.8	4.3	3.5	2.5	15.0	M2

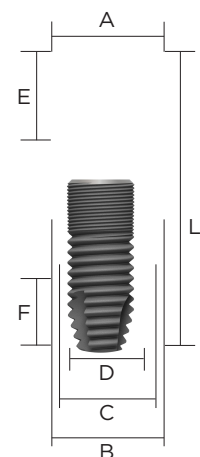

- A Диаметр шейки
- B Диаметр апекса 1
- C Диаметр тела
- D Диаметр апекса 2
- E Микрорезьба
- F Сужающаяся часть
- L Длина
- M Внутренняя резьба

Все измерения в мм

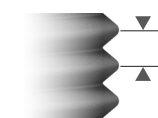

Микрорезьба шаг = 0.22 мм
Резьба тела имплантата шаг = 0.66 мм