



Neo Spectra™ ST Effects


Простое решение для реставраций фронтальной группы зубов



Neo Spectra™ ST

Подходит для большинства клинических случаев в вашей практике

Простота в эстетике с композитными материалами Neo Spectra™ ST



Neo Spectra™ ST flow

Универсальный текучий композит для любых реставраций, в том числе эстетических

Десятилетия инноваций в разработке композитных материалов позволили нам понять, что важно для стоматологов



Манипуляционные характеристики



Эстетичность



Долговечность


Технология наполнителя SphereTEC®

Увеличенная частица наполнителя SphereTEC® диаметром 15 мкм

Благодаря технологии наполнителя SphereTEC® композитные материалы Neo Spectra™ ST обладают рядом существенных преимуществ

Ключевые преимущества композитных материалов Neo Spectra™ ST стали возможными благодаря технологии наполнителя SphereTEC®. Морфология, распределение размера частиц и микроструктура поверхности наполнителя SphereTEC® обеспечивают именно те преимущества, которые имеют для стоматологов наибольшее значение.


СФЕРИЧЕСКИЕ

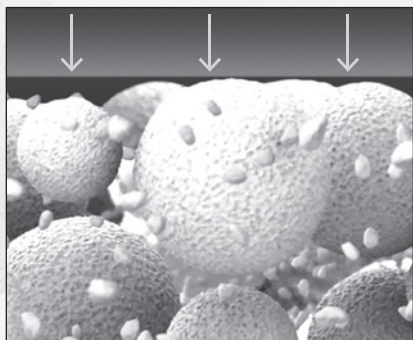

Улучшенные манипуляционные характеристики

Простота работы с материалом очень важна при выполнении реставрации. Сферическая форма и размер частиц наполнителя SphereTEC®, а также их распределение в матрице композита создают эффект «шарикоподшипника», который обеспечивает отличную адаптацию и моделируемость. Частицы SphereTEC® могут связывать большее количество полимера по сравнению с частицами обычного наполнителя – это устраняет липкость материала к инструменту.


МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ

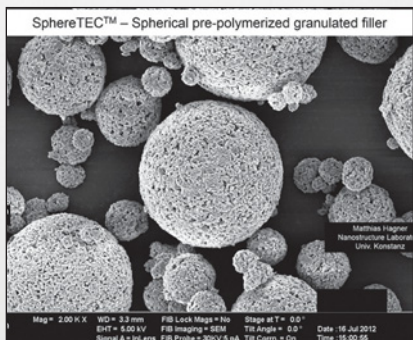

Легко достижимая эстетичность

Натуральная красота должна быть проста в воссоздании. Уникальный наполнитель SphereTEC® гарантирует превосходный эффект хамелеона благодаря балансу прозрачности, поглощения света и его рассеивания. Микроструктура наполнителя обеспечивает быструю полировку композита до выраженного блеска.

ЧАСТИЦЫ

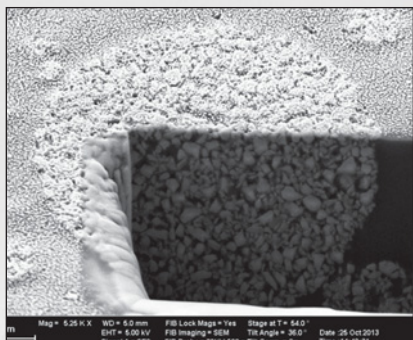

Надежная долговечность

Надежные результаты – это гарантия успеха и репутации. Высокая наполненность и микромеханическая связка полимера и наполнителей обеспечивают прочность и долговечность композитного материала. Пропитанные смолой, предварительно полимеризованные частицы наполнителя гарантируют значительную стойкость к окрашиванию.

С композитами Neo Spectra™ ST с технологией

Подходит для любых самых распространенных случаев



Neo Spectra™ ST

Универсальный реставрационный композитный материал

Предлагает вам выбор оптимальной для вас вязкости, 5 универсальных оттенков CLOUD shade, которые перекрывают весь диапазон оттенков шкалы VITA®¹.



Простое решение фронтальной



Neo Spectra™ ST

Универсальный реставрационный композитный материал

Два дополнительных варианта 5 универсальных оттенков CLOUD shade. Neo Spectra™ ST в технике упрощенной реставрации.



¹ VITA не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona.

SphereTEC® любая реставрация станет проще

для реставраций
группы зубов



Effects
реставрационный

та прозрачности дополняют
LOUD shade композита Neo
нного послойного нанесения.



Универсальный и эстетичный
композит с адаптивной текучестью



Neo Spectra™ ST flow
Текущий реставрационный
композитный материал

Отличается адаптивным свойством текучести «по запросу»,
а его оттенки идеально соответствуют портфолио универ-
сальных композитных материалов Neo Spectra™ ST и Neo
Spectra™ ST Effects.



Вязкость на выбор

Два варианта вязкости универсального композитного материала Neo Spectra™ ST

Благодаря технологии наполнителя SphereTEC® композитный материал Neo Spectra™ ST обладает улучшенными манипуляционными свойствами и предлагает 2 варианта вязкости: низкую вязкость (LV – low viscosity), которая делает его более мягким, пластичным и позволяет легче распределяться, и высокую вязкость (HV – high viscosity), характеризующуюся большей плотностью, что делает материал более плотным, пакуемым.

Возможность выбора оптимальной вязкости позволяет композиту соответствовать вашим предпочтениям и технике нанесения для эффективного и простого использования.

- Не прилипает к инструменту.
- Легко адаптируется к поверхностям полости при реставрации.
- Легко моделируется и принимает нужную форму.
- Устойчив к стеканию.



74%

стоматологов предъявляют жалобы на манипуляционные характеристики композитных материалов – адаптируемость и липкость²



Универсальность текучего композитного материала Neo Spectra™ ST flow

Используя композит Neo Spectra™ ST flow для тех же показаний при реставрации в зоне улыбки, как и обычные текучие композиты, он способен обеспечить такую же эстетичность и надежность реставрации, которые вы можете ожидать от универсального композита, созданного на основе технологии SphereTEC®.

- Манипуляционная универсальность благодаря текучести «по запросу».
- Остается на месте, пока воздействие инструмента не инициирует текучесть.
- Отличная адаптация к полости.



66%

стоматологов используют традиционные текучие композитные материалы для реставраций V класса. В среднем 1/4 реставраций V класса приходится на фронтальную группу зубов³

² Опрос пользователей композитных материалов в Европе (n=297). Dentsply Sirona Restorative, 2015 г.

³ Исследование среди пользователей текучих композитных материалов. Dentsply Sirona, август 2018 г.

Простота в эстетике


Универсальные оттенки CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST подходят для большинства клинических случаев

Отличный эффект хамелеона для упрощенного подбора оттенка композита Neo Spectra™ ST обеспечивается благодаря сочетанию первичных частиц наполнителя SphereTEC® и полимера. В большинстве случаев будет достаточно всего одного универсального оттенка CLOUD shade для выполнения реставрации.

- Всего 5 универсальных оттенков CLOUD shade перекрывают весь диапазон оттенков шкалы VITA®⁴.
- Надежное и точное соответствие оттенка окружающим тканям зуба.
- Меньше запасов композита – меньше затрат.
- Для реставраций отбеленных зубов доступен оттенок BW.

88%

стоматологов хранят композиты более чем 5 оттенков VITA®

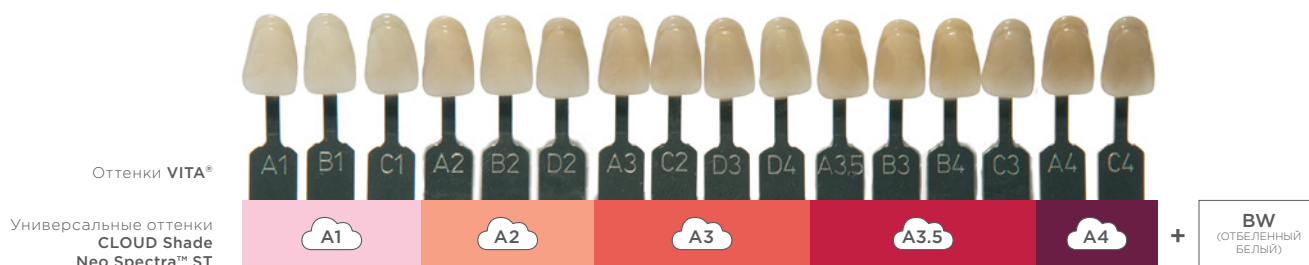


Для сложных случаев во фронтальной группе зубов дополнительно используются оттенки дентина и эмали композита Neo Spectra™ ST Effects

Для эстетических реставраций фронтальной группы зубов композитный материал Neo Spectra™ ST Effects комбинируется с универсальными оттенками CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST в технике упрощенного послойного нанесения.

- Используйте один из двух дентинных оттенков композита Neo Spectra™ ST Effects для получения дополнительной опакowości.
- Для достижения эффекта прозрачности режущего края используйте один эмалевый оттенок материала Neo Spectra™ ST Effects.
- Простая комбинация и техника упрощенного послойного нанесения обеспечивают лучшие эстетические результаты.

Более 1/3

врачей считает, что при выполнении реставраций по IV классу наиболее сложным этапом является цветовая интеграция⁵

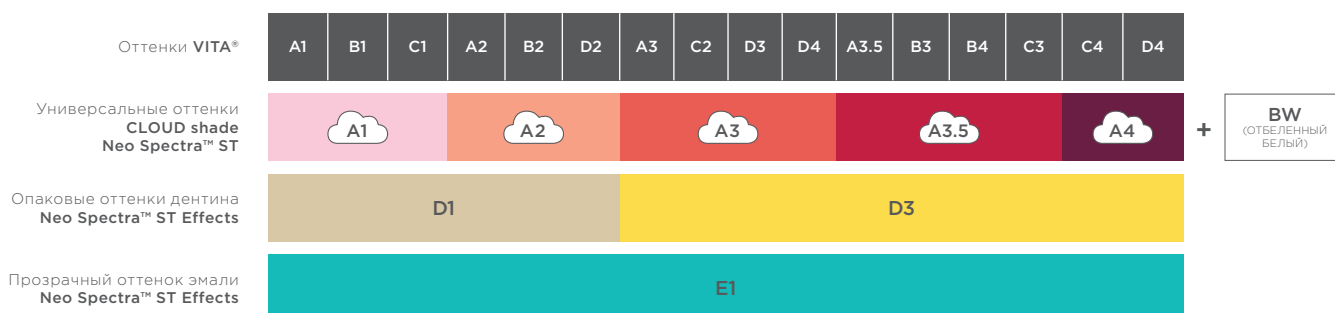

⁴ Опрос по прямой реставрации (n=107). Aegis communications, 2016 г.

⁵ The Key Group, Inc., 2018 г.

Информация для заказа

Neo Spectra™ ST

Универсальный композитный реставрационный материал

ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ (HV – high viscosity)

Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Intro Kit (HV) 60701970
24 компюлы HV (серого цвета) по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), пистолет для компюл, наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Intro Kit (HV) 60701980
5 шприцев HV (серый поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3, A4), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Эконабор шприцев Neo Spectra™ ST Eco Kit (HV) 60701990
6 шприцев HV (серый поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Рефиллы

Neo Spectra™ ST (HV)

Компюлы
(16×0,25 г)

Шприцы
(1×3 г)



A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)

60701971

60701981

A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)

60701972

60701982

A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)

60701973

60701983

A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)

60701975

60701985

A4 (оттенки VITA® A4, C4)

60701974

60701984

BW (отбеленный белый)

60701976

НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ (LV – low viscosity)

Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Intro Kit (LV) 60701870
24 компюлы LV (синего цвета) по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), пистолет для компюл, наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Intro Kit (LV) 60701880
5 шприцев LV (синий поршень) по 3 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Эко-набор шприцев Neo Spectra™ ST Eco Kit (LV) 60701890
6 шприцев LV (синий поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности



Рефиллы

Neo Spectra™ ST (LV)

Компюлы
(16×0,25 г)

Шприцы
(1×3 г)



A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)

60701871

60701881

A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)

60701872

60701882

A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)

60701873

60701883

A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)

60701875

60701885

A4 (оттенки VITA® A4, C4)

60701874

60701884

BW (отбеленный белый)

60701876

ООО «Дентсплай Сирона»

115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности и торговли», офис 9-01

Телефон +7 (495) 725-10-87

Факс +7 (495) 725-10-86

www.dentsplysirona.com

Neo Spectra™ ST Effects*

Универсальный композитный реставрационный материал

Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Effects

24 компюлы HV (серого цвета) по 0,25 г (12×D1, 8×D3, 4×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков

60701940



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Effects

3 шприца HV (серый поршень) по 3 г (1×D1, 1×D3, 1×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков

60701950



Рефиллы

Neo Spectra™ ST Effects (HV)

Компюлы
(16×0,25 г)

Шприцы
(1×3 г)



D1 (используется с A1, A2)

60701942

60701952

D3 (используется с A3, A3.5, A4)

60701943

60701953

E1 (используется с A1, A2, A3, A3.5, A4)

60701941

60701951

* Только высокая вязкость (HV – high viscosity).

Neo Spectra™ ST flow

Текучий композитный реставрационный материал

Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST flow

24 компюлы по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), пистолет для компюл, принадлежности, наклейка для шкалы оттенков

60701910



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST flow

5 шприцев по 1,8 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), наклейка для шкалы оттенков, 50 канюлей для шприцев, принадлежности

60701920



Рефиллы

Neo Spectra™ ST flow

Компюлы
(16×0,25 г)

Шприцы
(2×1,8 г
+25 канюлей)



A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)

60701911

60701921

A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)

60701912

60701922

A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)

60701913

60701923

A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)

60701915

60701925

A4 (оттенки VITA® A4, C4)

60701914

60701924

BW (отбеленный белый)

60701916

60701926

D1 (непрозрачный дентиновый)

60701918

60701928

D3 (непрозрачный дентиновый)

60701919

60701929

E1 (прозрачный эмалевый)

60701917

60701927

Принадлежности

Дополнительный набор канюлей для шприцев



60701932

Пистолет для компюл



60665900