

## La famille Dentsply Sirona IQ®


X-Smart IQ®  
Pièce à main

Endo IQ®  
Application

Propex IQ®  
Localisateur d'apex



  
WE  
KNOW  
ENDO.

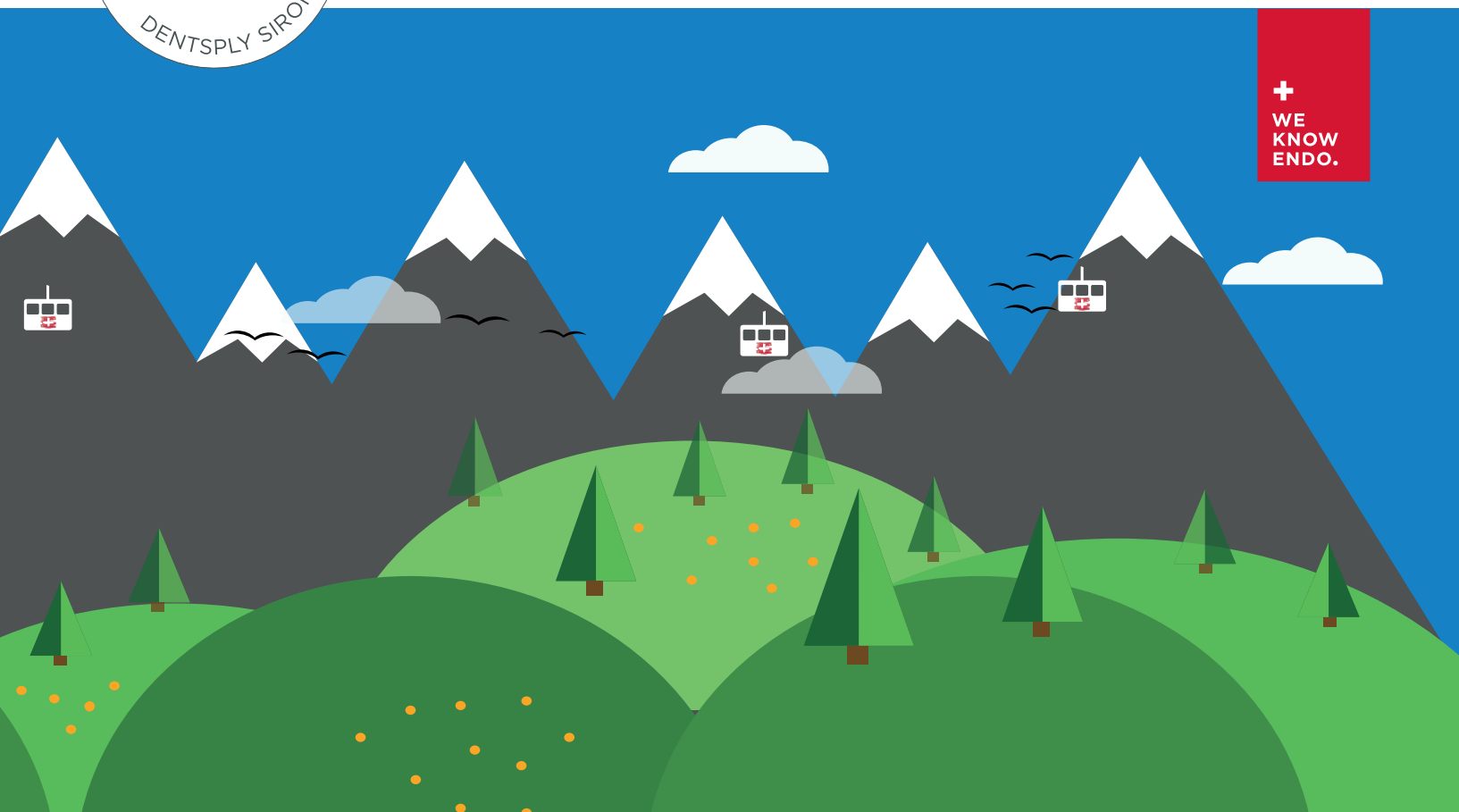

# Localisateur d'apex Propex IQ®

Le complément parfait pour votre cabinet

## Pérenne

- Pleinement intégré à l'application Endo IQ®
- Actualisable à tout moment par une mise à jour de l'application

## Fiable et facile à manier

- Suivi fiable de la progression de la lime en mode combiné et autonome
- Fonctionne avec différentes solutions de rinçage<sup>1</sup>
- Ne nécessite aucun calibrage ni ajustement du réglage

## Connexion sans fil à l'application Endo IQ®

- Surveillez la progression de la lime et préparez en même temps le canal en étant connecté sans fil à l'application Endo IQ® tout en visualisant la progression de la lime
- Branchez votre pièce à main X-Smart IQ® sur le localisateur d'apex Propex IQ®

## Batterie longue durée

- Jusqu'à 5 heures et demi d'exploitation non stop sans recharger la batterie (combiné à la pièce à main X-Smart IQ® et connecté à l'application Endo IQ®)

## Poids plume

- Poids très léger de 80 grammes seulement
- Facile à transporter

<sup>1</sup> Testé avec les solutions suivantes : NaOCl, EDTA, Qmix.

## Spécifications techniques

- Quatre modes d'exploitation : mode combiné ou non combiné au moteur d'endodontie pour pièce à main X-Smart IQ®, connecté ou non connecté à l'application Endo IQ®
- Dimensions : longueur : 74,6 mm ; largeur : 45,4 mm ; hauteur : 19,5 mm
- Poids : 80 g
- Alimentation électrique : 2 batteries Ni-MH rechargeables, capacité minimum : 780 mAh 2,4 V DC nominal
- Chargeur : 100-240 V ; 50-60 Hz
- Bluetooth® 4.0 basse consommation

## Références produit

Produit	Numéro d'article
Localisateur d'apex Propex IQ® Localisateur d'apex avec accessoires	B00PPIQ000000
Propex IQ® Basic Starter Kit Localisateur d'apex avec accessoires et support Endo IQ®	B00PPIQXIQKIT



Petit par la taille.  
Grand par la performance.





Dentsply  
Sirona

Go

Dentsply  
Sirona

WaveOne  
Reciprocating

# X-Smart IQ®

Un nouveau critère de référence pour l'ergonomie et la facilité d'utilisation

## Pièce à main sans fil, fine et bien équilibrée

- Autonomie suffisante pour réaliser 16 traitements<sup>2</sup>
- Batterie rechargeable en cours d'utilisation

## Accès facile et excellente visibilité

- Tête particulièrement petite
- Tête du contre-angle orientable sur 360°

## Passage rapide de la réciprocité à la rotation continue

- **WaveOne® Gold & WaveOne® Gold Glider – système de limes à mouvement réciproque**  
La plus moderne des technologies de réciprocité pour une réalisation du glide path et une mise en forme du canal en toute sécurité
- **ProTaper Next® & ProGlider® – système de limes à rotation continue**  
La nouvelle génération du système de limes à rotation continue pour de meilleures performances et plus de polyvalence, de la réalisation du glide path à la mise en forme du canal

<sup>2</sup> Calcul réalisé en considérant 30 s d'utilisation par instrument, à raison de 4 limes par canal dans une dent à 2 canaux.

## Spécifications techniques

- Fonction auto-reverse avec valeur limite de couple préprogrammée (en rotation continue et réciprocité)
- Fonction calibration (CAL) pour un paramétrage plus précis du couple
- Fonction autonome : l'application permet de paramétrer le moteur pour qu'il fonctionne uniquement en réciprocité ou en rotation continue<sup>3</sup>, sans être commandé par l'iPad®
- Fonction de mémorisation Bluetooth® : en cas de perte de la connexion Bluetooth®, la pièce à main X-Smart IQ® peut continuer à fonctionner avec les derniers paramètres utilisés
- Batterie lithium-ion : autonomie de 16 traitements<sup>4</sup>, recharge complète en 6 heures, mise en veille et arrêt automatiques. moteur rechargeable en cours d'utilisation
- Plage de couple : 0,5 à 5 Ncm (selon la vitesse maximale)
- Plage de vitesse : 250 à 850 tr/min
- Contre-angle autoclavable à 134 °C
- Chargeur universel : 100 à 240 V ; 50/60 Hz

<sup>3</sup> Vitesse = 300 tr/min ; couple = 2 Ncm

<sup>4</sup> Calcul réalisé en considérant 30 s d'utilisation par instrument, à raison de 4 limes par canal dans une dent à 2 canaux..



## Références produit

X-Smart IQ® Packages		X-Smart IQ® & Propex IQ® Packages	
Produit	Numéro d'article	Produit	Numéro d'article
X-Smart IQ® Pièce à main Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ®	A105480000000	Kit d'introduction X-Smart IQ® & Propex IQ® Basic Pièce à main X-Smart IQ®, localisateur d'apex Propex IQ®, support Endo IQ®	B00PPIQXIQKIT
Kit d'introduction X-Smart IQ® Basic Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ® et support Endo IQ®	A105400000000	Kit d'introduction X-Smart IQ® & Propex IQ® WaveOne® Gold Pièce à main X-Smart IQ®, localisateur d'apex Propex IQ®, support Endo IQ® et limes WaveOne® Gold (31 limes)	B00PPIQWIGKIT
Kit d'introduction X-Smart IQ® WaveOne® Gold Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ®, support Endo IQ®, limes WaveOne® Gold (31 limes)	B00XSIQW1GKIT	Kit d'introduction X-Smart IQ® & Propex IQ® ProTaper Next® Pièce à main X-Smart IQ®, localisateur d'apex Propex IQ®, support Endo IQ® et limes ProTaper Next® (30 limes)	B00PPIQPTNKIT
Kit d'introduction X-Smart IQ® ProTaper Next® Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ®, support Endo IQ®, limes ProTaper Next® (30 limes)	A105420000000	Kit d'introduction X-Smart IQ® & Propex IQ® ProTaper Gold® Pièce à main X-Smart IQ®, localisateur d'apex Propex IQ®, support Endo IQ® et limes ProTaper Gold® (30 limes)	B00PPIQPTGKIT
Kit d'introduction X-Smart IQ® ProTaper Gold® Moteur, pièce à main, contre-angle X-Smart IQ®, support Endo IQ®, limes ProTaper Gold® Feilen (30 limes)	A105430000000		
Contre-angle X-Smart IQ®	A10510		
Adaptateur nettoyage du contre-angle X-Smart IQ®	A10582		
Adaptateur pour pulvérisation X-Smart IQ®	A140581		

# Application Endo IQ®

Le cœur de l'expérience IQ, intégré dans une application Apple iOS®

## Sécurité

- Indication du couple en temps réel : représentation visuelle ou acoustique

## Polyvalence

- Sélectionnez une séquence de limes ou créez simplement la vôtre

## Performance augmentée

- Utilisez la fonction configurable « Shaping Target » pour modifier la position du point de référence à mettre en forme<sup>5</sup>
- Utilisez la fonction auto-reverse<sup>5</sup>

## Fonction auto-reverse

- Inversion automatique de la rotation à la valeur limite de couple préprogrammée, en rotation continue et réciprocity

## Créez les bonnes attentes chez vos patients

- Expliquez le traitement endodontique prévu à l'aide de l'application.

## Facilitez la saisie et le transfert de vos données de traitement

- Associez vos données de traitement de base (dent traitée, longueur de travail, dernier instrument utilisé, méthode d'obturation, notes) à chaque patient
- Transférez le compte rendu de traitement dans le dossier du patient

<sup>5</sup> Lorsque les deux appareils sont combinés et connectés à l'application Endo IQ®

## Spécifications techniques

- L'application Endo IQ® est compatible avec les modèles d'iPad® actuels qui supportent l'une des deux versions Apple iOS® les plus récentes
- Contient une bibliothèque d'instruments et des programmes prédéfinis pour limes WaveOne® Gold, WaveOne®, ProTaper Next®, ProTaper Gold®, ProTaper® Universal, ProFile®, PathFile® et ProGlider®
- Bibliothèque de limes configurable et compatible avec d'autres systèmes de limes
- Possibilité de configurer plusieurs utilisateurs

## Références produit

Accessoires	
Produit	Numéro d'article
Support pour iPad® Endo IQ®	B00IQ00STA000
Coque de protection - iPad® Pro 12.9" (100 pièce)	B00IQ00129BAR
Coque de protection - iPad® Pro 10.5" (100 pièce)	B00IQ00105BAR
Coque de protection - iPad® (100 pièce)	B00IQ00097BAR
Coque de protection - iPad mini™ (100 pièce)	B00IQ00079BAR
Propex IQ® coque de protection à usage unique (100 pièce)	BO0PPIQ1ACBAR
Propex IQ® agrafe de retenue	B00PPIQCLAMP0
Propex IQ® câble de mesure	B00PPIQ1ACCBL
Propex IQ® clip de limes (2x)	B00PPIQ2ACFCL
Propex IQ® clip de lèvres (5x)	B00PPIQ5ACLCL
Propex IQ® testeur externe	B00PPIQ1ACTST
Propex IQ® Batterie rechargeable	B00PPIQ2ACBAT
Propex IQ® chargeur	B00PPIQ1ACCHG
X-Smart IQ® câble de mesure	BO0PPIQ1ACHPA







Dentsply Sirona  
WaveOne Gold  
Endosseous Implant System

Dentsply Sirona  
WaveOne Gold  
Endosseous Implant System

Dentsply Sirona  
WaveOne Gold  
Endosseous Implant System

Dentsply Sirona  
WaveOne Gold System  
Directions for use

Dentsply Sirona  
0.1

Dentsply Sirona

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™



Dentsply Sirona (Schweiz) AG  
Täferweg 1  
5405 Baden-Dättwil

+41 56 483 30 40  
[info.ch@dentsplysirona.com](mailto:info.ch@dentsplysirona.com)

