

Le système suisse de limes en réciprocité

WaveOne® Gold



Mise en forme avec la gamme WaveOne® Gold en **réciprocité**

Notre solution

WaveOne® Gold est destiné à la mise en forme canalaire efficace **en réciprocity** à l'aide d'une lime unique de mise en forme. Profitez de la qualité et de la fiabilité suisse.

Sécurité élevée des patients

- Grande résistance à la fatigue cyclique
- Risque réduit de l'effet de vissage comparé aux limes rotatives traditionnelles

Plus vaste éventail de morphologies canales

- La technologie Gold rend la lime encore plus flexible
- Assortiment étendu de limes (small, primary, medium, large)

Temps de mise en forme encore plus court

- Efficacité de coupe améliorée
- La technologie à lime unique économise du temps lors de la mise en forme pour l'irrigation des canaux radiculaires

Limes de cathétérisme



ReadySteel®

Lime manuelle pour canal ISO 10 à conicité de .02.



WaveOne® Gold Glider

Lime de mise en forme canalaire ISO 15 à conicité variable de .02.

Limes de mise en forme

small

ISO 20
Conicité de .07



primary

ISO 25
Conicité de .07



medium

ISO 35
Conicité de .06



large


ISO 45
Conicité de .05



Pointes de papier & obturateurs



Mode d'emploi étape par étape

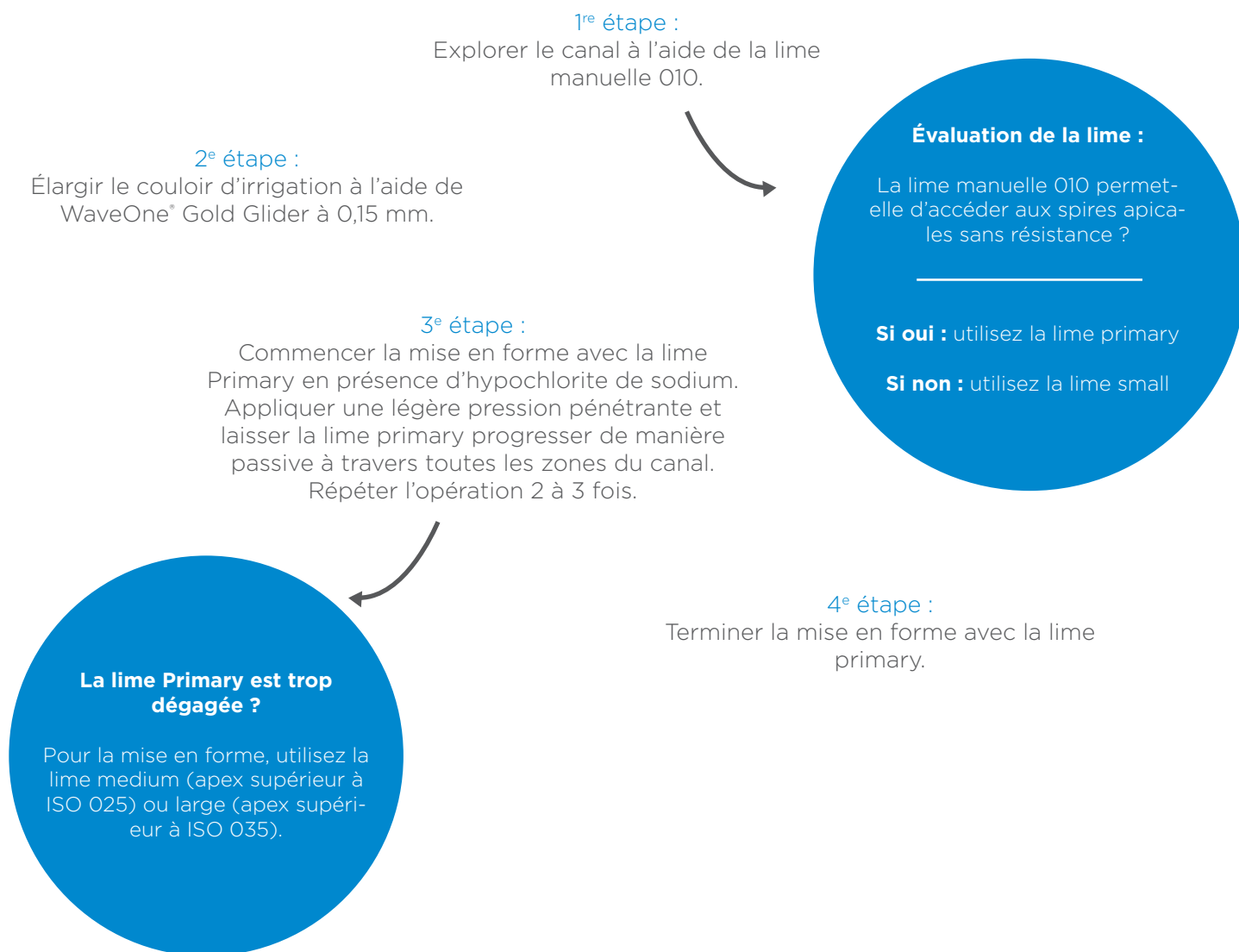

N.B.

- Nous vous recommandons de contrôler régulièrement le canal entre les différentes étapes à l'aide de la lime manuelle 010, jusqu'à ce que la lime soit complètement dégagée sur toute la longueur.
- La mise en forme est terminée si les spires apicales sont chargées de débris dentinaires.
- Le canal doit être régulièrement irrigué durant la mise en forme.
- Toute réutilisation des limes WaveOne® Gold Glider et des limes de mise en forme WaveOne® Gold accroît le risque de contamination croisée ou de rupture.
- Les limes WaveOne® Gold Glider et les limes de mise en forme WaveOne® Gold sont conçues pour un usage unique.

Avantages de l'usage unique :

Les limes WaveOne® Gold sont prêtes à l'emploi, conditionnées en blisters stériles et faciles à éliminer après utilisation. Cela augmente l'efficacité et le confort de travail puisqu'il n'est plus nécessaire de stériliser ni de nettoyer les instruments. L'usage unique réduit également le risque, pour le patient, de contamination croisée ou de fracture due à une contrainte excessive.

Qualité suisse en bref

La sécurité en endodontie - We know Endo.

Article n°

Contenu



A012D02501004

K-File Readysteel 25mm 010 (blister de 6 limes)

Légende des numéros d'article : A012D0 25 010 04

Si vous avez besoin d'autres dimensions de lime, changez la dimension dans le numéro d'article ou bien contactez votre interlocuteur chez Dentsply Siorna.



BSTW1GG621015

WaveOne® Gold Glider 21mm (blister de 6 limes)

BSTW1GG625015

WaveOne® Gold Glider 25mm (blister de 6 limes)

BSTW1GG631015

WaveOne® Gold Glider 31mm (blister de 6 limes)



A0756221GOS03

WaveOne® Gold small 21mm (blister de 6 limes)

A0756225GOS03

WaveOne® Gold small 25mm (blister de 6 limes)

A0756231GOS03

WaveOne® Gold small 31mm (blister de 6 limes)



A0756221GOP03

WaveOne® Gold primary 21mm (blister de 6 limes)

A0756225GOP03

WaveOne® Gold primary 25mm (blister de 6 limes)

A0756231GOP03

WaveOne® Gold primary 31mm (blister de 6 limes)



A0756221GOM03

WaveOne® Gold medium 21mm (blister de 6 limes)

A0756225GOM03

WaveOne® Gold medium 25mm (blister de 6 limes)

A0756231GOM03

WaveOne® Gold medium 31mm (blister de 6 limes)



A0756221GOL03


WaveOne® Gold large 21mm (blister de 6 limes)

A0756225GOL03

WaveOne® Gold large 25mm (blister de 6 limes)

A0756231GOL03

WaveOne® Gold large 31mm (blister de 6 limes)

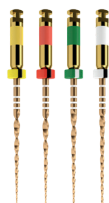

A0754221G9A03

WaveOne® Gold Assortiment 21mm (blister de 6 limes)

A0754225G9A03

WaveOne® Gold Assortiment 25mm (blister de 6 limes)

A0754231G9A03

WaveOne® Gold Assortiment 31mm (blister de 6 limes)



BSTW1GS325AST

WaveOne® Gold sequence blister 25mm
(blister de 3 limes - K-File Readysteel 25mm 010, WaveOne® Gold Glider 25mm et WaveOne® Gold primary 25mm)

Article n°

Contenu



A175W00000S03

WaveOne® Gold Paper Points small (boîte de 180)

A175W00000P03


WaveOne® Gold Paper Points primary (boîte de 180)

A175W00000M03

WaveOne® Gold Paper Points medium (boîte de 180)

A175W00000L03

WaveOne® Gold Paper Points large (boîte de 180)

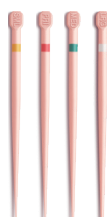

A175X00000S00

WaveOne® Gold Guttapercha small (boîte de 60)

A175X00000P00

WaveOne® Gold Guttapercha primary (boîte de 60)

A175X00000M00

WaveOne® Gold Guttapercha medium (boîte de 60)

A175X00000L00

WaveOne® Gold Guttapercha large (boîte de 60)



BNSGCWG500SML

GuttaCore® for WaveOne® Gold small (blister de 5)

BNSGCWG500PRI

GuttaCore® for WaveOne® Gold primary (blister de 5)

BNSGCWG500MED

GuttaCore® for WaveOne® Gold medium (blister de 5)

BNSGCWG500LRG

GuttaCore® for WaveOne® Gold large (blister de 5)



BNSGCWG625SML

WaveOne® Gold Size Verifiers small (boîte de 6)

BNSGCWG625PRI

WaveOne® Gold Size Verifiers primary (boîte de 6)

BNSGCWG625MED

WaveOne® Gold Size Verifiers medium (boîte de 6)

BNSGCWG625LRG

WaveOne® Gold Size Verifiers large (boîte de 6)



A105400000000

X-Smart IQ Starter Kit

A105410000000

X-Smart IQ Starter Kit et limes WaveOne® Gold



A103200000000

X-Smart Plus



A017623000200

Four Thermaprep

Contactez-nous ou adressez-vous à votre magasin spécialisé pour une consultation sans engagement de votre part.

Dentsply Sirona (Schweiz) AG, Täfernweg 1, 5405 Baden-Dättwil, 056 483 30 42, info.ch@dentsplysirona.com

Dents du Midi

Ein Traum aus der Westschweiz!
Entdecken Sie eine wunderschöne
Umgebung.

Wussten Sie schon, dass auch
unsere Endo-Produkte aus der
Westschweiz kommen?

« Swiss made »
1 000 000 limes par
jour - fabriquées à
Ballaigues (VD)

Plus de 182 ans
d'expertise
en endodontie

**Votre système suisse de limes
en réciprocité - WaveOne® Gold**

« Plus de 800
employés en Suisse ! »

