

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™



Teneo

# Zusammenspiel in Perfektion

[dentsplysirona.com/teneo](https://dentsplysirona.com/teneo)







## Zusammenspiel in Perfektion

Teneo steht für den kompromisslosen Anspruch, sich nur mit dem Besten zufriedenzugeben. Einen perfekt abgestimmten Workflow erreichen Sie nur dann, wenn Sie und Ihre Behandlungseinheit optimal miteinander interagieren. Deswegen reagiert Teneo automatisch und individuell auf all Ihre Anforderungen. Sorgfältig ausgewählte Funktionen unterstützen Sie bis in das kleinste Detail bei jeder Behandlungssituation. Umfassender Komfort garantiert Entspannung für Ihre Patienten. Ihr Fokus liegt ganz auf Ihrer Arbeit. Warum sollten Sie sich mit weniger zufriedengeben?



# Behandeln neu definiert



Für Sie ist Ihre tägliche Arbeit der Schlüssel für den Praxiserfolg. Darum wurde Teneo konsequent entsprechend dem zahnärztlichen Workflow entwickelt. Denn nur wenn Sie effizient und ergonomisch arbeiten können, profitiert der Patient von der vollen Bandbreite Ihrer Fähigkeiten. Deswegen stellt sich Teneo durch seine automatischen und motorischen Möglichkeiten ganz auf Ihre Bedürfnisse ein. Er reagiert auf Sie und Ihren Patienten - und der nächste Behandlungsschritt ist immer nur einen Handgriff entfernt.


## Warum sollten Sie sich mit weniger zufriedengeben?

Mit Funktionen wie motorischer Verschiebebahn, motorischer Kopfstütze und motorischem Mundspülbecken passt sich Teneo perfekt an Ihren Behandlungsablauf an.



## Sie kennen jeden Handgriff – Teneo auch

Damit Sie sich ganz auf Ihren Patienten konzentrieren können, bringt Teneo mit seiner motorischen Verschiebebahn alles in Griffweite – handfrei und ohne Kraftaufwand. So können Sie und Ihre Assistenz jederzeit Ihre ergonomische Arbeitsposition beibehalten.

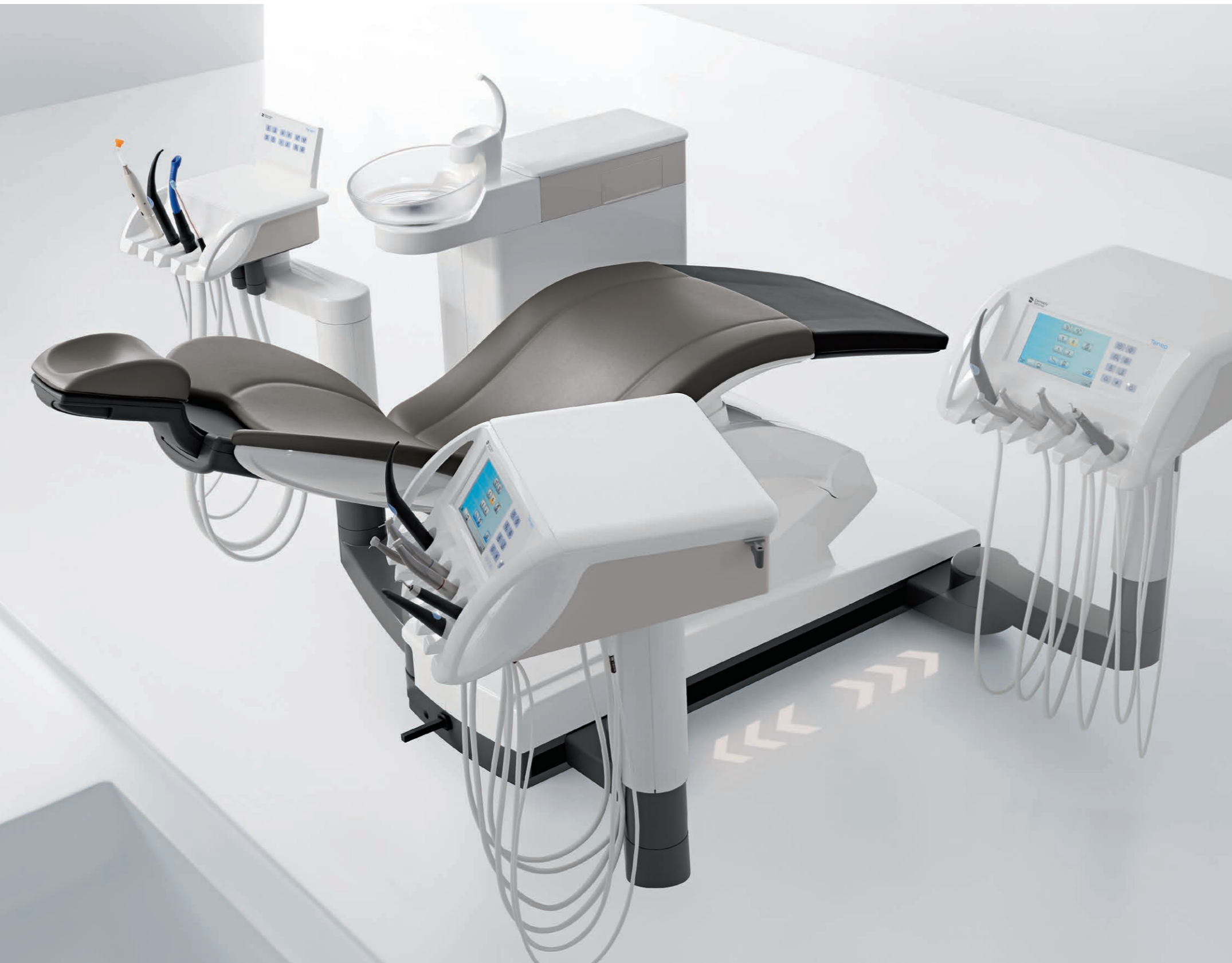

### Optimierte Greifwege mit dem Split-Konzept



Arzt- und Assistenzelemente sowie das Tray sind einfach und unabhängig voneinander positionierbar. So können Sie flexibel zwischen Team- und Alleinbehandlung wechseln.

### Handfreie Bedienung



Der kabellose Fußschalter ist Ihr multifunktionales Steuerelement für alle Stuhlfunktionen. Sie können damit das EasyTouch-Display durchgängig handfrei bedienen und die motorische Verschiebebahn steuern.

## Sie wollen ergonomisch behandeln – Teneo passt sich an

Nur bei korrekter Lagerung und optimalem Zugang zum Patienten können auch Sie eine gesunde Körperhaltung einnehmen. Für Ihren umfassenden Behandlungskomfort unterstützt Teneo Sie dabei mit seiner motorischen Kopfstütze, dem motorischen Mundspülbecken und der motorischen Verschiebebahn.



### Vertikale Mundpunktpositionierung



Teneo kennt Ihre ideale Arbeitshaltung. Damit Sie immer in der optimalen Position arbeiten, lagert er den Mundpunkt auch bei unterschiedlich großen Patienten (siehe Abbildungen) immer auf gleicher Arbeitshöhe.

### Motorische Kopfstütze



Für einen optimalen Patientenzugang können Ausschub und Neigung der motorischen Kopfstütze zum Beispiel über den Fußschalter, die Benutzeroberfläche oder auch manuell an der Kopfstütze eingestellt werden.

### Motorisches Mundspülbecken



Das Mundspülbecken dreht sich motorisch ein und aus. Die Position ist programmierbar. Es trägt somit zum schnellen und sicheren Behandlungsablauf bei.





# Der Unterschied liegt im Detail

Bei Ihrer Behandlung geht es um fließende Abläufe. Dazu brauchen Sie eine Behandlungseinheit, deren Funktionen genau an Ihren Workflow angepasst sind und nicht umgekehrt. Deswegen bringt Teneo eine umfangreiche Auswahl an Funktionen bereits mit in Ihre Praxis. Die Bedienoberfläche ist individuell konfigurierbar, sodass Sie das volle Behandlungsspektrum ausschöpfen können.

## Warum sollten Sie sich mit weniger zufriedengeben?

Mit großzügiger Bedienoberfläche, 6+1 individualisierbaren Instrumentenpositionen und zahlreichen Hilfsmitteln für Ihre Patientenkommunikation ist Teneo ideal vorkonfiguriert. Mit einem Tastendruck ist er perfekt für die Endodontie oder Implantologie einsetzbar.



## Sie wollen alle Freiheiten – Teneo ist flexibel

Die integrierbare Implantologie- und Endodontiefunktion machen Umrüstzeiten überflüssig, da zusätzliche Tischgeräte entfallen. Alle Funktionen sind über den Fußschalter ansteuerbar. So entsteht ein fließender Übergang zwischen Patientenuntersuchung, Aufklärung und Therapie. Zahlreiche Zusatzfunktionen, wie der ApexLocator oder das Implant Terminal in Sidexis 4 machen Teneo zum Experten für jede Therapiesituation.

Teneo unterstützt alle aktuellen reziproken Feilensysteme, wie Wave One, Wave One Gold, Reciproc, Reciproc blue.




### Endodontie

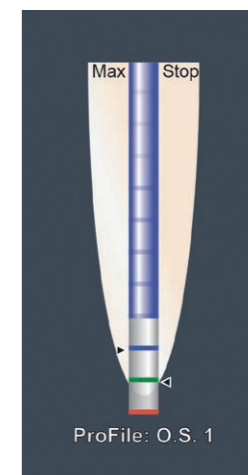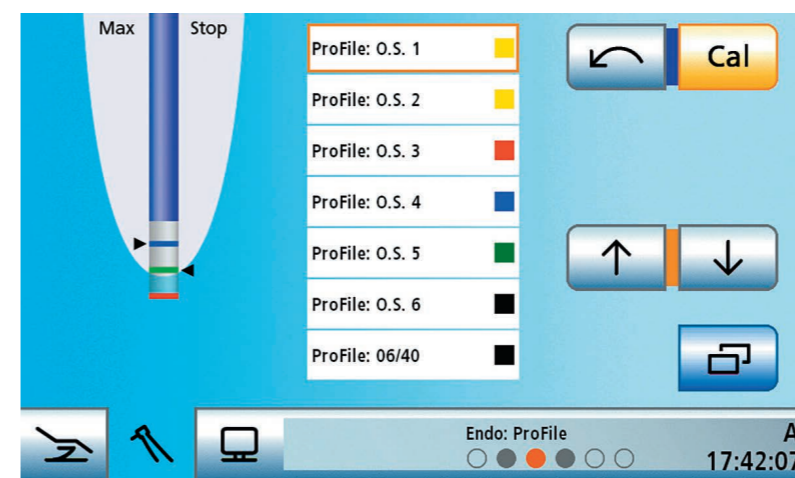

ApexLocator\*


Die exakte Drehmomentsteuerung, der ApexLocator und die einzigartige Feilenbibliothek erleichtern Ihre Arbeitsabläufe bei höchster klinischer Sicherheit. Dabei arbeiten Sie ausschließlich mit dem Fußschalter von Teneo.

### Implantologie

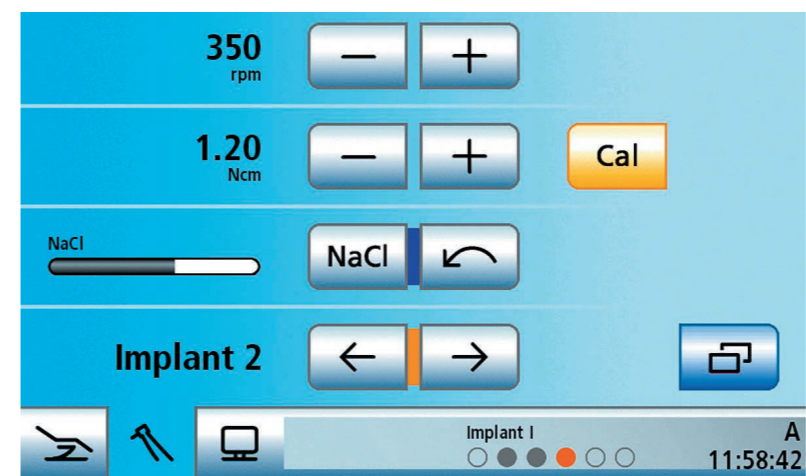

Stellen Sie Teneo entsprechend manuell auf Ihre Bedürfnisse ein oder wählen Sie ein Implantssystem über die integrierte Bibliothek aus. Wichtige Parameter wie Drehzahl, Drehmoment und Kühlflüssigkeit haben Sie jederzeit unter Kontrolle – effizient, steril und handfrei.

\* ApexLocator und Implant Terminal werden auf dem Sivation Monitor angezeigt.

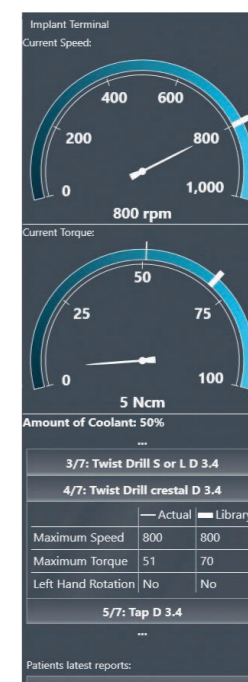

Implant Terminal\*



## Sie wollen im Detail besser sein – Teneo bietet mehr

Teneo bringt mit seinen durchdachten Details alles mit, um in jeder Situation ideal arbeiten zu können. Von der großen Bedienoberfläche bis hin zur flexiblen Konfiguration der Instrumentenpositionen macht Teneo den Unterschied.



### 7"-EasyTouch-Display



Das große Display garantiert eine intuitive Bedienung. Es ist individualisierbar, upgradefähig und zeigt im Einfachmodus nur die Funktionen, die Sie aktuell brauchen. Für einen sicheren und übersichtlichen Umgang während der ganzen Behandlung.

### 6+1 Instrumentenpositionen



Ihre zentralen Arbeits- und Bedienelemente übersichtlich gebündelt: Dank der 6 Instrumentenpositionen konfigurieren Sie die Einheit mit noch mehr Möglichkeiten frei nach Ihren Anforderungen. Die Kamera kann optional in einer Zusatzablage abgelegt werden.

### Behandlungsleuchte LEDview Plus



LEDview Plus erzeugt mit optimaler Lichtstärke, Lichtfarbe und Lichtfeldgröße immer das richtige Licht und perfekte Sichtverhältnisse für jede Behandlung. Mit dem integrierten Composite-Modus bearbeiten Sie Füllmaterialien in aller Ruhe, ohne dass diese frühzeitig aushärten. Die Leuchte lässt sich optimal positionieren und über einen berührungslosen Sensor bedienen. Auch verfügbar als Deckenleuchte oder Deckenkombination mit Heliodont Plus.

### Kamera SiroCam AF+



Optimieren Sie die Visualisierung und Dokumentation Ihrer Behandlung: Die SiroCam AF+ verbindet beste Bildqualität mit einfacher Handhabung. Die Aufnahme sehen Sie auf dem 22"-Monitor in bester HD-Qualität.





## Sie schaffen Vertrauen – Teneo hilft dabei

Für erstklassige Behandlungsergebnisse ist eine Kommunikation mit dem Patienten wesentlich. Ein transparenter Behandlungsprozess trägt maßgeblich zur Patientenbindung bei. Teneo ermöglicht klar visualisierte Vor-Ort-Beratung, speichert individuelle Patientenpositionen und trägt so zur Vertrauensbildung gegenüber Ihrer Praxis bei.

### Gut beraten mit Teneo

- Zeigen Sie auf dem integrierten Monitor intraorale Aufnahmen, 3D-Röntgenbilder oder Präsentationen über das Patientenkommunikationsmenü.
- Schaffen Sie eine Vertrauensbasis, indem Sie dem Patienten den Behandlungsablauf verständlich erläutern und Angst reduzieren.
- Erläutern und dokumentieren Sie den Behandlungserfolg, natürlich in bester Bildqualität mit der Intraoralkamera SiroCam AF+





# Komfort auf außergewöhnlichem Niveau

---

Bei zahnärztlichen Behandlungen ist es vielen Patienten besonders wichtig, eine Atmosphäre vorzufinden, in der sie sich mit ihren individuellen Bedürfnissen wertgeschätzt fühlen. Teneo unterstützt Sie dabei ganz selbstverständlich mit seinen besonderen Komfortfunktionen. Denn wer gut aufgehoben ist, gewinnt Vertrauen – und bleibt Ihnen langfristig als Patient erhalten.

---

## **Warum sollten Sie sich mit weniger zufriedengeben?**

Ob alt, jung, groß oder klein: mit bedürfnisgerechter Patientenlagerung, individuell speicherbaren Sitzpositionen, Massagefunktion, Lordosefunktion, Langsamfahrt sowie Klima- und Lounge-Polstern passt sich Teneo unterschiedlichsten Patientenbedürfnissen an.





## Sie kennen Ihre Patienten – Teneo auch

Ein entspannter Patient macht die Behandlung für Sie einfacher und trägt zum perfekten Behandlungsergebnis bei. Ob altersgerechter Einstieg oder Angstpatient: Teneo entspricht höchsten Patientenerwartungen und sorgt mit seiner Massage- und Lordosefunktion für mehr Entspannung bei jeder Behandlung.

### Bedürfnisgerechte Lagerung

Eine Positionierung mithilfe der OrthoMotion-Funktion ist besonders für ältere oder körperlich eingeschränkte Personen geeignet: Rückenlehne und Sitzfläche bleiben dabei im selben Winkel und die Lendenwirbel werden geschont.



### Ergonomische Patientenpositionierung

Durch die kombinierte Bewegung von Rückenlehne und Sitzfläche sorgt die ErgoMotion-Funktion für eine ergonomische Streckung der Wirbelsäule. Der Patient wird dabei bequem in die Behandlungsposition gefahren.





## Form und Farbe

Für die einzigartige Atmosphäre in Ihrer Praxis bietet Teneo das perfekte Zusammenspiel von Form und Farbe. Das macht ihn zum absoluten Blickfang. Ob klassisch oder modern – Teneo fügt sich elegant in Ihre Praxisumgebung ein. Das unterstreichen auch Designauszeichnungen wie der iF product design award Gold oder die Nominierung zum Deutschen Designpreis.



### Polsterfarben

#### Die elegante Welt

Carbon\* Merlot\* Platin Pazifik\* Klassische, zeitlose Kombinationen für einen edlen Look.

#### Die natürliche Welt


Umbrä\* Saphir Basalt\* Cherry Sanfte, warme Farbtöne für ein beruhigendes Behandlungsklima.

#### Die vitale Welt

Aloe Aqua Flamingo Orchidee\* Farbenfrohe, frische Töne für eine moderne, lebendige Atmosphäre.

\* Polsterfarben auch als Lounge Polster erhältlich.

### Nahtfarben

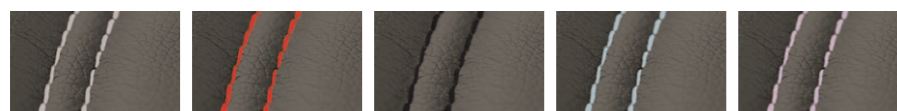

Standard Rot Dunkelgrau Hellblau Rosa

### Lackfarben

Rosé Platinsilber Mattgold Neutralweiß

### Kompromisslos hochwertig



#### Klima-Premiumpolster

Die Stauwärme in Sitz- und Rückenbereich wird reduziert. Dieser Kühleffekt fördert die Entspannung des Patienten.



#### Lounge-Polster

Durch das innovative Material ist das Polster besonders weich und bequem – für das Extra an Komfort.



#### Edel und funktional

Schaffen Sie ein Gefühl von Exklusivität in Ihrer Praxis: Das Lounge-Polster überzeugt als Einheit aus Komfort und Design. Das weiche Material besitzt eine angenehme Haptik, lässt sich einfach reinigen und desinfizieren. Akzentuierende Kontrastnähte und die durchgehende Fußauflage erzählen von Hochwertigkeit bis ins kleinste Detail.



## Teneo macht Sicherheit einfach

Höchste Hygienestandards bei minimalem Zeitaufwand werden mit Teneo zur Selbstverständlichkeit. Von pflegeleichten, glatten Oberflächen über abnehmbare Funktionsteile bis hin zum integrierten Sanieradapter ist alles auf maximale Keimreduzierung bei minimalem Aufwand ausgelegt. So entlasten Sie Ihr Team und werden höchsten Hygienestandards gerecht.



Für weitere Informationen siehe [www.krankenhaushygiene.de](http://www.krankenhaushygiene.de)



### Integrierter Sanieradapter

Zur regelmäßigen Reinigung der Wasserwege führen Sie die Instrumentenschläuche einfach in die integrierten Sanieradapter ein. Die Programme „Autopurge“ (tägliches Spülen) und „Purge“ (Spülen nach jeder Behandlung) spülen die Wasserwege automatisch und RKI-konform oder sanieren sie bei der monatlichen Intensiv-entkeimung mit dem Wasserdesinfektionsmittel Dentosept. Diese Prozesse sind besonders sicher und zeitsparend.



### Pflegeleichte Oberflächen

Teneo ist von Grund auf für ein effizientes Hygienemanagement konzipiert. Die Oberflächen sind glatt und lassen sich dadurch leicht reinigen und desinfizieren.



### Thermodesinfizierbare Elemente

Alle hygienekritischen Elemente sind abnehmbar und thermodesinfizierbar bzw. sterilisierbar, um den Schutz vor Kreuzkontamination zu erhöhen.



### Mundspülbecken

Für eine ideale Praxishygiene lässt sich auch das motorische, handfrei bedienbare Mundspülbecken für eine leichte Reinigung einfach abnehmen.



### Sanieradapter zur Saugschlauchreinigung

Die Saugschläuche lassen sich auf Knopfdruck automatisch spülen, in den Behandlungspausen oder während längerer Behandlungen. Das Plus an Hygiene: Optional werden Reinigungsmittel automatisch zudosiert.



## Nicht irgendein Teneo – mein Teneo

Teneo ist mehr als eine Behandlungseinheit. Er ist Ausdruck Ihrer Individualität. Wie auch immer Sie sich Ihre Wunschkonfiguration zusammenstellen, Teneo wird Ihnen immer eines garantieren: ein perfektes Zusammenspiel. Lassen Sie sich inspirieren!

### Teneo setzt Standards

Die durchdachte Ergonomie und Funktionalität in Kombination mit hochwertigsten Materialien unterstützen Sie dabei, Ihren Workflow auf höchstem Niveau aktiv zu gestalten.



Patientenstuhl



Arztelelement



Assistenzelement



Wassereinheit



Sivision



Arbeitsstühle



#### Weitere Infos unter

[dentsplysirona.com/1plus1-vorteil](https://dentsplysirona.com/1plus1-vorteil)  
oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

## Ihre Einzeloptionen

Hier finden Sie die vollständige Ausstattungsliste der Basisgeräte sowie alle wählbaren Einzeloptionen.

Patientenstuhl	
Patientenspezifische Stuhlpositionen*	■
Motorische Kopfstütze mit patientenindividueller Kopfstützenautomatik*	■
Klima-Premium-Polster	■
Lounge-Polster, auf Wunsch mit farbiger Ziernaht	□
Lordose-/Massagefunktion	■
Armlehne abnehmbar, rechts wegschwenkbar	□
Armlehne abnehmbar links	□
Kreuzfußschalter	■
Funkfußschalter	■
Fremdgeräteanschluss	□
Sitzauflage für kleine Patienten	□
Adapterplatte	□
OrthoMotion	■
ErgoMotion	■
Langsamfahrt	■

Arztelelement (mit EasyTouch, 6 Positionen, Griffe und Instrumentenablage abnehmbar)	
Sprayvit M mit Licht	□
1. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	■
2. Bohrantrieb (für Motor ohne Turbine)	■
3. Bohrantrieb (für Motor ohne Turbine)	■
4. Bohrantrieb (für Motor ohne Turbine)	□
Elektromotor BL	□
Elektromotor BL ISO C	□
Elektromotor BL Implant	□
Turbinenschlauch	■
Ultraschallhandstück SiroSonic TL	□
Sirotom Elektrochirurgie	□
Implantologiefunktion	□
Endodontiefunktion inkl. Funktion reziproke Feilsysteme	□
ApexLocator mit Anzeige auf Sivision-Monitor	□
Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung	□
USB-Schnittstelle	■
Handfreie Bedienung mit Cursorsteuerung	■
Winkelstück T1 Line Endo 6 L mit Licht	□
Winkelstück Implant 20:1	□

Assistenzelement (mit 4 Positionen, abnehmbare Ablage)	
Polylicht Satelec mini L.E.D.	□
Chirurgische Absaugung	□
Sprayvit M mit Licht	□
Absaugvorrichtung	■
Speichelzieher	■
Saugschläuche mit Schieber	□

Wassereinheit	
Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion	■
Saugschlauchreinigung, chemisch	■
Hydrokolloid-Anschluss	□
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	■
Separierautomatik	□
Amalgamabscheider	□
Motorisch schwenkbares Mundspülbecken aus Glas, abnehmbar	■
Purge-Funktion mit Autopurge	■
Aqua-Funktion	■

Sivision digital	
SiroCam AF+	□
Monitor, 22", am Tray inkl. Tray	□
Monitor, 22", an Leuchtaufbaustange	□
Kameraversorgung im Arztelement	□
Kabelsatz für PC-Anbindung	□

Arbeitsstühle (lange oder kurze Gasfeder wählbar)	
Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	□
Hugo Manual (mit Handauslösung)	□
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	□
Carl Manual (mit Handauslösung)	□
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	□
Sattelstuhl Theo	□

Weitere Optionen	
Sirona Tray	□
PC-Schnittstelle (Ethernet)	■
PC-Steuerung mit EasyTouch	■
Ferndiagnose	■
Behandlungsleuchte LEDview Plus (3 Gelenkachsen, mit Sensor)	□
Deckenleuchte LEDview Plus	□
Adapter für Heliodent Plus Deckenkombination LEDview Plus	□
Adapter für Heliodent Plus Gerätemodell	□

\* Mit Sidexis 4 verfügbar.

■ Im Basisgerät oder im Paket enthalten.

□ Optional

## Ihre Ausstattungsoptionen

Ihre Vorteilspakete



Innovation

- Sprayvit M für Arztelement und Assistenzelement
- 2 Elektromotoren BL (BL ISO C gegen Aufpreis)
- Ultraschallhandstück SiroSonic TL
- Behandlungsleuchte LEDview Plus
- Bis zu 2 Arbeitsstühle Hugo, Theo oder Carl zum Vorteilspreis



Endo

- Endodontiefunktion inkl. Funktion reziproke Feilsysteme
- Einbausatz ApexLocator
- Winkelstück T1 Line Endo 6 L
- Adapter Basic Apex (optional)
- Halterung für ApexLocator



Implant

- Erweiterte Implantologiefunktion
- Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung
- Elektromotor BL Implant
- Winkelstück Implant 20 : 1



Sivision

- Monitor, 22"
- SiroCam AF+
- Monitorposition an Tray oder Leuchtaufbaustange
- Kameraversorgung im Arztelement



Sitzauflage für kleine Patienten



ApexLocator



CEREC AI



Fremdgeräteanschluss



Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung



Implant-Adapter



Heliodent Plus-Gerätemodell



Monitor, 22", am Tray



Monitor, 22", an der Leuchtaufbaustange



## Dentsply Sirona für Sie

Wir unterstützen Zahnärzte dabei, eine bessere, sichere und schnellere zahnmedizinische Versorgung anzubieten. Denn wer täglich Höchstleistungen erbringt, erwartet das auch von seinem Equipment. Deswegen stellen wir innovative Lösungen bereit, die zur Verbesserung der Zahngesundheit beitragen. Das bedeutet für Sie, dass Sie mit Dentsply Sirona stets auf dem höchstem Standard arbeiten. Darauf können Sie sich verlassen – nicht nur heute, sondern auch in Zukunft.

### Innovationen zum Anfassen



Als globaler Innovationsführer für dentale Ausrüstungsgüter investieren wir permanent in die Forschung und damit in die Zukunft der modernen Zahnheilkunde. Durch die Vernetzung digitaler Technologien zu integrierten Gesamtlösungen und die Optimierung des Behandlungsflows schaffen wir bessere Ergebnisse, mehr Komfort und Sicherheit für den Patienten sowie Zeit- und Kostenersparnis im Praxisalltag.

### Was das für Teneo bedeutet?

#### Qualität made in Germany

Entwurf, Fertigung und Prüfung der Behandlungseinheit finden im Dentsply Sirona-Werk in Bensheim statt. Die sorgfältige Montage dort begründet den hohen Anspruch an Teneo und garantiert Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts auf lange Sicht.

#### Zukunftsweisend innovativ

Teneo entwickelt sich ständig weiter: Die Behandlungseinheit ist upgradefähig und besitzt eine USB-Schnittstelle zur Integration neuer Funktionen sowie eine Ethernetschnittstelle zur leichten Fehleranalyse.

#### Hochwertige Verarbeitung

Für Teneo werden nur die besten Materialien verarbeitet. Gerüst, Stuhl- und Rückenlehnenräger bestehen aus einer durchdachten Kombination von Stahl und Aluminium. Das macht Teneo leicht und zugleich solide.

Dentsply Sirona (Schweiz) AG  
Täferweg 1  
5405 Baden-Dättwil

info.ch@dentsplysirona.com  
056 483 30 40

#### Procedural Solutions

Preventive  
Restorative  
Orthodontics  
Endodontics  
Implants  
Prosthetics

#### Enabling Technologies

CAD/CAM  
Imaging  
Treatment Centers  
Instruments