



Axano Pure  
**Intuitiv** einfach mehr



## Unsere Mission

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, all das, was uns am Herzen liegt, weiterzuentwickeln und zu verbessern. Unsere Ziele verfolgen wir mit absoluter Leidenschaft! Mit Axano Pure haben wir eine Behandlungseinheit entwickelt, die flexible, auf die Bedürfnisse der Zahnärzte zugeschnittene Workflow-Lösungen bietet.

Sie ermöglicht nicht nur eine einfache Entscheidungsfindung, sondern versetzt Anwender in die Lage, automatisierte Aufgaben effizient zu delegieren. Axano Pure macht es möglich, mehr Arbeit mit weniger Aufwand zu erledigen, oder kurz gesagt - intuitiv einfach mehr.

[Axano Pure Trailer](#)



# Intuitiv einfach mehr

# Produkthighlights von Axano Pure

Geführte  
Hygiene-  
prozesse





# Produktvorteile

Mit Axano Pure findet intuitive Technologie ihren Weg in die Zahnheilkunde. Es braucht kein aufwändiges Training, die Workflows können sehr einfach auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

- ✓ Funktionsweise & Bedienoberfläche
- ✓ Integrierte Therapiefunktionen
- ✓ Patientenkommunikation
- ✓ Service-Software
- ✓ Ergonomie & Komfort
- ✓ Infektionsprävention
- ✓ Design & Farben



” ES WAR NIE  
EINFACHER,  
**DINGE RICHTIG  
ZU MACHEN.**

# Funktionsweise & Bedienoberfläche

## Smart Touch-Individualisierung

Bei Axano Pure arbeiten Sie mit einem intuitiven und benutzerfreundlichen 10,3" Smart Touch-Display. Über die großzügige Bedienoberfläche, lassen sich alle wichtigen Funktionen schnell und einfach auf Ihre individuelle Bedürfnisse anpassen. Der ergonomische Smart Control Fußschalter unterstützt bei der Bedienung der Behandlungseinheit – vieles geht einfacher und die wesentlichen Funktionen können direkt handfrei abgerufen werden.



### Highlight: Smart Touch-Display

- 10,3" Smart Touch-Display
- Hoher Bedienkomfort
- Anwenderfreundliche Bedienung
- Individualisierbar und intuitiv


„ DANK DER **ERWEITERTEN INDIVIDUALISIERUNG** LÄSST SICH AXANO PURE AN MEINE ART ZU ARBEITEN ANPASSEN.



# Integrierte Therapiefunktionen

## Reibungsloser Endo-Workflow


Die Präzision der Drehmomentsteuerung, der ApexLocator und eine umfangreiche Feilenbibliothek erleichtern die Arbeitsabläufe und bieten gleichzeitig hohe klinische Sicherheit. Die moderne Darstellung von Feilenfortschritt und Feilenauswahl trägt zur einfachen Bedienung bei. Mit dem Parameter Wurzelkanalkomplexität werden Drehmoment und Drehzahl der Feile optimiert und damit das Aufbereitungsrisiko reduziert.

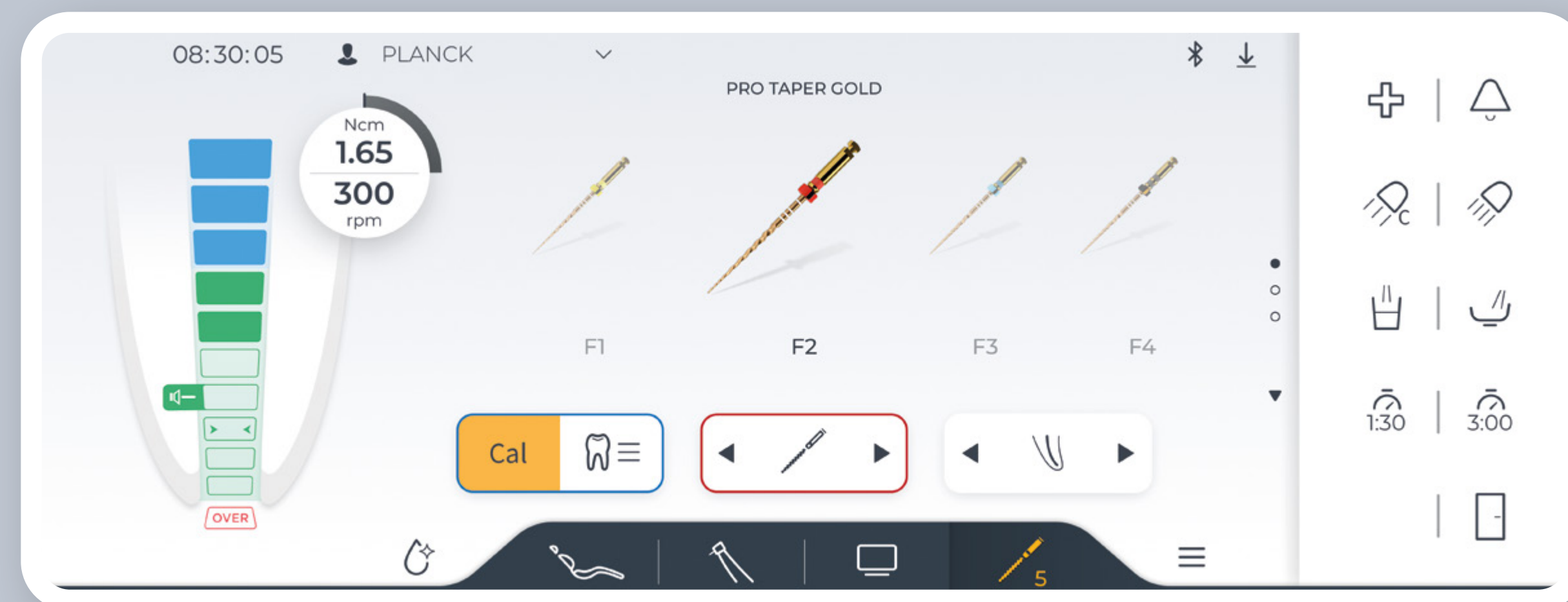

## Endo-Vorteile im Überblick

- Präzise Drehmomentkontrolle
- Integrierter ApexLocator
- Umfangreiche Feilenbibliothek
- Moderne Anzeige des Feilenfortschritt
- Einfache Feilenauswahl
- Visualisierung auf dem Sivation Monitor\*


\*Nur in Verbindung mit Sidexis 4

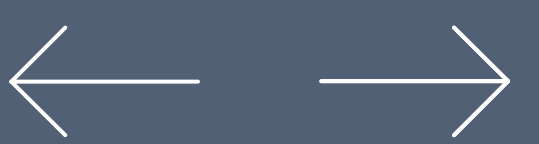

# Integrierte Therapiefunktionen

## Nahtloser Implantologie-Workflow

Die integrierte Implantologie-Funktion reduziert die Umrüstzeiten und ermöglicht einen fließenden Übergang von der Patientenuntersuchung, Aufklärung und Therapie. Der Anwender behält die Kontrolle über Drehmoment, Drehzahl und Kühlung in einem übersichtlichen Dialog. Alle Implantologie-Parameter sind über die Smart Touch-Bedienoberfläche und handfrei über den Smart Control-Fußschalter einstellbar.

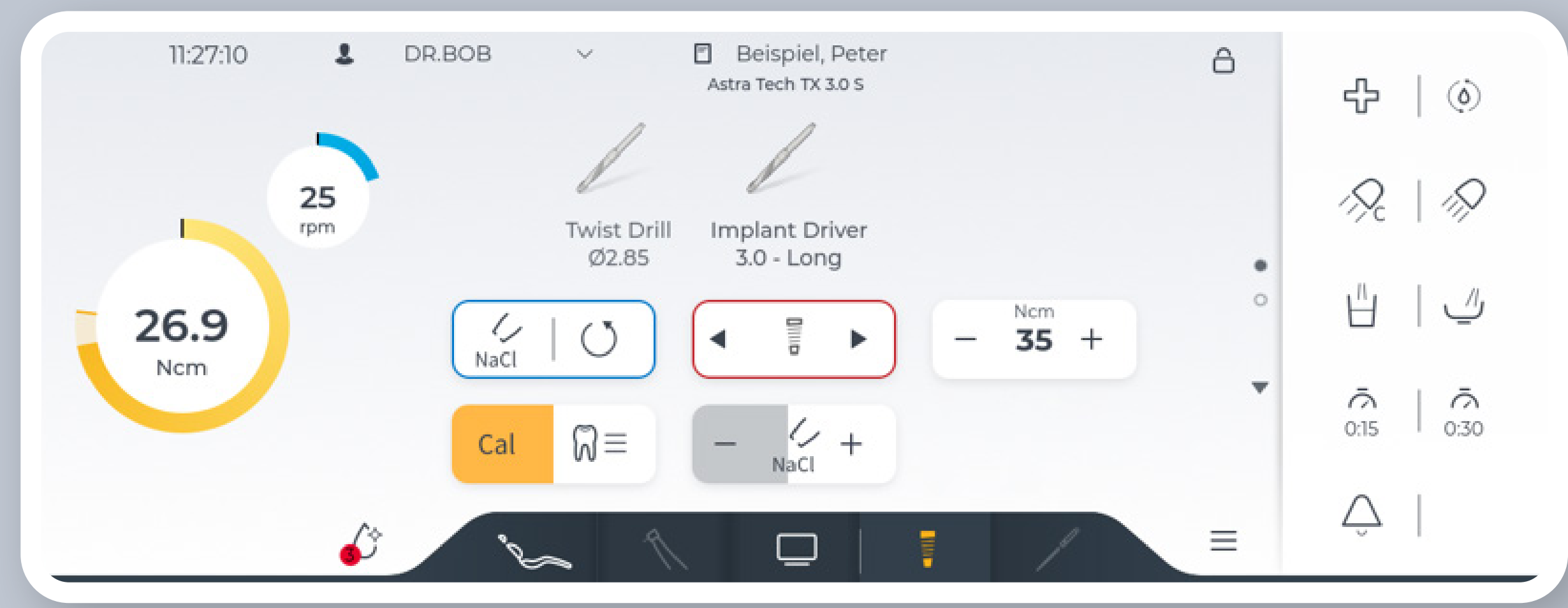

## Implant-Vorteile im Überblick

- Integrierte Implantologie-Funktion
- Nahtloser Übergang von der Untersuchung zur Aufklärung und Therapie
- Einfache Steuerung von Drehmoment, Drehzahl und Kühlung
- Komfortable Bedienung über Smart Touch und Smart Control



# Patientenkommunikation

## Vertrauensvolle Patientenbeziehung

Gute Kommunikation ist der Schlüssel zu Ihrem Patienten. Axano Pure unterstützt Sie dabei mit vielfältigen Tools die den Behandlungsablauf erläutern, um das Vertrauen Ihrer Patienten in Ihren Therapievorschlag zu stärken. Dazu gehört ein 22"-Sivision-Monitor, auf dem intraorale Aufnahmen, Röntgen-bilder oder digitale Abformungen besprochen werden können. Dies erleichtert die schrittweise Durchführung der Behandlung und erhöht den Komfort sowie das Vertrauen des Patienten in den vorgeschlagenen Plan.



## Bildbearbeitung

- Auswahl und Bearbeitung intraoraler Aufnahmen auf der Smart Touch-Bedienoberfläche
- Markieren von Bildern in Farbe und Hinzufügen von Anmerkungen für eine schnelle und genaue Dokumentation klinischer Befunde
- Anzeige verschiedener Medien aus der Mediathek direkt vom Arztelement aus steuerbar








# Service-Software

## Service trifft Kontrolle

Mit der Axano Service-Software erhalten Sie direkten Zugriff auf Ihre Behandlungseinheit. Durch die Softwarelösung lässt sich der hygienische und technische Status der Einheit zu jederzeit überblicken und sie sorgt für ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau in der Hygienesdokumentation.

Mit einer registrierten Axano Pure erhalten Sie schnelle und unkomplizierte Hilfe im Servicefall. Verbessern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Behandlungseinheit, indem Sie Ausfällen vorbeugen.




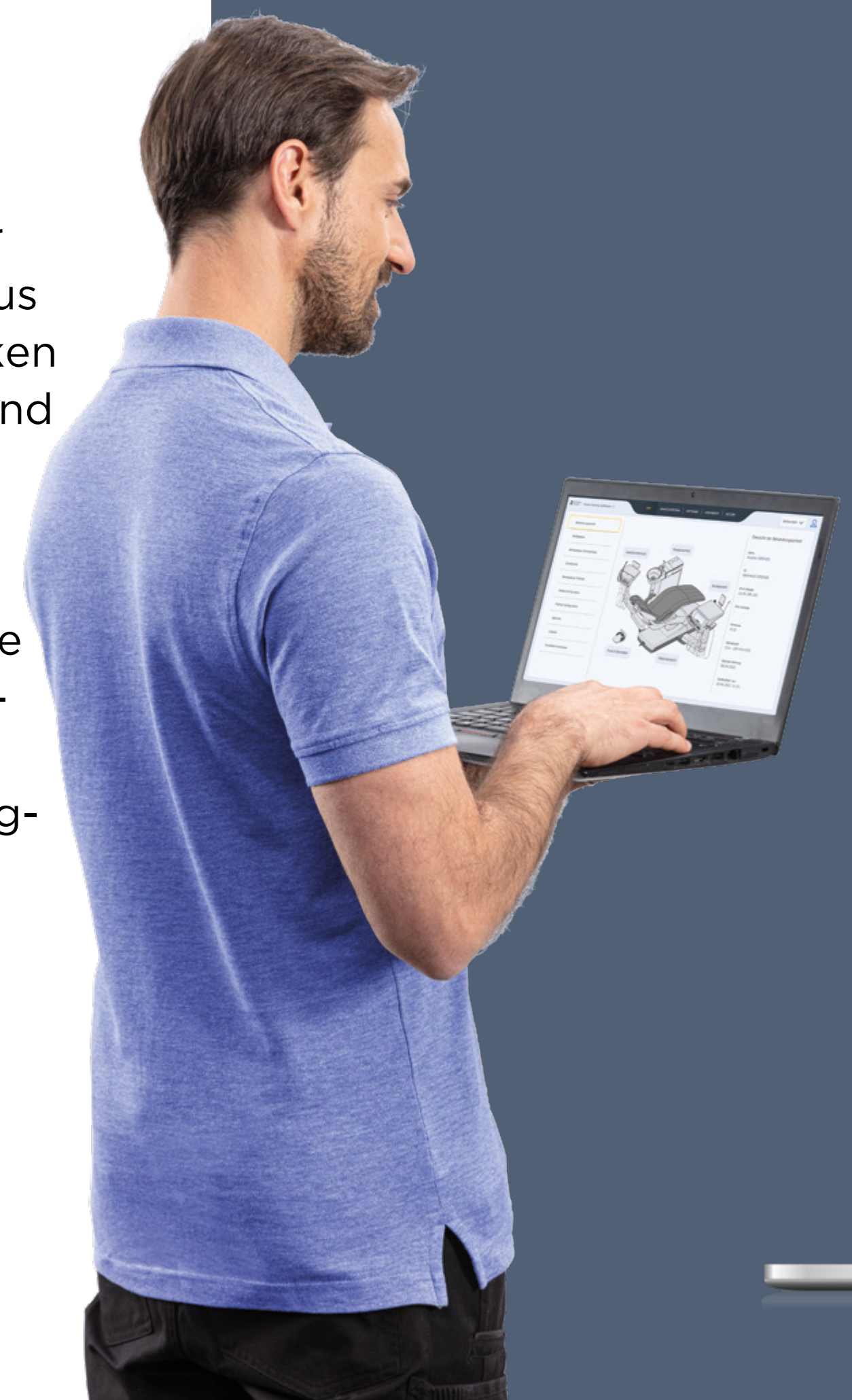


## Mehrwert für Zahnarztpraxen

- Schneller Überblick über den Gerätestatus und Verwaltung von Benutzerprofilen
- Anzeige des nächsten Wartungstermins und Zugriff auf technische Dokumente
- Anzeige von Softwareversionen und Lizenzen
- Erfasste Hygieneprotokolle inklusive Berichterstellung
- Optionale, automatisierte Ausgabe eines Hygieneprotokolls

## Mehrwert für den Techniker

- Anzeige von Informationen über die elektrischen Komponenten des Geräts
- Service-Speicher und Log-Dateien einsehen
- Gezielte Vorbereitung von Wartungsterminen
- Remote-Zugriff auf die Behandlungseinheit bei Kundenanfragen

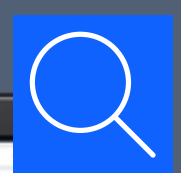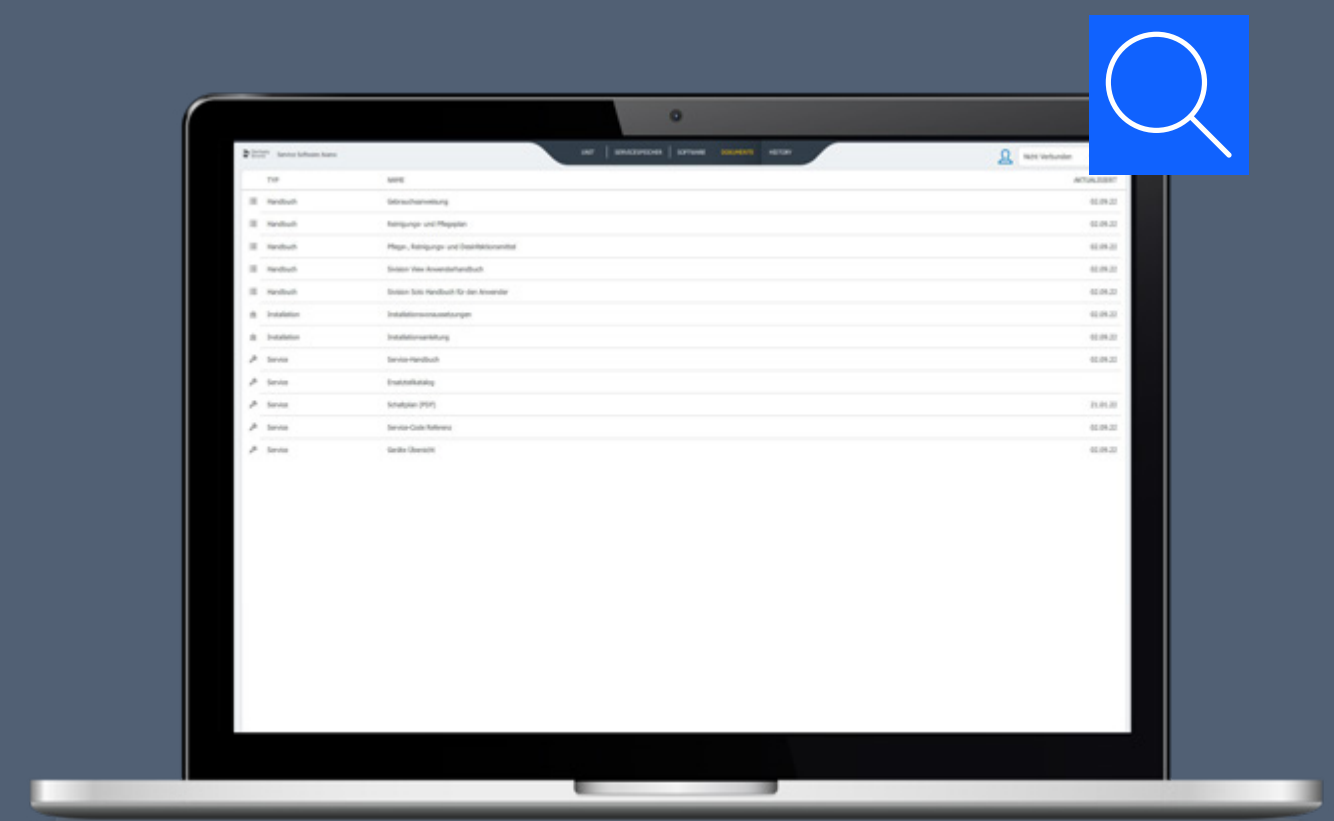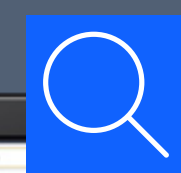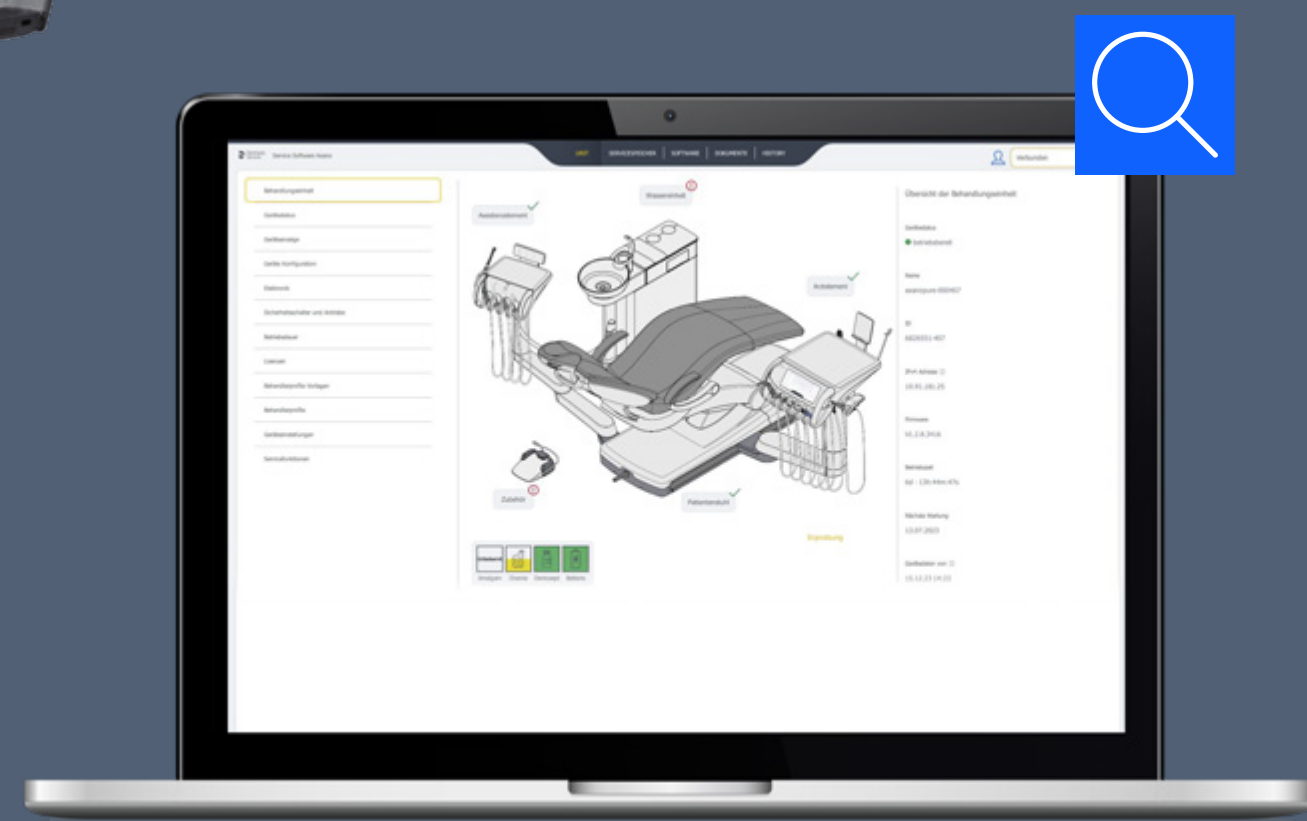



## Ergonomie & Komfort

Axano Pure verfügt über ein umfassendes Ergonomiekonzept sowie präzise automatisierte Bedienabläufe. Dies ermöglicht effizientes Arbeiten bei einer gesunden Körperhaltung. So können Sie Zeit sparen und vermeiden gleichzeitig körperliche Belastungen.

„ AXANO PURE DEFINIERT DIE ERGONOMIE MIT **ZAHLREICHEN FUNKTIONEN** NEU UND MACHT MEINE ARBEIT SEHR EINFACH.“



### Smart Control - der ergonomische Fußschalter

Der kabellose, multifunktionale Fußschalter unterstützt Sie bei der Bedienung der Behandlungseinheit. Rufen Sie wesentliche Funktionen direkt und handfrei ab. Damit haben Sie Kopf und Hände für eine ergonomische Behandlung frei.



# Ergonomie & Komfort

## Vertikale Mundpunktpositionierung

Mit der motorischen Kopfstütze bringen Sie den Patientenmund immer in die ergonomisch richtige Arbeitshöhe:

- bei Oberkiefer- wie Unterkieferbehandlung
- unabhängig von der Patientengröße

## Ergonomische Patientenpositionierung

- ErgoMotion synchronisiert die Bewegungen von Rückenlehne und Sitz mit der Lagerung der Wirbelsäule.
- Lendenwirbelstütze sorgt für eine entspannte Liegeposition des Patienten.
- Leise Stuhlmotoren tragen zu einer ruhigen Behandlungsumgebung bei.

## Doppelgelenk-Kopfstütze

- Schnelle Anpassung an sich ändernde Situationen, die Flexibilität während der einzelnen Behandlungsschritte bietet

## Motorisierte Kopfstütze


- Neigungs- und Streckungseinstellungen für die Kopfstütze können für jeden Patienten individuell angepasst werden.
- Integration in Stuhlpositionseinstellungen für eine genaue Patientenpositionierung

” DIE MOTORISCHE KOPFSTÜTZE UNTERSTÜTZT AUTOMATISCH DIE ERGONOMISCHE EINSTELLUNG UND HILFT, MEINE **ARBEITS-ABLÄUFE ZU OPTIMIEREN.**



# Infektionsprävention

Hohe Hygienestandards bei minimalem Zeitaufwand können mit Axano Pure zur Selbstverständlichkeit werden. Von den glatten, leicht zu reinigenden Oberflächen über abnehmbare Komponenten bis hin zu den integrierten Sanieradaptern ist alles auf die effiziente Durchführung der Hygienemaßnahmen ausgelegt.

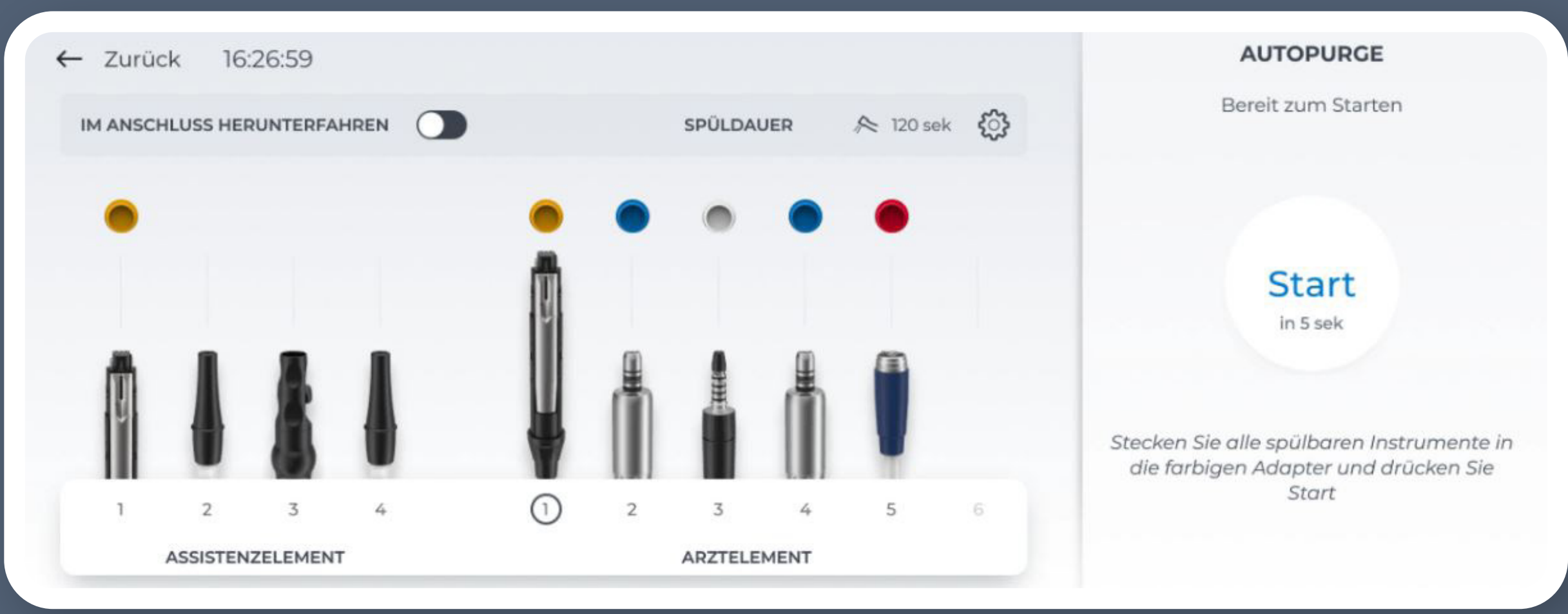

## Hohe Hygienestandards leicht gemacht

- Geführte Hygieneprozesse für das regelmäßige Spülen und die monatliche Intensiventkeimung
- Hygienecockpit zur Überwachung relevanter Hygienemaßnahmen
- Einfache und zuverlässige Reinigung und Desinfektion der Wasserwege durch integrierte Desinfektionsanlage
- Automatische chemische Mundspülbeckenreinigung
- Alle hygienekritischen Elemente sind abnehmbar, sterilisierbar und/oder thermodesinfizierbar, um den Schutz vor Kreuzkontaminationen zu erhöhen



# Design & Farben

Robuste Materialien und ihre hochwertige Verarbeitung tragen neben einer eleganten Formgebung zu einer hohen Qualität und einem ansprechenden Erscheinungsbild Ihrer Praxis bei.

Außerdem besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Polsterfarben zu wählen. Für maximalen Patientenkomfort steht auch die bequeme, weiche Lounge-Polsterung zur Verfügung.

Bei Option Lounge-Polster ist es möglich, weitere individuelle Anpassungen vorzunehmen, etwa die Farbe der Nähte zu wählen.

” ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNGSOPTIONEN VEREINFACHEN DEN PROZESS DER PERSONALISIERUNG VON AXANO PURE.

## Polsterfarben

### Eleganz




Carbon\*\* Merlot\*\* Platin Pazifik\*\* Prune\*\*

### Natürlichkeit




Umbra\*\* Saphir Basalt\*\* Cherry Sierra\*\*

### Vitalität

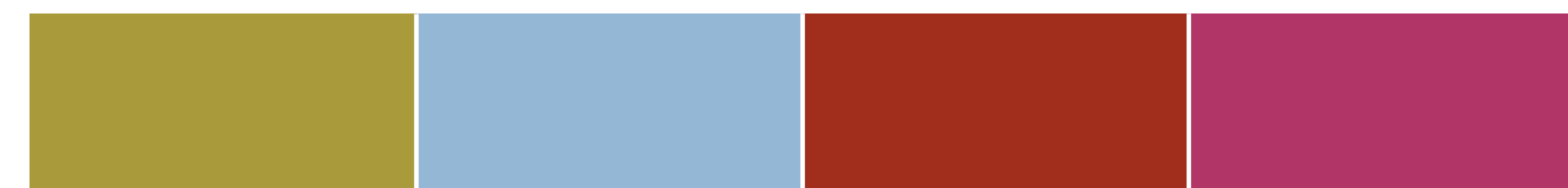

Aloe Air Flamingo Orchidee\*\*

## Nahtfarben

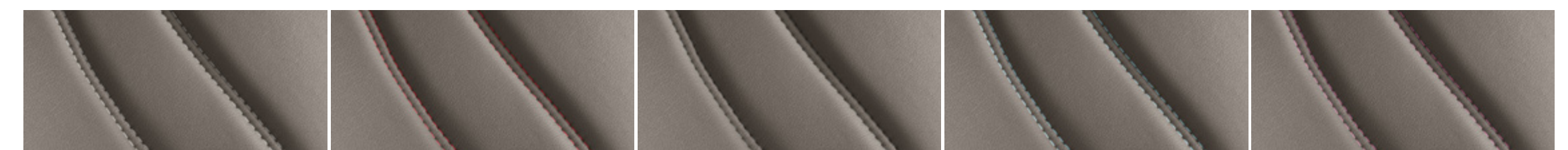

Standard Rot Dunkelgrau Hellblau Rosa

\*\*Verfügbare Farben für das Lounge Polster



# Echte digitale Zahnmedizin – mit DS Core

## Online-Mediathek und Zusammenarbeit

- Zentraler Speicher für Patientenmedien
- Sicherer Datenaustausch und Zusammenarbeit mit Spezialisten
- Einhaltung der DSGVO/HIPAA-Kommunikationsrichtlinien wird unterstützt

## Communication Canvas

- Organisieren und Anzeigen von Patientenmedien für eine effektive Kommunikation
- Austausch von Dateien mit Patienten nach der Konsultation
- Steigerung der Therapieakzeptanz von Patienten

## Bestell- & Koordinations-Lösungen

- Labor- und Dienstleistungsaufträge an einem Ort verwalten
- Optimierte Zusammenarbeit mit Laboren und Dentsply Sirona-Dienstleistungen
- Inklusive Chatmodul, Freigaben und digitaler Fallakten
- Lösung für Bestellung und Zusammenarbeit


## Integration von Geräten und Software

- Integration von Intraoralscanner, digitalem Röntgen, Fräsen und Schleifen sowie Drucklösungen
- Verbesserte Effizienz und Flexibilität der Arbeitsabläufe
- Verbesserte technische Unterstützung durch DS Core Care

## SureSmile® Simulator

- Vorschau auf das neue Lächeln des Patienten vor der Behandlung mit Alignern
- Nutzung von DS Core und Primescan für die 3D-Visualisierung am Behandlungsplatz
- Einfacher Austausch von Simulationen mit Patienten



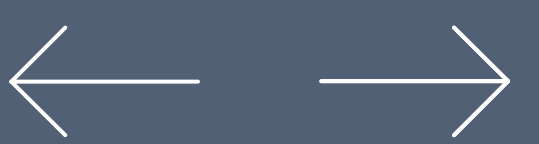

# Dentsply Sirona Operator Solution-Technologie und DS Core


## DS Operator Solutions-Technologie

Erleben Sie das innovative und preisgekrönte Design des Axano Pure mit integriertem Display für die Patientenkommunikation. Navigieren Sie nahtlos durch die intuitive Benutzeroberfläche, passen Sie Arbeitsabläufe an und nutzen Sie die Fußsteuerung zur Automatisierung. Erfahren Sie die Leichtigkeit eines geführten Hygieneverfahrens mit automatisierten Berichten und profitieren Sie von einer schnellen Serviceabwicklung und effizienten Updates für eine optimale Leistungsfähigkeit.

## Supercharged durch DS Core

DS Core ist auf eine verbesserte Patientenakzeptanz zugeschnitten und ermöglicht eine ganzheitliche Beratung, bei der Röntgenbilder, Scans und Anmerkungen nahtlos integriert werden. Primescan lässt sich mühelos integrieren und zeigt intraorale Scans neben anderen Patientenmedien auf dem Bildschirm der Behandlungseinheit an. Die Angleichung von physischen und digitalen Elementen in Ihrer Behandlungseinheit fördert eine moderne, schlüssige Interaktion und verbessert das Gesamterlebnis für den Patienten.

Integriert in  
das DS  
Ökosystem

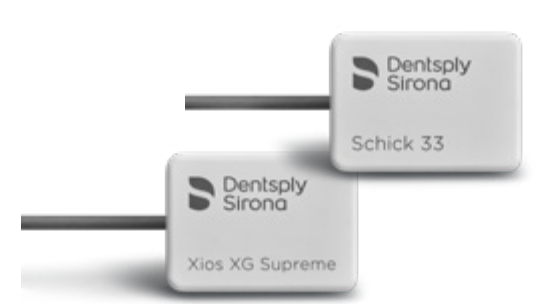



## Axano Pure und Axano:

Ein zweifacher Beleg dafür, dass wenige einfache Schritte genügen, um Ihren Arbeitsplatz an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

” ZWEI BEHANDLUNGSEINHEITEN MIT EINER GEMEINSAMEN DNA: **KEINE KOMPROMISSE BEI DER ZAHNBEHANDLUNG.**







# Axano Pure vs. Axano

Bedienkonzept	Axano Pure	Axano
Motorische Verschiebebahn	-	✓
Motorische Höhenverstellung des Arztelements	-	✓
Motorische Kopfstütze	optional	✓
Einstellbare Geschwindigkeit der Stuhlbewegung	-	✓

Arztelement	Axano Pure	Axano
Bedienoberfläche	Smart Touch-Display 10,3"	Smart Touch-Display 10,3"
Instrumentenpositionen	6 + Implant	6 + Implant + Kamera
Zusätzlicher Implant-Motor	optional	optional
Endo-Funktion	✓	optional
4. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	-	✓

Patientenstuhl	Axano Pure	Axano
Ambient Light	-	✓
Lordosefunktion	optional (mit mot. Kopfstütze)	✓
Massagefunktion	-	✓

Weitere Optionen	Axano Pure	Axano
Patientenkommunikation: Intraoralkamera	optional, Bildbearbeitung auf Bedienelement, SiroCam AF(+)	optional, Bildbearbeitung auf Bedienelement, SiroCam AF+
Motorisch schwenkbares Mundspülbecken	optional	✓



# Pakete

## + Sonderausstattungen

### Essential 9.300 €




- 1x Elektromotor BL ISO F
- Turbinenschlauch
- 1x Sprayvit (Arztelement)
- SiroSonic TL Ultraschallhandstück
- Behandlungsleuchte LEDview Plus
- Bis zu 2 Arbeitsstühle zum Paket-Vorteilspreis

### Endo im Basisgerät enthalten



- Endodontie-Funktion inklusive reziproken Feilensystemen
- ApexLocator
- T1 Line Endo 6L Winkelstück mit Licht

### Comfort 5.200 €

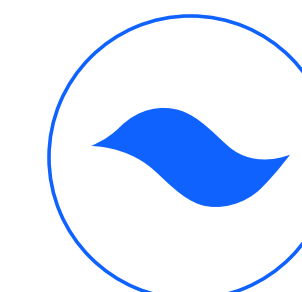

- Motorische Kopfstütze
- Lordosefunktion
- Klima-Premiumpolster
- Motorisch schwenkbares Mundspülbecken

### Praxis 12.300 €




- 2x Elektromotor BL ISO F
- Turbinenschlauch
- 3. Bohrantrieb
- 2x Sprayvit (Arzt- und Assistenzelement)
- SiroSonic TL Ultraschallhandstück
- Behandlungsleuchte LEDview Plus
- Bis zu 2 Arbeitsstühle zum Paket-Vorteilspreis

### Sivision 7.850 €



- Kameraversorgung im Arztelement
- SiroCam AF (SiroCam AF+ gegen Aufpreis)
- 22"-Sivision-Monitor
- Leuchtaufbaustange mit Adapter für Monitor (Tray für Monitoradaption gegen Aufpreis)

### Implant 6.450 €

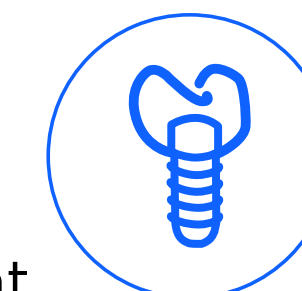

- Implantologie-Funktion
- Elektromotor BL Implant E mit Licht
- Pumpe für physiologische Kochsalzlösung
- Implant-Winkelstück 20:1



# Zusatzausstattung



ApexLocator



Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung



Elektromotor BL Implant E mit Licht



Fremdgeräte-Anschluss



Ablageschale für Polymerisationslicht SmartLite Pro



Dentsply Sirona Tray



22" Sivation Monitor an Leuchten-  
aufbaustange oder Tray



Smart Device-Halter für Tablet




Arbeitsstühle Hugo, Theo, Carl



Heliodent Plus Gerätemodell



Panorama-Röntgenbildbetrachter

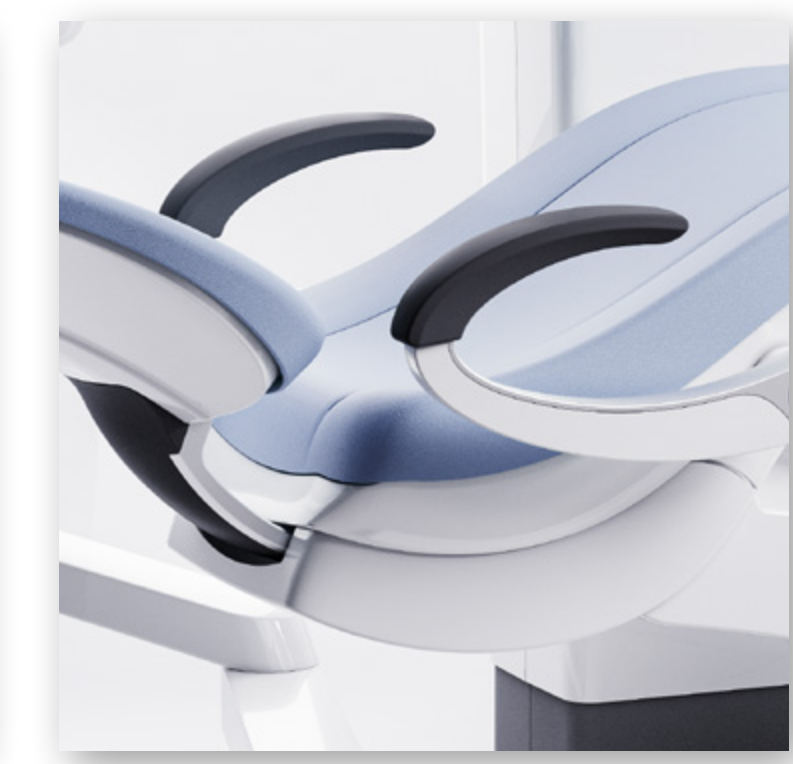

Armlehnen



# Ihre Einzeloptionen (1)

✓ = in der Grundausstattung oder im Paket enthalten  
 ○ = optional  
 \* = verfügbar mit Sidexis 4

## Arztelement (mit Smart Touch, 6 Positionen, Griffe und Instrumentenablage abnehmbar)

Sprayvit mit Licht	○
1. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	✓
2. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	✓
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	○
Elektromotor BL E	○
Elektromotor BL ISO F	○
Turbinenschlauch	○
SiroSonic TL Ultraschallhandstück	○
Implant-Funktion	○
Elektromotor BL Implant E	○
Winkelstück Implant 20:1 mit Licht	○
Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung	○
Endo-Funktion inkl. reziproken Feilensystemen	✓
ApexLocator mit Anzeige auf Sivation-Monitor	✓
Winkelstück T1 Line Endo 6 L mit Licht	✓
USB-Schnittstelle	○
Handfreie Bedienung mit Cursorsteuerung	✓
Smart Device-Halter für Tablet	○
Panorama-Röntgenbildbetrachter	○

## Patientenstuhl

Patientenspezifische Stuhlpositionen*	✓
Doppelgelenk-Kopfstütze	✓
Motorische Kopfstütze mit patientenindividueller Kopfstützenautomatik*	○
Klima-Premium-Polster	○
Lounge-Polster auf Wunsch mit farbigen Kontrastnaht	○
Lordosefunktion	○
Schwenkbare Armlehne, rechts	○
Armlehne, links	○
Kreuzfußschalter	✓
Smart Control-Fußschalter	✓
Fremdgeräte-Anschluss	○
Sitzauflage für kleine Patienten	○
ErgoMotion	✓



# Ihre Einzeloptionen (2)

✓ = in der Grundausstattung oder im Paket enthalten  
 ○ = optional  
 \* = verfügbar mit Sidexis 4

## Assistenzelement (mit Touch Display, 4 Positionen, abnehmbarer Ablage)

Sprayvit mit Licht	○
Absaugvorrichtung	✓
Speichelsauger	✓
Chirurgische Saugvorrichtung	○
2. großer Sauger	○
Ablageschale für SmartLite Pro Lampe	○
Medizinischer 12V-Anschluss	○

## Wassereinheit

Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion	✓
Chemische Saugschlauch- und Mundspülbeckenreinigung	✓
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	✓
Separierautomatik	○
Amalgamabscheider	○
Motorisch schwenkbares Mundspülbecken aus Glas, abnehmbar	○
Hygienesystem mit herausnehmbaren Reinigungsmodulen und Autopurge-Funktionen	✓
Aqua-Funktion (autarke Wasserversorgung)	✓

## Patientenkommunikation

SiroCam AF/AF+	○
22" Sivision Monitor am Tray inkl. Tray	○
22" Sivision Monitor an Leuchtaufbaustange	○
Kameraversorgung im Arztelement	○
Kabelset für PC-Anbindung	✓

## Arbeitsstühle (wahlweise lange oder kurze Gasfeder)

Hugo Freihand (mit Fußauslösung)	○
Hugo Manual (mit Handauslösung)	○
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○
Carl Manual (mit manueller Steuerung)	○
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○
Theo mit Sattelsitz	○

## Zusätzliche Optionen

Sirona Tray	○
LEDview Plus Gerätemodell	✓
LEDview Plus Deckenmodell	✓
Adapter für Heliodent Plus/LEDview Plus Decken-Kombinationen	○
Adapter für Heliodent Plus Gerätemodell	○
Patientenspiegel	○
Kamerahalterung an der Leuchte	○



**Dentsply Sirona**

Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31

64625 Bensheim

Deutschland

[dentsplysirona.com](https://dentsplysirona.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es werden eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Logos verwendet. Auch wenn diese an den jeweiligen Stellen nicht als solche gekennzeichnet sind, gelten die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle vergleichenden Aussagen in diesem Dokument auf einen Vergleich von Dentsply Sirona-Produkten untereinander.

