

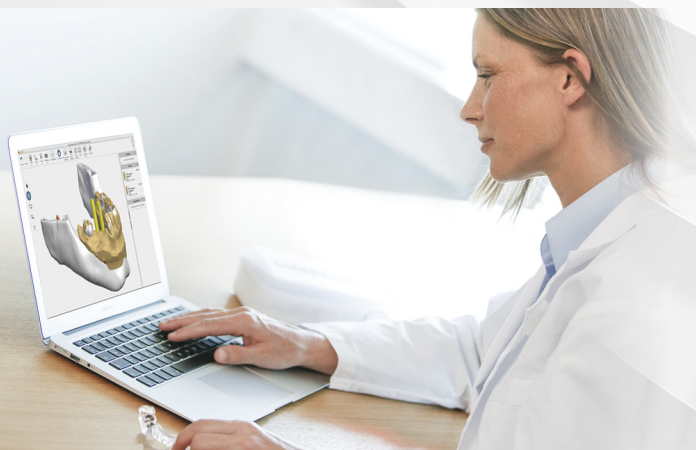


— インプラント埋入計画の立案をサポート —

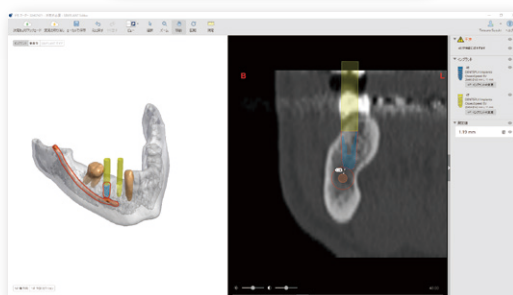

- ## ガイドドサージェリー

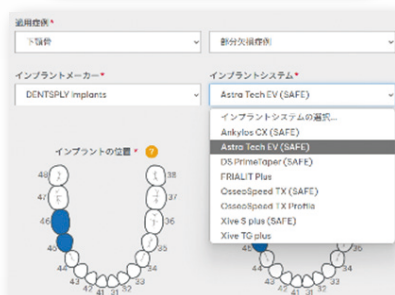


6本セット 34,800円    ボックス付きセット 60,030円




## オーダーからガイド出荷までの流れ



インプラントメーカー・システム、埋入部位、ガイドタイプを選択  
CTデータ(DICOM)とスキャンデータ(STL)をアップロード  
※石膏模型の場合は、宅配便などでDDSC-Tokyoへ送付

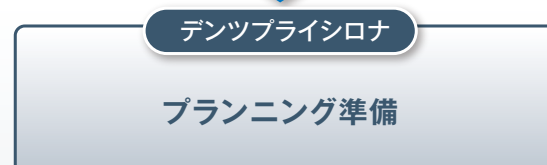

5営業日以内

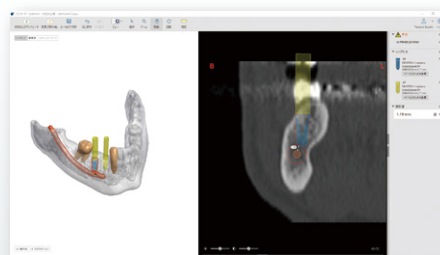

- DICOMから3D画像を構築
- インプラントを指定の位置に配置
- 下顎管の描画



5営業日以内



パイロットガイド

- 初期形成まで使用
- ロングストップドリル使用
- 数多くのインプラントメーカーに対応



セーフガイド

- インプラント埋入まで使用
- 各社ガイド専用キット使用
- 以下のメーカーに対応  
デンツプライシロナ  
ストローマン、ジンヴィ(3i)  
ノーベルバイオケア、カムログ  
バイオホライゾンス

### 推奨機器構成

	Windows	Mac
OS	Windows 10 64ビット以降	macOS Mojave(10.14)以降
CPU	Intel Core i5以上	Intel Core i5以上、Apple M1以上
メインメモリ	4 GB以上	
ハードディスク	4 GB以上の空き容量	
スクリーン解像度	1440×900ピクセル以上	
その他	インターネット接続必須	

●販売名:ロングストップドリル 一般的名称:手術用ドリルビット(穿孔器) 届出番号:13B1X10236Y05350 クラス分類:I ●販売名:シムプラント ガイド 一般的名称:手術用ドリルビットガイド 届出番号:13B1X10236Y05360 クラス分類:I ●販売名:EVガイド用インストールメント 一般的名称:歯科用インプラント手術器具(歯科用スチールバー) 届出番号:13B1X10236Y05470 クラス分類:I ●販売名:シムプラント エディタ 一般的名称:歯科インプラント用治療計画支援プログラム 承認番号:30300BZX00080000 クラス分類:II

製造販売業者

デンツプライシロナ株式会社

お問い合わせ

デンツプライシロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京(DDSC-Tokyo)

〒140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館3F TEL:0120-016-152 FAX:0120-280-630