



Axano Pure Simply do more.

dentsplysirona.com

 **Dentsply
Sirona**



Axano Pureでワークフローに革新を

私たちは、常に進化し続け、心から大切にすべての領域を発展させるというビジョンに取り組み、その目標を情熱をもって追求しています。Axano Pureは、歯科医師のニーズに合わせた柔軟なワークフローソリューションを提供する技術として開発されました。

意思決定を容易にし、自動化によって効率的なタスク管理をサポートします。

Axano Pureは、より少ない労力でより多くの作業を実現するためのテクノロジーです。

簡潔に言えば——もっとシンプルに、もっと多くを。

Simply do more.



Axano Pure 特長

Axano Pureは、直感的なテクノロジーを歯科医療に取り入れました。複雑な操作や習得は必要なく、ワークフローは簡単にニーズに合わせて調整できます。

- ユーザーインターフェースと操作性
- ビルトイン治療機能
- 患者コミュニケーション
- 人間工学と快適性
- 衛生管理
- デザイン・カラー
- 修理サービス



ユーザーインターフェースと操作性

Axano Pureは、直感的で使いやすい10.3インチのタッチディスプレイを搭載しています。カスタマイズ性に優れた広々としたユーザーインターフェースは、操作性をさらに高めます。加えて、フットコントロールを組み合わせることで、治療プロセスをよりシンプルにし、快適な操作体験をサポートします。



スマートタッチディスプレイ

- ・ 10.3インチのタッチディスプレイ
- ・ 快適な操作性
- ・ ユーザーフレンドリーな操作
- ・ カスタマイズ可能で直感的

患者コミュニケーション

効果的なコミュニケーションは、患者との信頼関係を築くうえで欠かせません。Axano Pureは、患者の理解と治療計画への納得をサポートするツールを搭載しています。22インチのシビジョンモニターを使用すれば、チェアサイドで口腔内画像、X線、デジタル印象をわかりやすく提示できます。これにより、治療の流れをステップごとに説明し、患者の安心感と信頼を高めます。



画像処理機能



- ・ Smart Touchユーザーインターフェースで口腔内画像を選択・編集
- ・ 画像にカラーでマーキングし、注釈を追加して臨床所見を迅速かつ正確に記録
- ・ メディアデータベースからさまざまなメディアを歯科用エレメントに直接表示



ビルトイン治療機能

スムーズなエンドワークフロー

トルク制御の精度、ApexLocator、充実したファイルライブラリにより、ワークフローを効率化し、臨床的安全性をサポートします。ファイルの進行状況や選択を表示するモダンな画面は、操作をより簡単にします。さらに、根管の複雑さに応じてトルクと速度を最適化するパラメータにより、再処理のリスクを低減します。

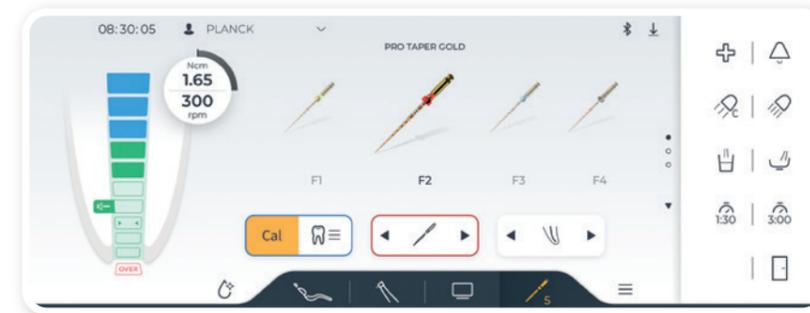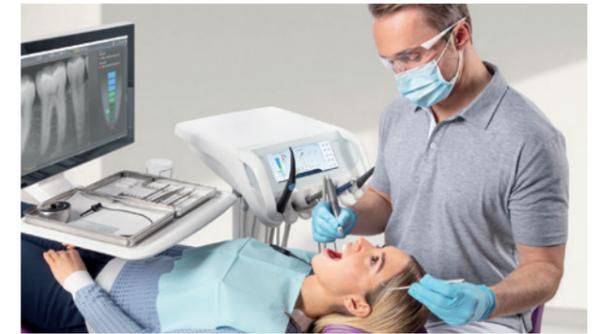


エンド機能 ※標準仕様

- ・ 精密なトルク制御
- ・ ビルトインされたApexLocator
- ・ 充実したファイルライブラリ
- ・ ファイル進行状況の表示
- ・ 簡単なファイル選択
- ・ シビジョンモニターでの表示

シームレスなインプラントワークフロー

ビルトインされたインプラント機能により、患者の診査から説明、治療への移行をスムーズにし、切り替え時間を短縮します。トルク、回転速度、冷却は明確なダイアログで操作でき、すべてのパラメータはSmart TouchとSmart Controlインターフェースから調整可能です。

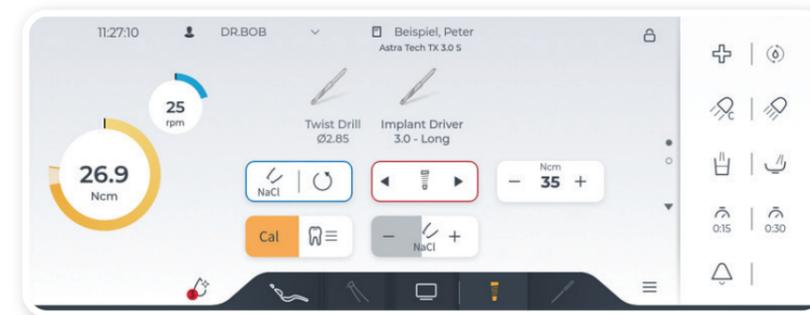

インプラント機能 ※オプション



- ・ シームレスなインプラントワークフロー
- ・ ビルトインインプラント機能
- ・ 診査から説明、治療までスムーズに移行
- ・ トルク・回転速度・冷却の簡単操作
- ・ Smart TouchとSmart Controlによる快適な操作性

人間工学と快適性

Axano Pureは、人間工学に基づいた快適性を高めるための多彩な機能を搭載しています。これらの機能は、健康的な姿勢をサポートするだけでなく、効率的で精度の高い自動化ワークフローを実現し、時間の節約と身体への負担軽減に貢献します。

人間工学に基づいた患者ポジショニング

- エルゴモーション機能により、背もたれと座面の動きを連動させ、快適な姿勢保持をサポート
- 腰部サポートが患者のリラクゼーションを促します
- 静音設計のチェアモーターが、落ち着いた治療環境づくりに貢献

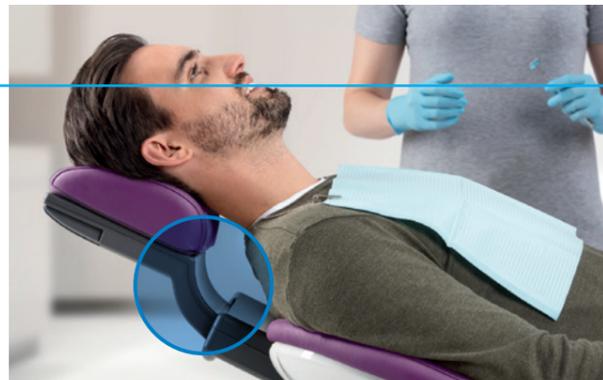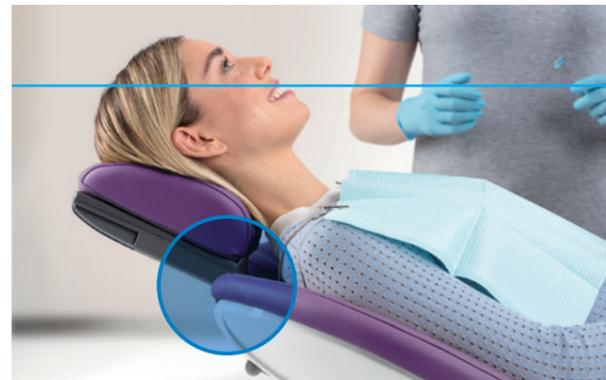

垂直方向の口腔位置調整

- モーター駆動のヘッドレストが、あなたの作業に適した高さを記憶
- 患者の口腔位置を自動で一定の治療ポジションに調整
- 患者の身長に関わらず、上下顎の位置を均一に保持

※オプションのモーターヘッドレスト選択時に有効です。



モーターヘッドレスト ※オプション

- ヘッドレストの角度や伸縮を患者ごとに調整可能
- チェアのポジション調整と連動し、より精度の高いポジショニングをサポート



ダブルジョイントヘッドレスト ※標準仕様

- 状況の変化に合わせてスムーズに調整でき、治療時の柔軟性をサポート



スマートワイヤレスフットコントロール

直感的なデザインで、ハンズフリー操作による快適な治療環境をサポートします。

衛生管理

Axano Pureは、少ない手順で高い衛生水準を維持することをサポートします。滑らかで清掃しやすい表面、取り外し可能なコンポーネント、そしてビルトインされた洗浄アダプターまで、効率的な衛生管理を考慮した設計です。



直感的操作で実現できる高水準の衛生管理

- 定期的なフラッシングや月単位の集中的な洗浄をサポートするガイド付き衛生プロセス
- 必要な衛生管理を確認できる「ハイジーンコックピット」
- ビルトイン洗浄装置による器具ホースの簡単なクリーニング
- バキュームホース清掃を容易にする取り外し可能なコネクター
- 滅菌または熱消毒に対応した取り外し可能なパーツで、交差感染リスク低減に配慮

修理サービスとネットワークの連携

日常運用を支える修理サポートをご利用いただけます。

Axano Pureは、オンラインを活用した修理サービスに対応しています。オンラインベースの修理サポートにより、機器の状態に応じた適切な対応が可能です。日常的なトラブル対応をスムーズに行うことで、治療環境の安定した運用を支えます。



※本機能はインターネット回線に接続されている場合、有効です。

Upholstery colors

The elegant world



The natural world



The vital world




*ラウンジシート選択可能色

DS Coreによるさらなる進化

DS Coreは、X線画像、スキャン、注釈を統合した包括的なコンサルテーションをサポートし、患者の理解と納得を促進します。

Primescanとの連携により、口腔内スキャンを治療ユニットの画面に表示し、他の患者メディアと並べて確認可能。

物理的要素とデジタル要素を融合させることで、治療環境全体に一貫性とモダンな体験を提供します。

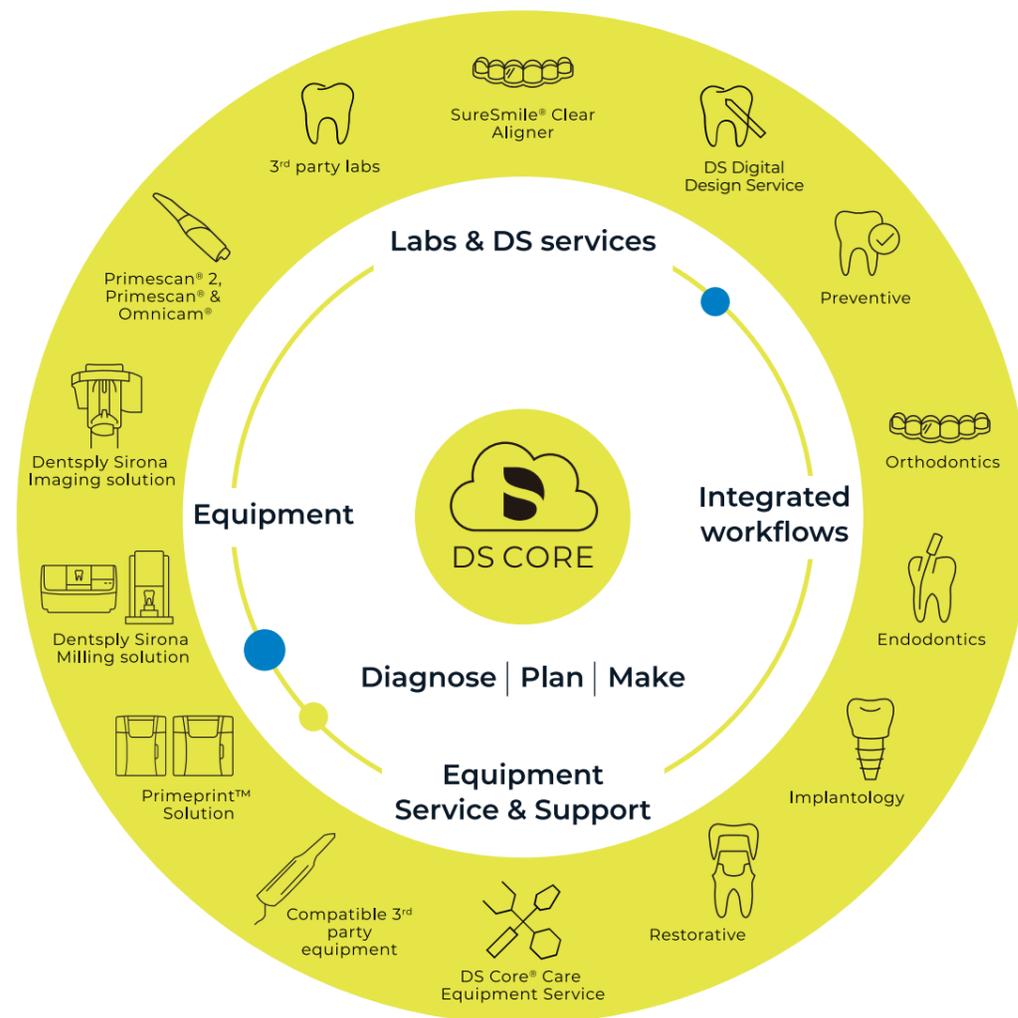

DS Coreで広がるデジタルデンティストリーの可能性

メディアライブラリとコラボレーション

- ・患者メディアを一元管理
- ・専門家との安全な共有と連携
- ・GDPR/HIPAAに準拠したコンプライアンス対応をサポート

機器・ソフトウェア統合

- ・口腔内スキャナー、デジタルX線、ミリング、プリンティングソリューションを統合
- ・ワークフローの効率性と柔軟性を向上
- ・Core Careによる技術サポートの強化

コミュニケーションキャンパス

- ・患者メディアを整理・表示し、効果的なコミュニケーションを支援
- ・診療後にファイルを患者と共有可能
- ・患者とのエンゲージメント維持に配慮

SureSmile®シミュレーター

- ・アライナー治療前に患者の新しい笑顔をプレビュー
- ・DS CoreとPrimescanを活用したチェアサイド3Dビジュアライゼーション
- ・シミュレーションを簡単に患者と共有可能

オーダー&コラボレーションソリューション

- ・ラボやサービスのオーダーを一括管理
- ・ラボや修理サービスとの連携を効率化
- ・メッセージ、承認、デジタルケースファイルを包括



あなただけのAxano Pure ニーズに応じてカスタマイズができます。

本体仕様			
チェア <ul style="list-style-type: none"> ダブルジョイントヘッドレスト プレミアムシート スマートコントロール フットコントローラー 4wayフットスイッチ エルゴモーション 左アームレスト 外部接続用バルブセット 	ドクターユニット <ul style="list-style-type: none"> スライディングトラック スマートタッチ ユーザーインターフェース インストルメントホルダー (6ハンガー) シリンジ：スプレービットM X1 切削回路：タービン X1、モーター X2 超音波スケーラー：シロソニックTL シビジョンレディ シリコンマット 	アシスタントユニット <ul style="list-style-type: none"> インストルメントホルダー (4ハンガー) シリンジ：スプレービットM X1 吸引回路：バキューム X1、排唾管 X1 シリコンマット 無影灯 <ul style="list-style-type: none"> 無影灯LEDビュープラス 	ウォーターユニット <ul style="list-style-type: none"> オートマチックセパレーター コップ自動給水 ガラス製カスピドボウル マニュアル旋回式 サクシオンホース自動洗浄機能 清浄水供給システム 洗浄剤添加機能 パージ/オートパージ/サニテーション機能
パッケージ			
エンドパッケージ (標準仕様) <ul style="list-style-type: none"> 歯内療法機能 (レシプロケーティング機能含む) アベックスロケーター (根管長測定器) アベックスロケーター用ホルダー T1ライン エンド6Lコントラアングル ハンドピース 	インプラントパッケージ (オプション) <ul style="list-style-type: none"> インプラント機能 生理食塩水供給装置 BLE インプラントモーター (ライト/ホース付) 	シビジョンパッケージ (オプション) <ul style="list-style-type: none"> 22インチモニター カメラサブライキット 口腔内カメラ：シロカムAF/AF+ モニター取付方法選択可能 トレイ取付型 (トレイ付) 無影灯ポール取付型 	



アベックスロケーター



生理食塩水供給装置



SmartLite Pro用ホルダー



Primescan 2用ホルダー



SiroCam シロカムAF/AF+ 外付けハンガーホルダー



22インチモニター



スマートデバイスホルダー



パノラマX-rayビューワー



右アームレスト (旋回式)



ワーキングスツール

オプション



スタンダードユニット標準装備とオプション製品のリストです。

チェア用オプション		アシスタントユニットオプション	
患者用チェアポジション自動設定*	■	インストルメントホルダー (4ハンガー)	■
モータードライブ ヘッドレスト	□	スプレービットM 左水 (ライト付)	■
プレミアムシート	■	スプレービットM 右水 (ライト付)	□
ステッチ入りラウンジシート	□	バキューム	■
エルゴモーション	■	排唾管	■
チェアスピードコントロール	■	追加サージカルサクシオン	□
スマートコントロール (無線) フットコントローラー	■	第2バキューム	□
クラシック フットコントローラー	□	SmartLite Pro用ホルダー	□
スマートコントロール 有線ケーブル	□	12V電源	□
4wayフットスイッチ	■	ウォーターユニットオプション	
左アームレスト	■	ガラス製カスピドボウル マニュアル旋回式	■
右アームレスト (旋回式)	□	オートコック (自動給水機能)	■
外部接続用バルブセット	■	サクシオンホース自動洗浄機能	■
アダプタープレート	■	清浄水供給システム	■
小児用シートクッション	□	バキューム洗浄剤添加機能	■
リモートジャンクションボックス	□	ハイジーンシステム (パージ/オートパージ/サニテーション)	■
カバーインсталレーションキット	□	着脱式ハイジーンカートリッジ	■
		オートマチックセパレーター	■
		アマルガムセパレーター	□
ドクターユニットオプション		シビジョン/トレイシステム/無影灯オプション	
スライディングトラック	■	口腔内カメラ シロカムAF+/AF (ドクターユニット)	□
スマートタッチ ユーザーインターフェース	■	カメラサブライキット (ドクターユニット)	□
インストルメントホルダー (6ハンガー)	■	外付けカメラホルダー (ドクターユニット)	□
スプレービットM 左水 (ライト付)	■	USBインターフェース (ドクターユニット)	□
スプレービットM 右水 (ライト付)	□	22インチモニター トレイ用アーム取付型 (トレイ付)	□
第1切削回路ドライブ (タービン、モーター用)	■	22インチモニター 無影灯ポール取付型	□
第2切削回路ドライブ (タービン、モーター用)	■	PC接続用ケーブル	□
第3切削回路ドライブ (タービン、モーター用)	■	クリップオントレー	□
BL ISO F モーター (ライト付)	■	LEDビュープラス ユニット組込型	■
BLE インプラントモーター (ライト付)	□	LEDビュープラス 天井固定型	□
タービン (シロナカップリング、ホース、ライト付)	■	スツール Hugo	
超音波スケーラーシロソニックTL (ライト付)	■	フリーハンド (高さ調節: フットリリース)	□
歯内療法機能 (レシプロケーティング機能付)	■	マニュアルプラス (高さ調節: マニュアル、フットリング付)	□
アベックスロケーター	■	マニュアル (高さ調節: マニュアル)	□
インプラント機能	□	スツール Theo	
生理食塩水供給装置	□	プレミアムシート	□
スマートデバイスホルダー	□	ラウンジシート	□
パノラマX-rayビューワー	□	スツール Carl	
Primescan 2用ホルダー	□	マニュアルプラス (高さ調節: マニュアル、フットリング付)	□
		マニュアル (高さ調節: マニュアル)	□
		スツール Paul	
		マニュアルプラス (高さ調節: マニュアル、フットリング付)	□
		マニュアル (高さ調節: マニュアル)	□

*SIDEXIS 4で使用可能

■ 標準仕様 □ オプション

Axano Pure 寸法図

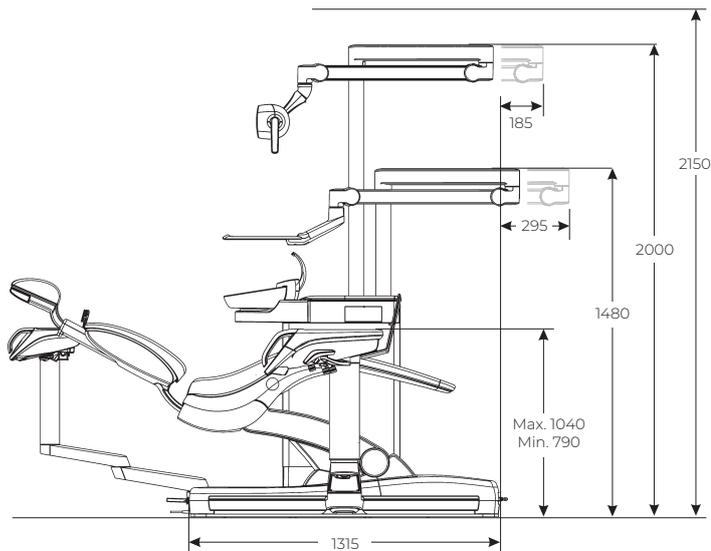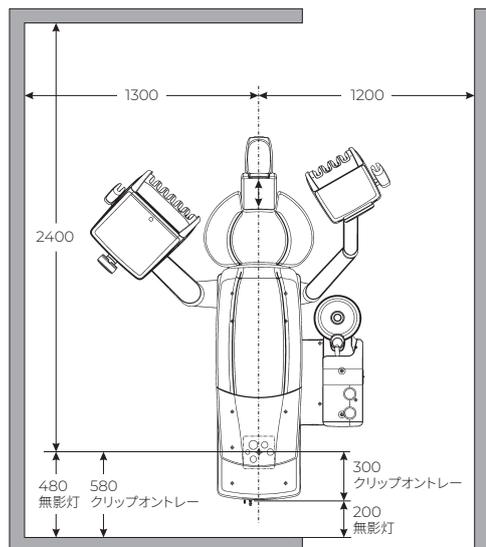

販売名:トリートメントセンター Axano 一般的名称:歯科用ユニット(歯科用根管長測定器) 認証番号:304AABZX00055000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留濱離宮ビル5F

カスタマーサービスホットライン 0120-667-467

www.dentsplysirona.com

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。