

# ストレートハンドピース

## T1ライン H40L

- 3年保証
- ライト、注水機能付

## T2ライン AH40L

- 2年保証
- ライト、注水機能付

## T3ライン EH40

- 1年保証
- ライト無し、注水機能付

※ノーマルタイプ/ショートタイプ、双方のISO規格モーターで使用可能：  
H40L, AH40L：ライト付モーター  
EH40：ライト無モーター



## T1ライン特殊用途コントラ - 形態修正用、根管治療用



補綴物の適合に大敵な、回転式ハンドピースによる隅角部の突起。

### EVA 04L/11L

マイクロプレパレーション、形態修正用

デンタス社のラミニアチップの前後運動により、切削溝や粗面を作ることなく平滑な面に研磨、仕上げが可能。

下記用途例：


- 凸面のち密な形態修正
- バリの除去
- 軸面の形態修正
- 余剰セメントの除去

EVA04L：ストローク0.4mm

EVA11L：ストローク1.1mm

- 3年保証

「EVAコントラの有用性」  
公開中

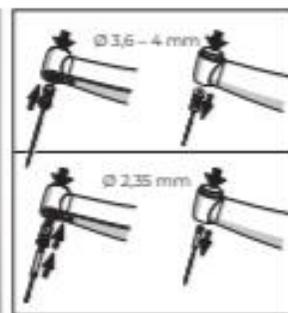

### エンドL

根管治療用

ダブルチャックシステムの採用により手用ファイル（手持部分直径3.6~4.0mm）もエンジン用ファイル（ヘッド部直径2.35mm）も使用可能な2-in-1タイプのハンドピース。

術者の指先の動きを再現する左右30°ずつ、計60°のツイスト運動。ステンレスファイル専用。

※ニッケルチタンファイルは使用不可

- 3年保証