

# DS Core への移行のご案内

Connect Case Center は 2025年11月15日をもってサービスを終了いたします。

これにより、Connect Case Center 上で新しいオーダーを作成したり、既存のオーダーを閲覧したり、ラボとのチャットやコミュニケーションを行うことはできなくなります。

DS Core では、ラボへのスキャン送信、各種アプリケーションでのオーダー作成、場所や相手を問わないコラボレーションが可能です。

Connect Case Center と同等のご利用については、「DS Core Access」を追加費用なくご利用いただけます。

## 移行にあたってのポイント

DS Core では幅広い機能をご利用いただけます。ご利用環境に応じてプランをお選びください。

	Light	Standard	Advanced	Access Connect Case Center からの切り替え
<b>General Features</b>				
オンラインメディアライブラリ & データ共有機能	1 TB	6 TB	15 TB	最大30日間の一時的利用 <sup>6</sup> ファイル共有オプションなし
Canvas機能	✓	✓	✓	×
Cloud上での直接スキャン <sup>1</sup>	✓	✓	✓	×
口腔内データの自動アップロード <sup>2</sup>	✓	✓	✓	✓
新規 & 既存のX線データの自動アップロード <sup>2</sup>	✓	✓	✓	新規X線データの自動アップロード
DS イメージングソリューション用の主要ストレージ	×	✓	✓	×
<b>Plan Features</b>				
治療ワークスペース	✓	✓	✓	✓
SureSmile® シミュレーター	✓	✓	✓	×
CEREC ソフトウェアとDS Core の連携 <sup>3</sup>	✓	✓	✓	×
<b>Make Features</b>				
オーダー	✓	✓	✓	✓
製造 <sup>4</sup>	×	✓	✓	×
¥ / 月	¥ 2,599 トライアルオプション利用可能 <sup>5</sup>	¥ 12,999	¥ 29,999	無償利用可

DS Core の詳細はこちら [dentsplysirona.com/dscore](https://dentsplysirona.com/dscore)

## DS Core スタートアップガイド

- 1 **作成** DS Core でクリニック用アカウントを作成
- 2 **接続** 機器を接続し、口腔内スキャンの自動アップロードを利用
- 3 **追加** 取引先ラボを追加

<https://r5.dscore.com/#/login>

ラボがデータを受け取るには「DS Core Access for Labs」アカウントのみが必要です。Connect Case Center と同様に、ライセンスは不要です。データ転送は、いずれの種類の DS Core アカウントでも可能です。

DS Core への切り替えに関する詳細はこちら [dentsplysirona.com/switch-to-dscore](https://dentsplysirona.com/switch-to-dscore)

## ご利用開始に関するサポートについては、お問い合わせください。

### すぐに使えるサポート機能

チュートリアル動画、FAQ、クイックガイドなどの情報を、必要なときに一か所でご確認いただけます。

[カスタマーサポートポータル](#)

### カスタマーホットライン

サポートおよびカスタマーサクセスチームが、お客様からのご質問に対応いたします。

0120-667-467

受付時間：月～金 9:00～18:00

1 利用には Primescan 2 が必要です。地域での提供状況をご確認ください。2 自動アップロードには Connect/CEREC SW 5.2.3 以降および Sidexis 4 V4.3.1 以降が必要です。最適なパフォーマンスとアップロード機能をご利用いただくために、Connect 5.2.9、CEREC SW 5.3.3、Sidexis 4 V4.4 の使用を推奨します。3 CEREC 5.3.1 以降で動作します。4 DS Core に接続された inLab CAM SW が必要です。5 DS Core Light の全機能を、購読開始前に 3 か月間お試しください。初回支払いが発生する前の 3 か月以内であれば、いつでも解約可能です。解約時には、その理由に関するフィードバックをお願いする場合があります。6 DS Core Access は一時的なファイル保存のみを提供します。アップロードしたファイルは、オーダーに使用されない場合 30 日後に削除されます。オーダーに含まれるファイルは、オーダー完了後 30 日で削除されます。

# DS Core でのワークフロー

## 補綴

リンクをクリックして、全体のワークフローをご確認ください  
※リンク先の内容には日本未発売の情報も含まれます



### ステップ ① スキャンケースを設定する

患者を選択し、治療を作成・定義する。  
使用するスキャナーを選択する。




### ステップ ② 患者さんをスキャンする

DS Core ( [🔗 Primescan 2](#) ) で直接スキャンするか、Connect SW ( [🔗 Primescan AC](#) ) でスキャンすると、自動的に DS Core にアップロードされます。



### ステップ ③ スキャンデータを確認する

🔗 [確認](#) DS Core で自動的に描画された支台歯マージンやモデル軸を確認し、必要に応じて修正・確定します。

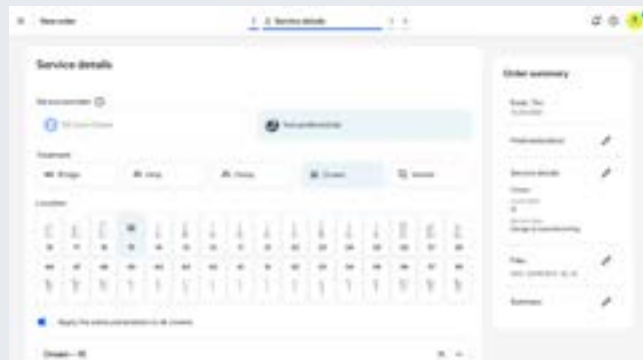

### ステップ ④ ラボに発注する

🔗 [発注](#) ダッシュボードからオーダーの進捗状況を確認でき、チャット機能を使ってラボとやり取りすることも可能です。

詳細はこちら [🔗 補綴ワークフロー](#)

## インプラント

DS Core上のデータをシムプラントポータルサイト及びアトランティスウェブオーダー (AWO) に送信できます。そのままシムプラントプランニングサブス (SPS) 及びAtlantisアバットメントのオーダーを開始できます。その後はそれぞれ既存のワークフローに従って発注に進みます。

詳細はこちら [🔗 インプラントワークフロー\(Atlantis アバットメント\)](#)

詳細はこちら [🔗 インプラントワークフロー\(シムプラントプランニングサービス\)](#)

## SureSmile

SureSmile 治療のために、アライナーを選択して、顎の選択や歯の詳細などの処方内容を入力します。入力したあとに、送信するとSureSmile アライナープラットフォームで進捗状況を確認でき、チャット機能を使って製造のデジタルラボとやり取りをすることができます。

詳細はこちら [🔗 SureSmile ワークフロー](#)

一般的名称: デジタル印象採得装置 販売名: プライムスキャン2 承認番号: 30600BZX00198000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売元:  
デンツプライシロナ株式会社  
〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5F  
カスタマーサービスホットライン: 0120-667-467



MRK0400000045\_202509\_M088