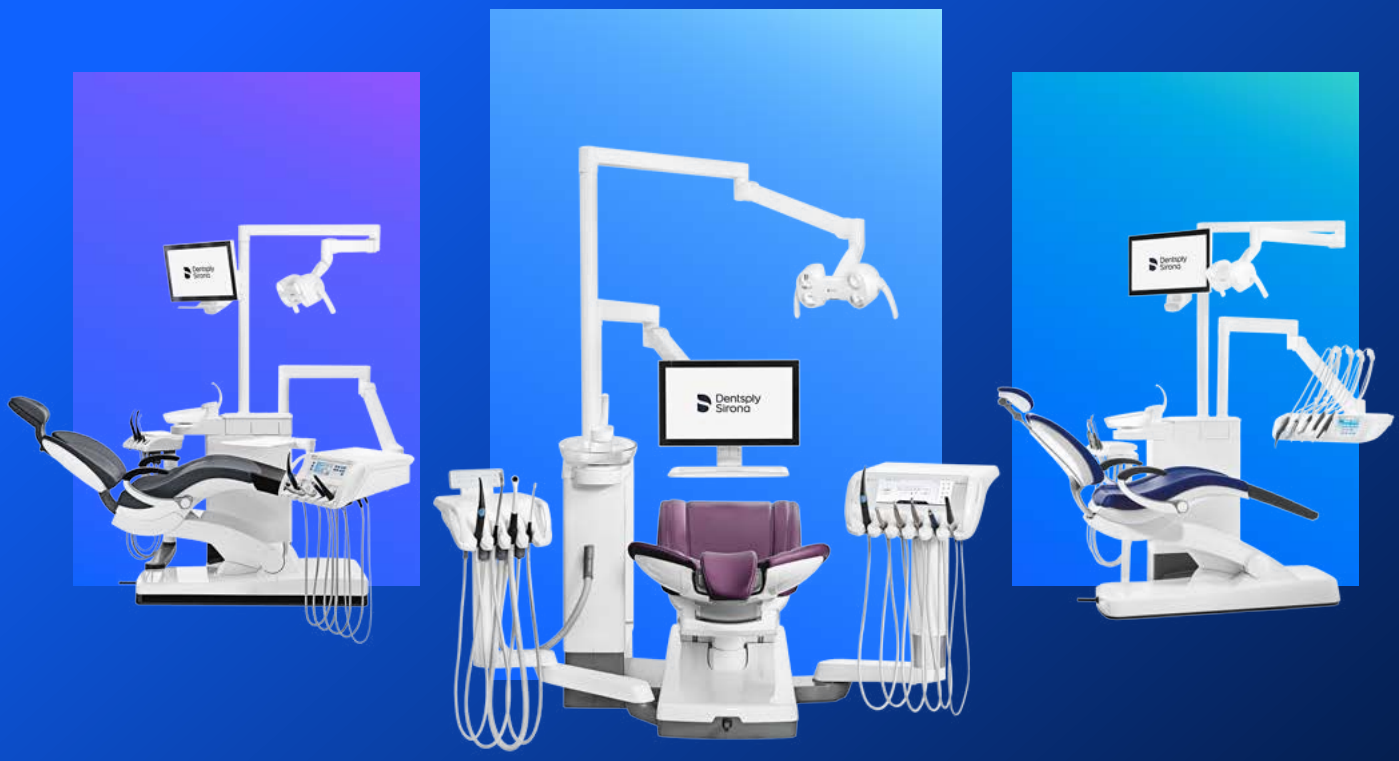


SEIEN SIE ENDO*VIDUELL*

Effizienz in der Endodontie

Warum integrierte Lösungen die Zukunft sind und wie Sie von integrierten Therapiefunktionen profitieren können.

Dentsply Sirona

Interview mit Thomas Senghaas



Thomas Senghaas ist Zahnarzt in Hamburg und Spezialist für Endodontie und Implantologie. Seit 2002 betreibt er gemeinsam mit Dr. Katayoun Nadjmabadi eine moderne, patientenorientierte Gemeinschaftspraxis.

Herr Senghaas, wie wichtig ist die Endodontie für Ihre Praxis?

Senghaas: Für mich ist die Endodontie ein entscheidender Faktor – sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg als auch für die Bindung meiner Patienten. Eine erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung schafft Vertrauen. Patienten, deren Zähne erhalten geblieben sind, sind dankbar und bleiben langfristig treu. Deshalb lege ich großen Wert auf effiziente Prozesse, die auch eine Behandlung von höchster Qualität ermöglichen.

Wie unterstützt Sie Ihre Behandlungseinheit dabei konkret?

Senghaas: Mit meiner Behandlungseinheit kann ich alle einfachen bis sehr anspruchsvollen endodontischen Fälle zuverlässig behandeln – in jeder Phase. Besonders hilfreich ist der schnelle Wechsel zum Endo-Dialog ohne zusätzlichen Fußschalter und überflüssige Umrüstzeiten. Wenn spontan eine endodontische Behandlung erforderlich ist, kann ich sofort loslegen. Ein Klick genügt und meine Einheit ist als vollwertige Endodontieeinheit einsatzbereit.

Welche Rolle spielt dabei die Patientenkommunikation?

Senghaas: Eine sehr große. Die integrierten Lösungen helfen mir, Diagnosen und Behandlungsschritte verständlich zu erklären. Das verbessert nicht nur die Compliance, sondern erleichtert den Patienten auch die Entscheidungsfindung. Wenn Patienten verstehen, warum eine Behandlung sinnvoll ist, steigt ihre Akzeptanz enorm.

Wie wirkt sich die Integration auf Ihren Arbeitsablauf und die Ergonomie aus?

Senghaas: Durch die Kombination aus anpassbarer Workflow-Linie, Fußsteuerung und motorisierter Kopfstütze kann ich während der gesamten Behandlung meine Hände am Patienten lassen. Das verhindert unnötige Unterbrechungen und ermöglicht einen kontinuierlichen Behandlungsablauf. Gleichzeitig schont die korrekte Patientenpositionierung meinen Rücken, was in meiner täglichen Arbeit ein echter Vorteil ist – insbesondere bei längeren Eingriffen.

Welche technischen Features schätzen Sie besonders?

Senghaas: Zum Beispiel die Möglichkeit, verschiedene Feilenabfolgen individuell zu speichern und bei Bedarf direkt aufzurufen. Rotierende und oszillierende Feilen lassen sich flexibel kombinieren. Der Apex-Locator überwacht die Arbeitslänge während der gesamten Aufbereitung und die Drehmomentkontrolle reduziert das Risiko von Instrumentenbrüchen. All das gibt mir Sicherheit und ermöglicht einen effizienten Arbeitsablauf.

Was bedeutet das für Ihre Patienten?

Senghaas: Für die Patienten in meiner Praxis ist es am wichtigsten, dass die Behandlung schnell, sicher und so angenehm wie möglich ist. Mit dem integrierten Arbeitsablauf kann ich viele Fälle in einer einzigen Sitzung abschließen.

Das verkürzt die Behandlungszeit erheblich und reduziert den Stress für den Patienten. Am Ende sind alle zufrieden: die Patienten, weil sie ihre Zähne behalten können und die Behandlung schneller vorbei ist – und ich, weil die Abläufe zuverlässig und effizient sind.

Warum Dentsply Sirona?

Senghaas: Für mich war ausschlaggebend, dass Dentsply Sirona ein umfassendes Konzept bietet: Alles ist aufeinander abgestimmt, von der Behandlungseinheit über Endodontie-Instrumente bis hin zu Bildgebungs- und Hygienelösungen.

Das erleichtert mir die tägliche Arbeit erheblich. Gleichzeitig weiß ich, dass ich mich auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte verlassen kann. All dies vereinfacht die Endodontie und ist für mich unverzichtbar geworden.

Die integrierte Endodontie und die damit einhergehende Optimierung der Prozesse machen meine Praxis rentabel, da ich mehr Behandlungen mit zuverlässigem Workflow in derselben Zeit durchführen kann.

Zusammenfassung

Endodontische Behandlungen gehören zu den anspruchsvollsten Aufgaben in der Zahnmedizin. Sie sind für Patienten oft mit Ängsten verbunden und stellen Praxen vor organisatorische Herausforderungen. Gleichzeitig sind sie ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Praxis: Erfolgreiche Wurzelkanalbehandlungen sichern die Patientenbindung und schaffen Vertrauen.

Dieses Whitepaper soll zeigen, wie integrierte Lösungen den Praxisalltag für Zahnärzte, Teams und Patienten deutlich verbessern können.

Integrierte Theraphiefunktion Endo eröffnet neue Möglichkeiten:

- **Effizienz**
  durch individuelle Arbeitsabläufe.
- **Komfort**
  für Patienten dank kürzerer Behandlungszeiten und bequemer Patienten-Lagerung.
- **Flexibilität**
  für Zahnärzte und Teams durch präzise, integrierte Systeme.
- **Zukunftssicher**
  dank Aufrüstbarkeit und digitaler Vernetzung.

> Die Endodontie ist ein entscheidender Faktor – sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg als auch für die Patientenbindung.
>
> Thomas Senghaas

Die Herausforderung in der Endodontie

Wahrgenommene Schwerpunkte aus unterschiedlichen Perspektiven:



Patientenperspektive

Angst vor Schmerzen, langen Behandlungen, unklaren Verfahren.



Tägliche Praxis

Mehrere einzelne Geräte mit Kabeln und Schläuchen stören nicht nur den Arbeitsablauf, sondern verursachen auch zusätzlichen organisatorischen Aufwand.



Klinische Perspektive

Wenn mobile Tischgeräte belegt sind, kommt es zu Unterbrechungen und Engpässen.



Ergonomie

Lange Behandlungen belasten den Rücken und Nacken der Behandler.

> Integrierte Endodontie-Funktionen sind der Schlüssel zu mehr Effizienz, höheren Einnahmen und zufriedeneren Patienten.
>
> Thomas Senghaas

Die Lösung: Integrierte Endodontie


Anstelle zahlreicher externer Geräte, integriert ein modernes Behandlungssystem die relevanten endodontischen Funktionen direkt in die Behandlungseinheit.

> Solange meine Hände am Patienten bleiben, wird mein Arbeitsablauf nicht unterbrochen.
>
> **Thomas Senghaas**




Schneller Start

Keine zusätzliche Verkabelung oder Vorbereitung erforderlich.

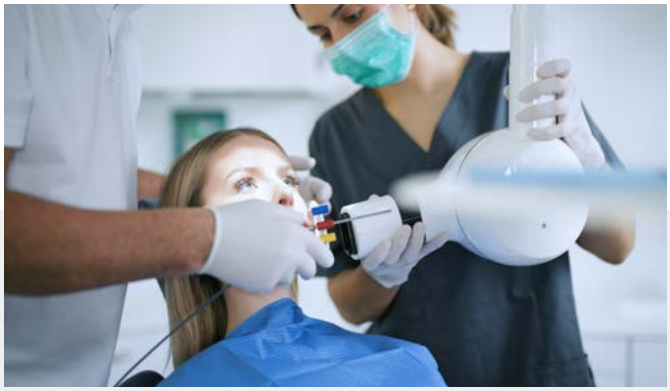

Hohe Flexibilität

Beginnen Sie unerwartete Behandlungen sofort.

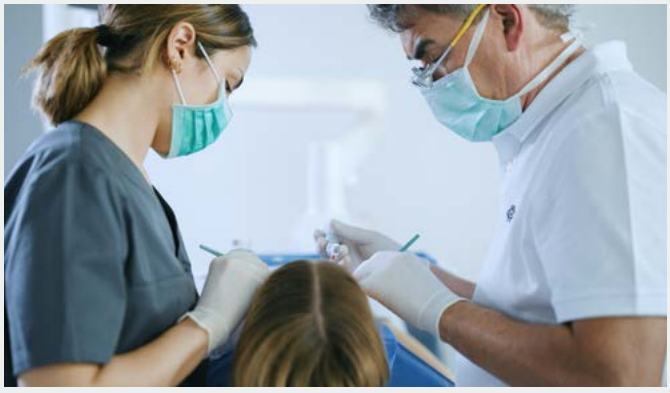

Nahtloser Workflow

Die endodontische Behandlung beginnt per Knopfdruck.



Übersicht & Organisation

Keine zusätzlichen Ausstattungen, aufgeräumter Behandlungsraum.

Klinische Vorteile im Endo-Workflow

Endodontische Behandlungen erfordern präzise und effiziente Arbeitsabläufe. Jeder Arbeitsstil ist so individuell wie der Behandler selbst.

Aus diesem Grund entwickelt Dentsply Sirona Behandlungseinheiten, die integrierte endodontische Arbeitsabläufe auf Knopfdruck ermöglichen. Ergänzt durch hochwertige Winkelstücke, patentierte Feilensysteme und moderne Bildgebungslösungen schaffen diese Einheiten eine Arbeitsumgebung, die Kontrolle, Effizienz und Flexibilität vereint – und so zu hochwertigen klinischen Ergebnissen beiträgt.


- Integrierter Apex-Locator
- Individuelle Workflow-Line
- Patentierte Feilensysteme
- Drehmomentkontrolle
- Motorische Kopfstütze
- Optimierter Patientenzugang




Präzision: Integrierter Apex-Locator wird auf dem Sivision-Monitor angezeigt und zusätzliche Tiefenanzeige über Lichtsignale am Instrument.



Qualität: Ein hochwertiges und patentiertes Feilensystem in einer integrierten Datenbank.

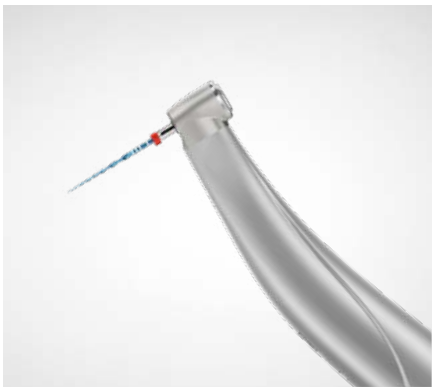

Sicherheit: Einstellbare Wurzelkanalkomplexität, echte rotierende und reziproke Bewegung sowie Drehmomentkontrolle schützen die Instrumente und reduzieren das Feilenbruchrisiko.

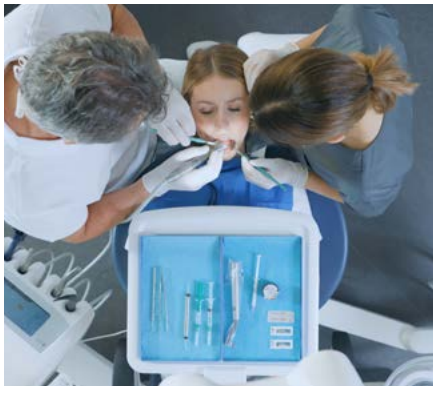

Effizienz: Weniger Unterbrechungen, kontinuierliche Behandlung von der Vorbereitung des Wurzelkanalzugangs bis zur endgültigen Restauration.



Patientenzufriedenheit: Kürzere Behandlungen schaffen Vertrauen und erhöhen die Akzeptanz.



Ergonomie: Motorische Kopfstütze und voreingestellte Positionen entlasten den Rücken – auch bei langen Eingriffen.

Team & Praxisorganisation

Ein integrierter endodontischer Arbeitsablauf trägt nicht nur zur Entlastung des Behandlers bei, sondern auch zur Entlastung des gesamten Praxisteams. Automatisierte Hygienefunktionen, weniger Geräte im Behandlungsraum und klar strukturierte Abläufe sparen wertvolle Zeit und reduzieren den organisatorischen Aufwand. So profitieren Assistenz, Praxismanagement und Praxen gleichermaßen von effizienten Abläufen, hoher Zuverlässigkeit und niedrigen Betriebskosten.

Für das Praxisteam

- Automatische Desinfektion und einfache Reinigung sparen Zeit.
- Weniger Geräte im Behandlungsraum erleichtern die Arbeit.
- Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht ein schnelles und einfaches Umschalten auf endodontische Funktionen.




Für die Praxisorganisation

- Hohe Effizienz dank kürzerer Behandlungszeiten.
- Mehr Patienten pro Tag möglich.
- Hygienestandards werden zuverlässig eingehalten.



Für Zahnarztpraxen

- Standardisierte Prozesse erhöhen die Zuverlässigkeit.
- Einfach zu bedienen.
- Doppelte Belegung einzelner Geräte wird vermieden.

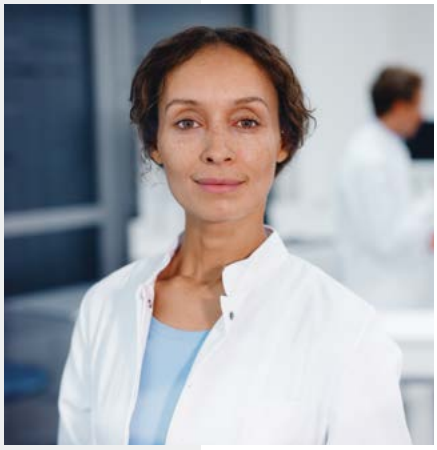

Eine zukunftssichere Investition?

Mit einer Behandlungseinheit und integrierten Therapiefunktionen Endo von Dentsply Sirona sind Praxen in der Lage, sich den Herausforderungen von morgen zu stellen:

1 Upgrades

Regelmäßige Software-Updates sowie einfache Nachrüstbarkeit.

2 Zukunftsfähige Lösung

Ein System, das über Jahre hinweg zuverlässig funktioniert und durch mit Software-Updates mit Ihnen wächst.

3 Digitale Integration

Nahtlose Integration von Patientendaten, Röntgenbildern und Kommunikation.

4 Kompatibel mit DS Core

Verwenden Sie DS Core, um auf relevante Patienteninformationen und Diagnosen zuzugreifen und diese dann auf dem Sivision-Monitor Ihrer Behandlungseinheit anzuzeigen.

Integrierte Lösungen sorgen für Effizienz, Komfort und Sicherheit.

Für **Zahnärzte** bedeutet dies weniger Stress, bessere Ergebnisse und zufriedenere Patienten.

Für **Praxen** bedeutet dies standardisierte Prozesse, wirtschaftliche Vorteile und Investitionssicherheit.

Ihr nächster Schritt

IHRE INDIVIDUELLE PRODUKTBERATUNG



Jetzt Termin vereinbaren

Dentsply Sirona

SIRONA Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
dentsplysirona.com

Dentsply Sirona

© 2025 Dentsply Sirona Inc. Alle Rechte vorbehalten. Art.Nr. 9000-26016.1
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.