



Famille de produits

# Postes de traitement





# Nous sommes Dentsply Sirona. Et nous sommes là pour vous.

Nous sommes le plus grand fabricant au monde de produits et de technologies dentaires de haute qualité.

Avec nos partenaires, nous permettons aux dentistes du monde entier de dispenser des soins dentaires de qualité à des millions de patients, pour un sourire en bonne santé. Notre mission est de transformer la dentisterie pour améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde entier et nous sommes fiers d'être un partenaire privilégié pour les cabinets dentaires, les cliniques, les laboratoires dentaires et les distributeurs agréés dans le monde entier.

Et pourtant, chaque relation avec nos clients est une question personnelle. Surtout quand cela concerne nos postes de traitement : **nous sommes le partenaire sur qui vous pouvez compter.**



**16 000** personnes  
dans 40 pays nous  
représentent  
dans plus  
de **120 pays.**

Notre siège  
international  
est situé à  
Charlotte, **aux  
États-Unis**

Nos postes de  
traitement sont  
**fabriqués à  
Bensheim, en  
Allemagne**



Comprendre ce catalogue avec facilité

# Disponibilité

Chaque image de produit comprend une légende avec des abréviations des noms des postes de traitement. Il indique si la fonctionnalité est incluse dans l'unité de base, facultative ou non disponible pour les postes de traitement respectifs. Sur le côté droit, vous trouverez un exemple de légende basée sur l'appui-tête motorisé.

La disponibilité des options et des fonctionnalités peut varier selon les pays.

|                             | Axano | Axano Pure | Sinius | Intego Pro | Intego |
|-----------------------------|-------|------------|--------|------------|--------|
| Inclus dans l'unité de base |       |            |        |            |        |
| En option                   |       |            |        |            |        |
| Non disponible              |       |            |        |            |        |



# Gagner en efficacité grâce à des postes de traitement innovants

Les fauteuils dentaires Dentsply Sirona ne sont pas que des fauteuils dentaires, ce sont des postes de traitement. Ils sont plus que de l'équipement essentiel.

Ils représentent un investissement dans la qualité, la technologie, le confort des patients et des utilisateurs. Avec cet équipement, vous augmentez l'efficacité de votre cabinet dentaire et élargissez les solutions de traitement.


Ils augmentent la visibilité de votre cabinet et ouvrent de nouvelles opportunités de rentabilité. Dentsply Sirona propose trois lignes de produits différentes de fauteuils dentaires: Axano, Sinus et Intego.

Axano



Sinus

Intego

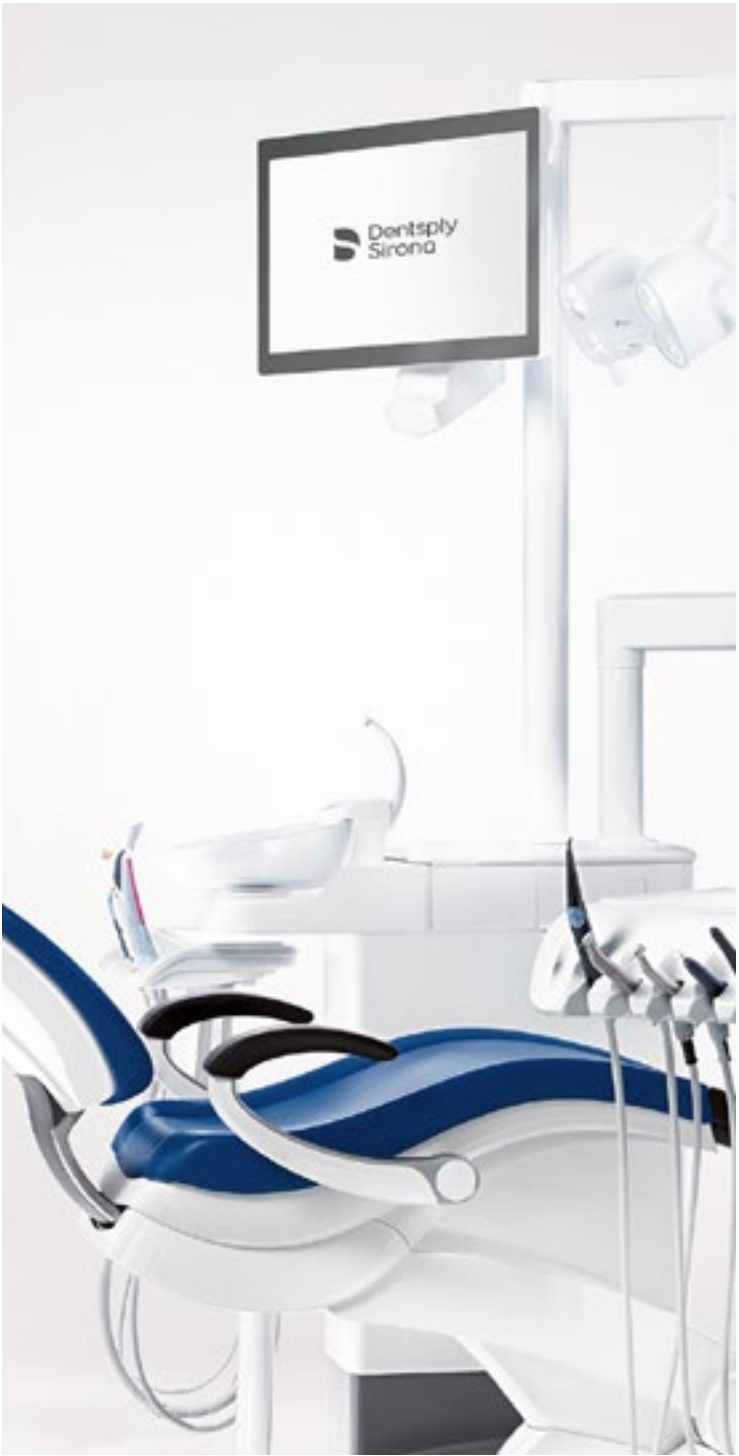



Axano >



Axano Pure >



Sinius/TS/CS >



Intego Pro TS/CS >



Intego TS/CS >

# Axano

## Quand l'innovation reconcontre la fascination

Axano allie innovation, élégance, personnalisation et les avantages d'un poste de traitement moderne adapté à vos besoins.



Axano

Présentation



Cart coulissant motorisé  
6+2 Positions de l'instrument



Appui-tête motorisé



Contrôle intelligent



Fonction de massage  
et support lombaire



Écran tactile intelligent



Fonctions endo intégrées



Moniteur Sivation 22"



SiroCam AF+



DS Core



Dispositif de désinfection  
intégrée



Logiciel de service



LEDview Plus

# Axano Pure

## Faites simplement plus

Avec Axano Pure, une solution intuitive la technologie s'invite en dentisterie.

Aucune formation compliquée n'est nécessaire et ses flux de travail s'adaptent facilement à vos besoins.



# Axano Pure

## Présentation



Cart coulissant manuel  
6+1 Positions de l'instrument



Appui-tête motorisé



Contrôle intelligent



Fonction de soutien  
lombaire



Écran tactile intelligent



Fonctions endo intégrées



Moniteur Sivation 22"



SiroCam AF+



DS Core



Dispositif de désinfection  
intégrée



Logiciel de service



LEDview Plus

# Sinius

## Pensé pour aller plus loin

Le Sinius compact permet non seulement de gagner de l'espace, mais aussi d'être efficace et flexible. C'est un mélange efficace entre un fonctionnement intuitif et de nombreuses fonctions intégrées pour un flux de travail pratique et une vie quotidienne confortable.




Sinius

Présentation



Cart coulissant manuel  
5+1 Positions de l'instrument

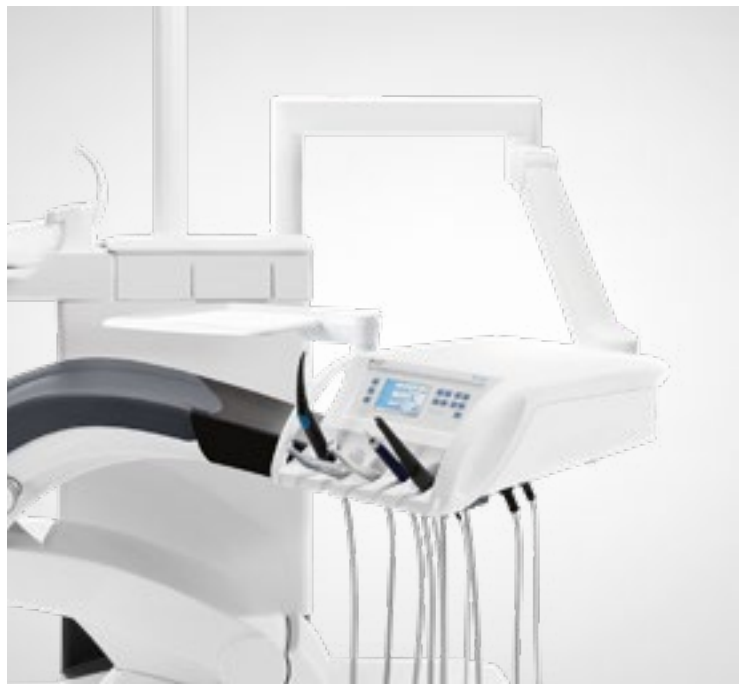

Style traditionnel - TS  
5+1 Positions de l'instrument



Style continental - CS  
5 Positions de l'instrument



Appui-tête motorisé



Contrôle intelligent



Fonction de soutien  
lombaire



Écran EasyTouch



Fonctions endo intégrées



Moniteur Sivation 22"



SiroCam AF+



Dispositif de désinfection  
intégrée



LEDview Plus

# Intego Pro

## Des performances sur lesquelles vous pouvez compter

L'efficacité d'Intego offre fiabilité et qualité. Choisissez entre deux concepts de traitement selon vos habitudes préférées.

Intego Pro est aussi disponible en version ambidextre



# Intego Pro


## Présentation



Style traditionnel - TS  
5+1 Positions de l'instrument



Style continental - CS  
5 Positions de l'instrument

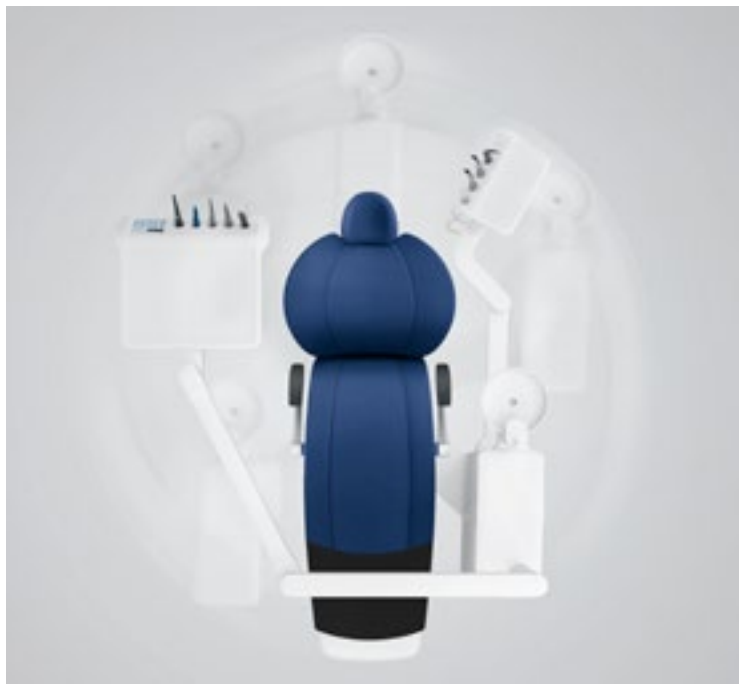

Version ambidextre



Appui-tête double articulation



Pédale de commande électronique sans fil



ErgoMotion



Écran EasyTouch



Fonctions endo intégrées



Moniteur Sivation 22"



SiroCam AF+



Dispositif de désinfection intégrée



LEDview Plus

# Intego

## Des performances sur lesquelles vous pouvez compter

La conception ergonomique offre une qualité élevée pour vous et vos patients. Une bouteille d'eau douce peut être utilisée pour la désinfection continue et permet de se conformer facilement aux réglementations en vigueur.



Intego


Présentation



Style traditionnel - TS  
5+1 Positions de l'instrument



Style continental - CS  
5 Positions de l'instrument

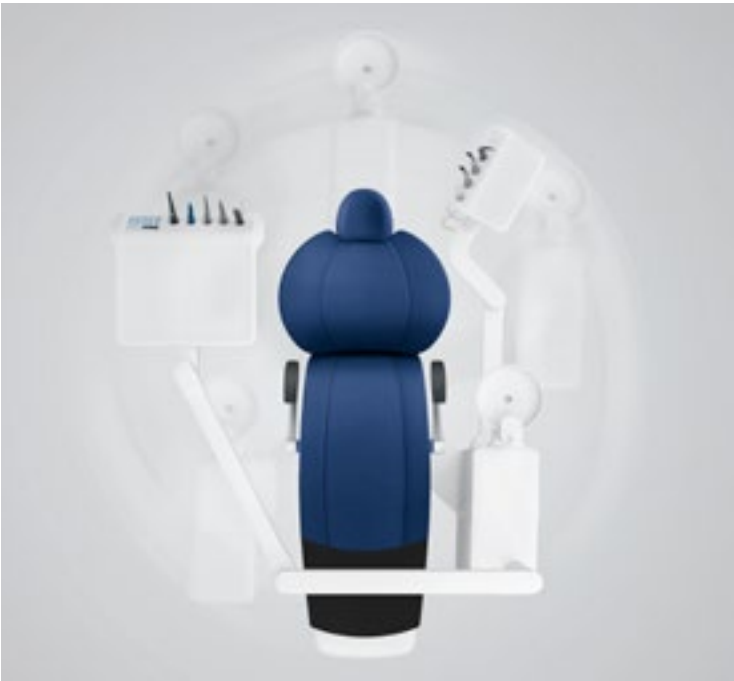

Version ambidextre



Appui-tête double articulation



Contrôle pneumatique du pied



ErgoMotion



EasyPad



Fonctions endo intégrées



Moniteur Sivation 22"



SiroCam AF+



Bouteille d'eau douce



LEDlight Plus



Notre philosophie de conception

# Une harmonie entre esthétique et fonctionnalité

Nous mettons l'accent sur des concepts de design où la forme s'efface au profit de la fonctionnalité, où l'ergonomie va de pair avec l'intelligence et où des normes d'hygiène rigoureuses peuvent être respectées.

Nous allions une grande facilité d'utilisation à des matériaux qui garantissent qualité, durabilité et performance.

Il en résulte des designs intemporels, une esthétique et des fonctionnalités, ainsi qu'un style moderne pour votre cabinet, même après de nombreuses années d'utilisation.



Collection de designs

# Confort et qualité : Vos options de sellerie


Vous avez le choix entre deux types de sellerie pour offrir à vos patients un confort et une relaxation optimale pendant leurs rendez-vous.

Choisissez entre nos options de sellerie Premium et Lounge, toutes deux dotées de matériaux et d'un savoir-faire de qualité.



## Sellerie Lounge

- Un matériau de surface doux et agréable
- Rembourrage confortable
- Couture à contraste attrayante en différentes couleurs
- Conception dynamique avec repose-pieds intégré
- Robuste, facile à nettoyer et à désinfecter

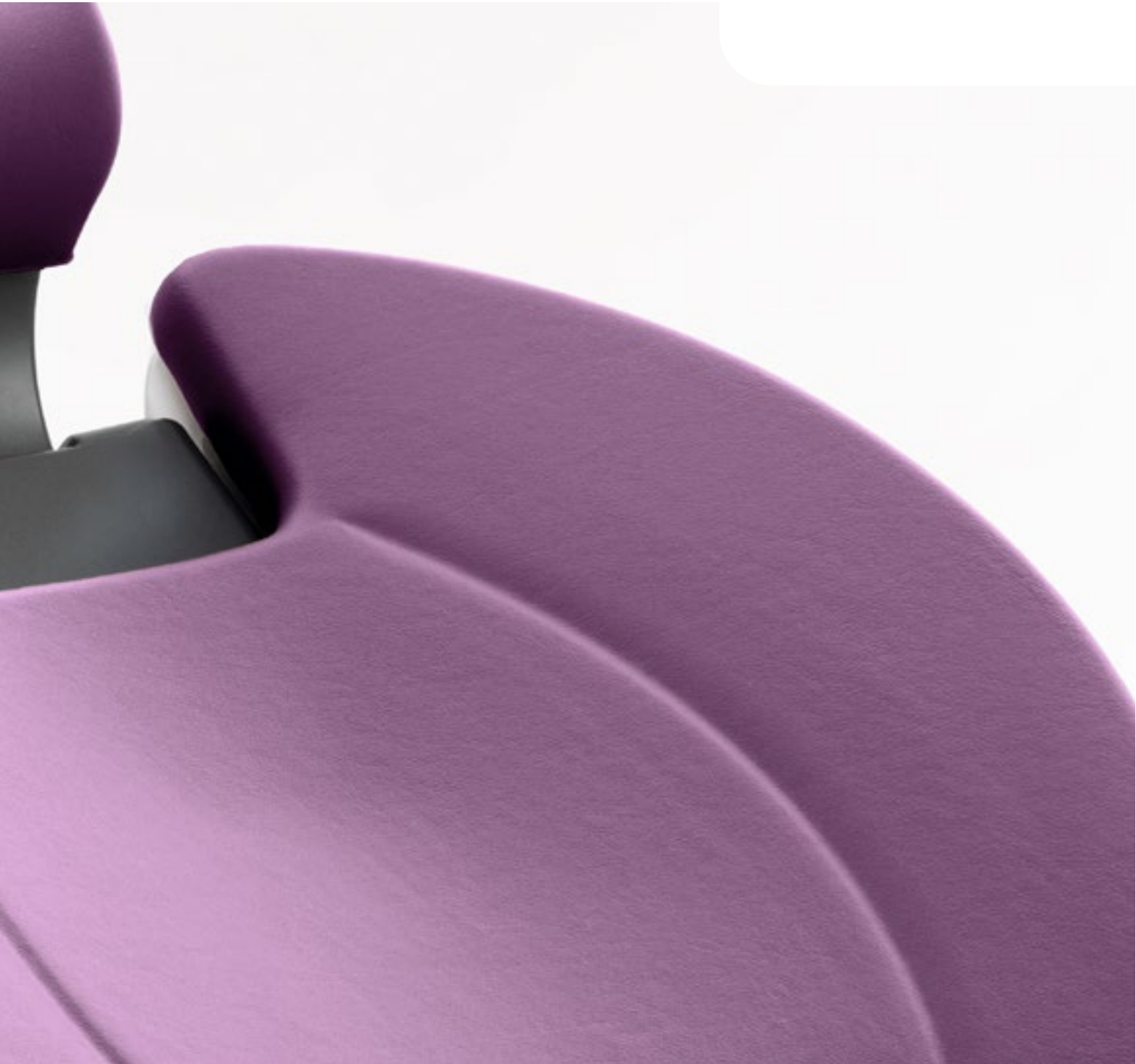

## Sellerie Premium

- Revêtement de haute qualité, sans coutures
- Conception ultra-fine offrant un très grand espace de travail sous le dossier
- Grand confort, même pendant les traitements longs
- Disponible avec un revêtement Thermo\* pour réduire l'accumulation de chaleur au niveau de l'assise et du dossier

\*Inclus dans l'unité de base Axano, en option  
tous les postes de traitement avec un appui-tête motorisé

Collection de designs

Design & Couleurs

Nous avons concentré nos efforts pour garantir que chacun de nos produits soit fabriqué avec un savoir-faire de haute qualité et soit suffisamment robuste pour offrir une bonne durabilité, capable de résister à des années d'utilisation quotidienne.

De plus, vous pouvez choisir parmi différentes couleurs de sellerie. Vous pouvez aussi sélectionner la sellerie Lounge douce et confortable pour garantir un excellent confort à vos patients.

Cette option permet également de personnaliser les choix supplémentaires, comme la sélection des couleurs de couture.

”

DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES  
SIMPLIFIENT LE PROCESSUS DE  
PERSONNALISATION DE VOTRE  
FAUTEUIL DENTAIRE.

Couleurs de sellerie

Le monde élégant




Le monde naturel



Le monde vital



Couleurs de couture

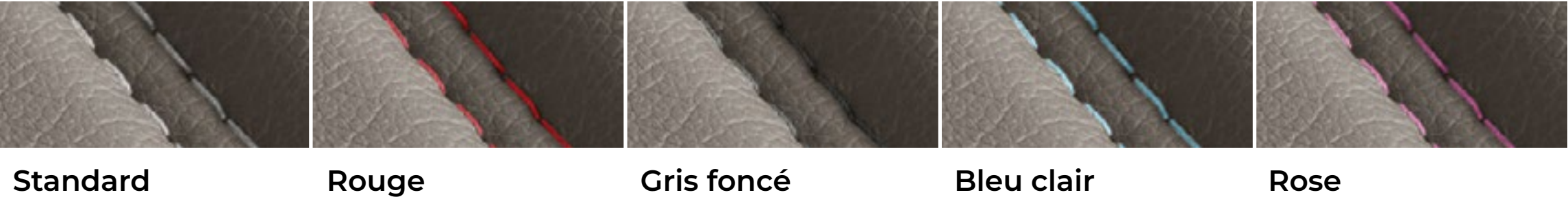

Coussin d'appui-tête brodé à la main

\* Couleurs disponibles pour la sellerie Lounge

\*\* Uniquement disponible pour les appui-tête motorisés

# Caractéristiques

- Ergonomie & Confort >
- Fonctions de traitement, solutions et service >
- Prévention des infections >
- Technologie >

# Ergonomie & Confort

Concepts de traitement >

Appuie-tête >

Positionnement  
vertical de la bouche >

Le concept de division >

Contrôle du pied >

Confort du patient >

Tabourets de travail >





Ergonomie & Confort

# Notre concept ergonomique : un traitement équilibré

L'ergonomie peut être définie comme l'interaction entre l'homme et la machine. Dans votre quotidien professionnel, vous êtes constamment confronté à des situations où cette interaction entre vous et votre équipement est déterminante pour la réussite du traitement ainsi que pour votre santé à long terme.

Le poste de traitement joue un rôle essentiel, car c'est là que vous passez la majeure partie de votre temps. Il est donc primordial qu'il s'adapte de manière optimale à vos besoins.

Les postes de traitement de Dentsply Sirona offrent de nombreuses solutions pour un traitement confortable – **pour les dentistes, les patients et l'équipe.**

Ergonomie & Confort

# Concepts de traitement

Nous offrons un large choix de postes de traitement en fonction des trois principes ergonomiques fondamentaux les plus répandus, dans une gamme bien échelonnée de niveaux de confort et d'intégration.

Chaque concept privilégie un confort optimal et une grande facilité d'utilisation, en fonction de vos habitudes de travail et de la configuration de votre cabinet. Nos versions ambidextres répondent aux exigences ergonomiques des dentistes droitiers et gauchers.

Découvrez ces solutions pour trouver celle qui convient le mieux à votre cabinet et offrir des soins exceptionnels à vos patients.



## Conception du cart coulissant motorisé

- Tous les instruments sont automatiquement mis à votre disposition pour des flux de travail standardisés
- Une utilisation plus simple
- S'adapte automatiquement à la taille de chaque praticien grâce à un système de réglage en hauteur motorisé en option ajustement



## La conception du cart glissant manuel

- Concept de traitement ergonomique
- L'élément praticien peut être facilement déplacé manuellement vers l'avant et vers l'arrière
- Grâce à son élément dentaire pivotant, vous avez tout à portée de main.

Ergonomie & Confort

# Concepts de traitement




## TS – La conception du bras à cordons pendants

- Positionnement ergonomique avec élément praticien amovible et système de plateau
- Grandes zones sur l'élément praticien et le plateau
- Excellent pour un traitement à quatre mains



## CS - La conception à bras articulé avec fouet

- L'élément praticien peut être tourné jusqu'à 240° pour un positionnement optimal
- La distance maximale entre le fauteuil dentaire l'élément et les instruments est de 90cm
- Excellent pour un traitement à deux mains

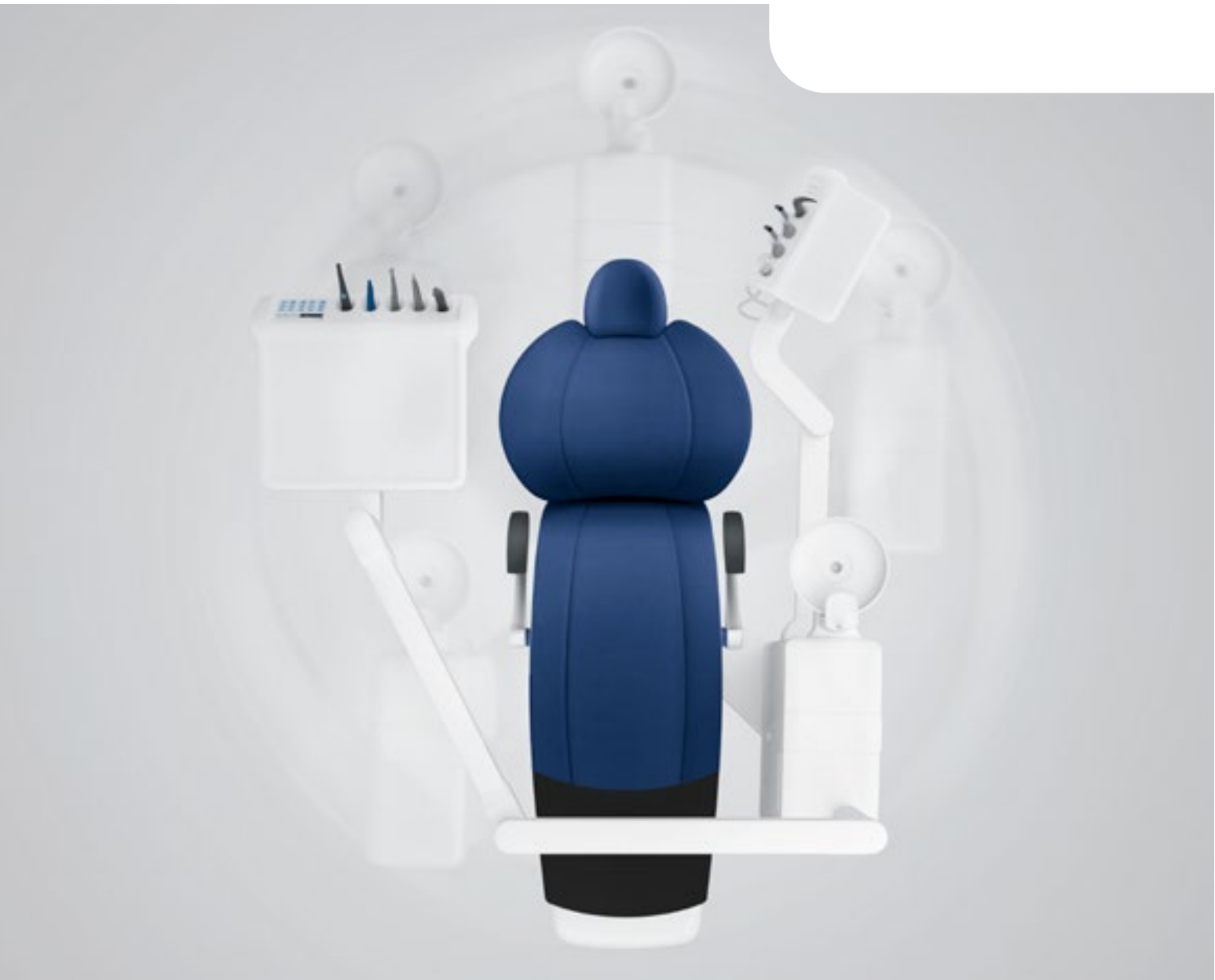

## Ambidextre - Flexibilité

- Conçu pour les dentistes droitiers et gauchers
- Une ergonomie optimale sans compromis en traitement
- Mécanisme de rotation unique
- Convertir d'un droitier à un gaucher en 15 secondes

Appuie-tête

# Confort de traitement et visibilité optimale



## Appui-tête motorisé

- Ajustement confortable via Smart Touch, manuellement via les joysticks au niveau de l'appui-tête ou mains libres grâce au contrôle au pied
- Programmable avec les positions du fauteuil du patient
- Permet le positionnement vertical de la bouche
- Le coussin magnétique permet un positionnement flexible
- Les paramètres individuels des patients peuvent être enregistrés\*



## Appui-tête à double articulation

- Positionnement facile grâce à deux articulations
- Rapidement ajustable aux situations changeantes
- Ajustement facile pour les enfants ainsi que les patients en fauteuil roulant
- Construction métallique stable



## Appui-tête plat


- Le coussin magnétique permet un positionnement flexible
- Réglable pour les patients de différentes tailles

\*nécessite Sidexis 4

Positionnement vertical de la bouche

## La bonne position


Le réglage flexible de la hauteur permet d'obtenir une hauteur de travail optimale grâce à l'alignement vertical de la bouche. Grâce aux positions programmées du fauteuil, la même hauteur de travail est toujours atteinte automatiquement, quelle que soit la taille du patient. Cet ajustement rapide et facile permet de gagner du temps et vous aide à adapter une posture de traitement saine sans y penser.

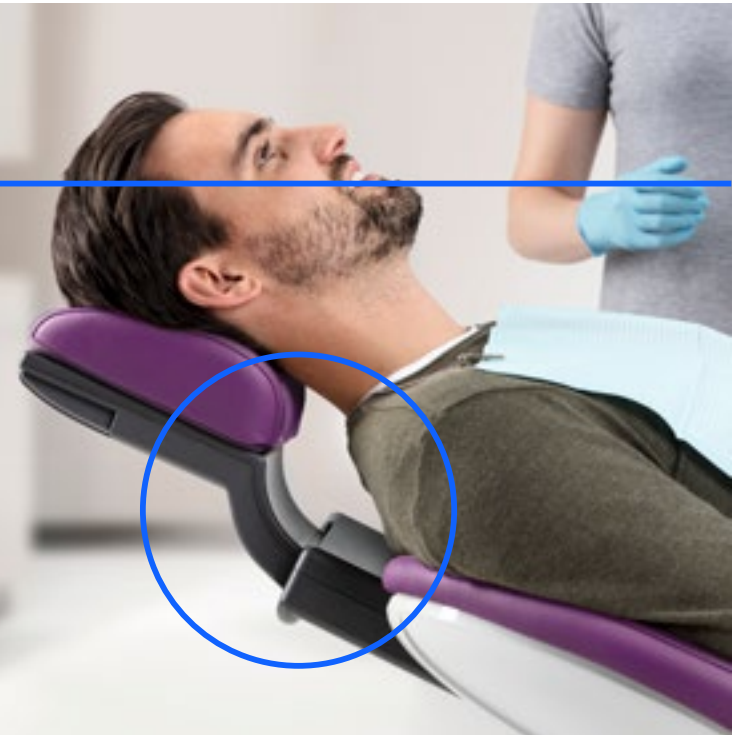

Distances de portée optimales

# Le concept de séparation

Le concept de séparation est une fonctionnalité liée à l'élément coulissant du cart. Le concept de séparation vous permet de positionner l'élément praticien et assistant là où vous et votre équipe en avez besoin. Le plateau peut également être positionné indépendamment de l'élément dentiste pour une ergonomie maximale et une interaction optimale entre le dentiste et l'assistant.

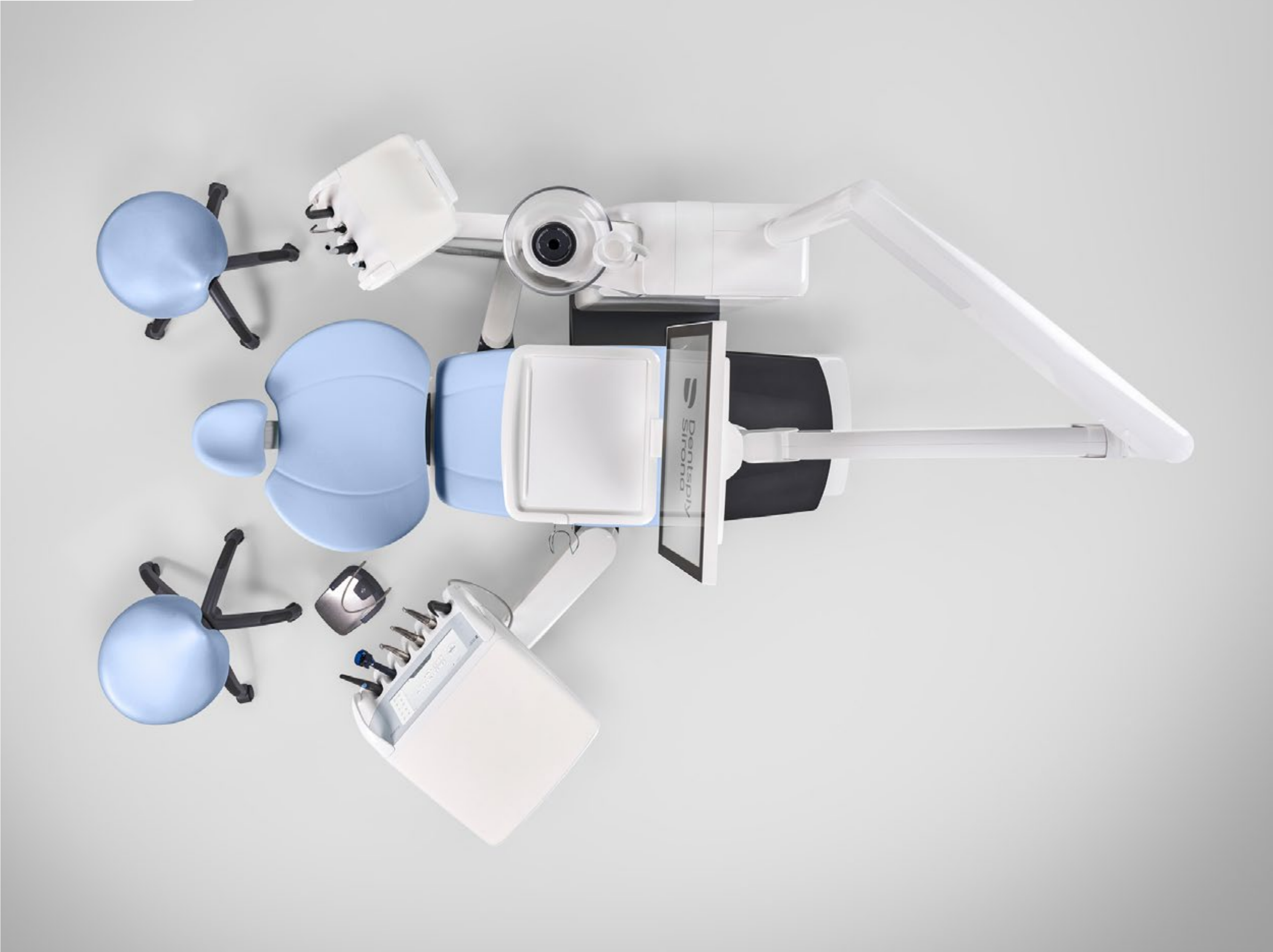

Contrôle du pied

# Facilité d'utilisation



## Smart control

- Élément de commande multifonction sans fil avec Bluetooth
- Favorise grandement un traitement ergonomique en mode mains libres
- Accès immédiat à toutes les fonctions essentielles
- Positionnement avancé des touches et conception intuitive
- Norme énergétique faible pour des connexions stables



## Contrôle classique du pied

- Contrôle total des instruments, du pulvérisateur et et du soufflage des débris.
- Contrôle de vitesse pour les instruments à commande électrique
- Commande sans les mains du centre de soins grâce à une pédale à 4 directions.
- Disponible avec et sans fil



## Contrôle pneumatique du pied

- Contrôle total des instruments, du pulvérisateur et et du soufflage des débris.
- Régulateur de vitesse pour outils pneumatiques

Positionnement ergonomique du patient

# Confort du patient



## Fonction de massage

- Massage du dos pour améliorer le confort des patients pendant la préparation et les temps d'attente ou pauses de traitement
- Désactivation automatique lorsque la position d'entrée, de sortie ou de rinçage buccal



## Fonction de soutien lombaire

- Fournit un soutien optimal de la colonne vertébrale
- Ajustement individuel pour compenser les différences anatomiques
- Les patients confortablement positionnés sont des patients détendus



## ErgoMotion

- Le mouvement combiné du dossier et du siège empêche l'extension et la compression de la colonne vertébrale
- La tête du patient reste toujours dans la même position sur l'appui-tête
- Il n'est pas nécessaire de réajuster l'appui-tête lors du changement de position de traitement

Ergonomie & Confort

# Tabourets de travail



## Hugo – L’expert en ergonomie

- Appui-dos dynamique
- Le système OptiMotion élimine la pression sur les cuisses
- Revêtement de siège high-tech dissipe la chaleur corporelle
- La version Hugo à main libre permet un ajustement hygiénique de la hauteur du siège



## Theo – La flexibilité

- Conception en forme de selle
- Mécanisme d’équilibre unique
- Choix de couleur de sellerie
- Base de tabouret soulageante
- Hauteur réglable



## Carl – Le polyvalent

- Siège rond avec sellerie confortable
- Le dossier peut être tourné à 360°
- La hauteur peut être réglée à partir de n’importe quelle position assise
- Choix de deux longueurs de ressort à gaz



## Paul : Le poids léger

- Coussin de siège circulaire avec une sellerie confortable
- L'appuie-dos pivote jusqu'à 90°
- Mécanisme de déverrouillage manuel pour l'ajustement de la hauteur

# Fonctions de traitement, Solutions et service

- Endo >
- Implant >
- Communication avec le patient >
- DS Core >
- Logiciel de service >
- Diagnostics à distance >





Fonctions de traitement, solutions et services

# Rationalisez votre flux de travail avec des fonctions intégrées

Découvrez les avantages des fonctions intégrées pour les traitements Endo et Implant dans nos postes de traitement. Grâce à des outils parfaitement intégrés, vous pouvez minimiser les temps de configuration, vous concentrer sur vos patients et avoir tout à portée de main.

- Pas de nécessité de préparer des tables supplémentaires.
- Une assistance intuitive par l'équipement pour une concentration maximale sur le patient
- Minimisation des temps de configuration
- Des outils de formation professionnels et la visualisation des étapes de traitement pour favoriser la confiance des patients et l'acceptation des cas
- Meilleure prévention des infections par rapport aux versions précédentes
- Des outils faciles à utiliser pour prévenir l'infection



Fonctions thérapeutiques intégrées

## Endo : efficace pour les racines

Grâce à la fonction endodontique intégrée, les moteurs de table appartiennent désormais au passé. Les fonctions intégrées permettront de rationaliser chaque traitement grâce à des préréglages et à des options de personnalisation, et réduiront le risque de retraitement.

### Endo avec une base de données de fichiers intégrée

- ✓ Les bibliothèques de fichiers fournissent une assistance étape par étape pour la préparation du canal radiculaire
- ✓ L'affichage visuel de la base de données de fichiers simplifie la préparation
- ✓ Un contrôle précis du couple moteur garantit une sécurité clinique élevée. Vos paramètres et favoris peuvent aussi être enregistrés
- ✓ L'écran ApexLocator intégré sur le moniteur Sivision 22" offre une assistance visuelle de votre flux de travail endodontique

### Endo sans base de données de fichiers intégrée

- ✓ Avec EasyTouch, il est possible d'utiliser 6 réglages différents de couple et de vitesse, ainsi que des systèmes de limage en va-et-vient
- ✓ Un contrôle précis du couple moteur garantit une sécurité clinique élevée
- ✓ L'écran ApexLocator intégré sur l'EasyTouch améliore votre flux de travail endodontique
- ✓ Avec EasyPad, jusqu'à 3 réglages de couple moteur sélectionnables peuvent être utilisés





Fonctions thérapeutiques intégrées

## Implant : efficacité intégrée

Grâce à nos fonctionnalités avancées et à nos paramètres personnalisables, vous pouvez rationaliser votre flux de travail implantaire, ajuster les paramètres essentiels et proposer des traitements personnalisés et précis qui améliorent les résultats pour les patients.

- ✓ Base de données d'implants mise à jour permettant de nouveaux flux de travail grâce à des préréglages pour votre traitement implantaire
- ✓ Avec la pompe intégrée pour solution saline, la quantité de liquide de refroidissement peut être réglée en fonction des besoins
- ✓ Tous les paramètres pertinents, tels que la vitesse, le couple et le débit du fluide de refroidissement stérile, peuvent être réglés et contrôlés individuellement
- ✓ Le contrôle mains libres de toutes les étapes via le contrôle au pied empêche la contamination croisée et garantit la sécurité des procédures chirurgicales





Communication avec le patient

## Sivision : Laissez les images parler

Une communication efficace avec les patients est la pierre angulaire de nos postes de traitement. Avec des fonctionnalités qui facilitent la formation, avec une explication des options de traitement, et des aides visuelles, vous pouvez renforcer la confiance, augmenter l'acceptation des cas et améliorer la satisfaction des patients et les résultats.

- ✓ Visualisation claire pour les consultations sur place
- ✓ Outils utiles pour une communication étroite avec les patients
- ✓ Faciliter la communication efficace des résultats et des recommandations thérapeutiques en regroupant et en affichant les données relatives au patient sur un seul écran central dans DS Core
- ✓ Afficher les différents supports auxquels vous faites référence pour votre diagnostic
- ✓ Transparence accrue grâce aux images intraorales, aux images radio et autres supports directement visibles sur l'écran intégré Moniteur Sivision 22"
- ✓ Gardez l'engagement des patients en partageant les fichiers affichés sans effort après la consultation (abonnement DS Core requis)





DS Core

# Favorisez la croissance de votre entreprise avec la large gamme de fonctionnalités de DS Core



## Diagnostic<sup>1</sup>

### Outils de diagnostic

Prendre des mesures de longueur avec facilité

### Smart View

Illustrations basées sur le CBCT l'anatomie de votre patient<sup>2</sup>

### Caméra avec détection de caries

Détecter les caries et permettre un traitement rapide<sup>3</sup>



## Planification

### Espace de traitement

Gérer l'ensemble des dossiers et des processus liés aux traitements

### Simulateur SureSmile

Illustrer la valeur d'un Traitement avec les aligneurs SureSmile<sup>®</sup>

### Connexion CEREC avec DS Core

Lancer le processus de conception CEREC<sup>®</sup> et transférer les données en toute fluidité<sup>6</sup>




## Fabrication

### Fabrication

Gérez tous vos ordres de fabrication depuis un seul et même endroit<sup>7</sup>

### Commande

Gérez l'ensemble de vos demandes d'analyses et de prestations depuis un seul et même endroit

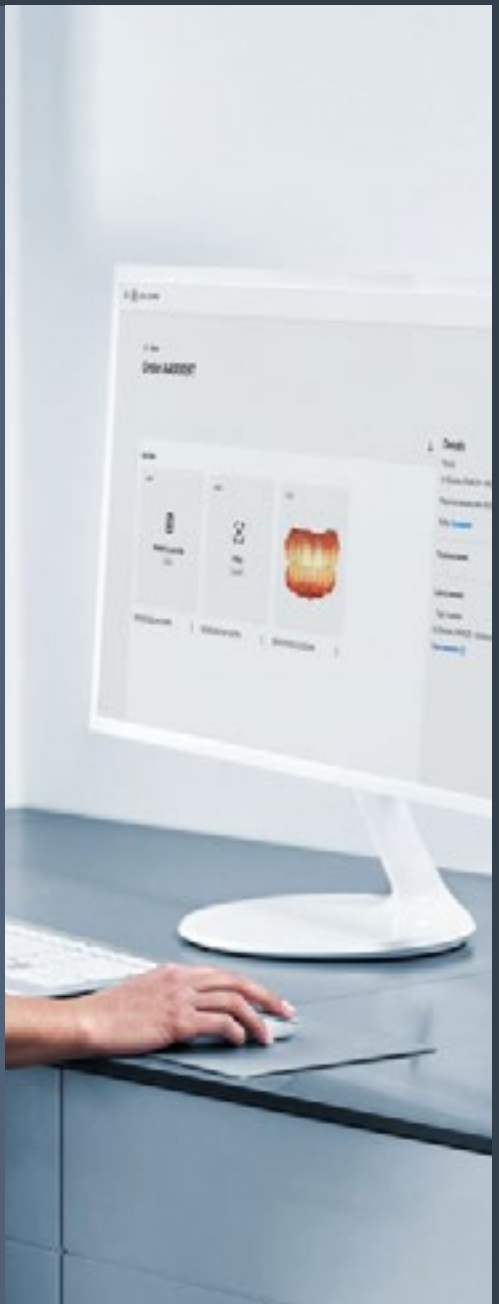

## Médiathèque en ligne et partage

Stocker<sup>4</sup> et afficher les supports des patients dans un seul endroit, collaborer de n'importe où

## Canvas

Améliorer la communication et l'engagement auprès de vos patients

## Gestion des équipements DS

Gérer et contrôler les équipements alimentés et connectés par DS Core<sup>5</sup>

<sup>1</sup> La disponibilité des fonctions de diagnostic dépend de l'autorisation locale des dispositifs médicaux <sup>2</sup> Smart View n'est pas un dispositif médical et est destiné à la communication avec les patients <sup>3</sup> Disponible uniquement avec Primescan 2 <sup>4</sup> DS Core offre un stockage principal pour les fichiers d'imagerie et Primescan 2 <sup>5</sup> Voir la section « Solutions technologiques Dentsply Sirona » pour obtenir un aperçu des équipements « Powered by DS Core » et « Connected with DS Core » <sup>6</sup> Licence CEREC 5.3.1 requise <sup>7</sup> inLab CAM connecté à DS Core requis.




DS Core

# Technologies des solutions de traitement Dentsply Sirona et DS Core

- ✓ Design récompensé
- ✓ Écrans intégrés pour la communication avec les patients.
- ✓ Automatisation des fonctions et contrôle du pied pour un confort et une ergonomie
- ✓ Interface utilisateur intuitive avec des flux de travail personnalisables
- ✓ Processus d'hygiène guidé avec des rapports automatisés
- ✓ Affichez les scans intra-oraux aux côtés de vos radiographies et autres fichiers médicaux du patient sur l'écran du centre de traitement
- ✓ Accès simplifié aux supports d'information destinés aux patients sur les appareils mobiles via un code QR pendant la consultation



Intégrés dans  
l'écosystème  
DS

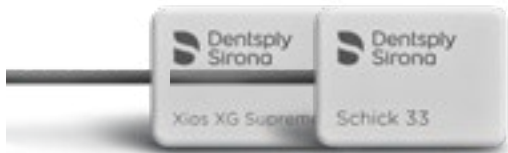



Accessibilité au réseau

# Logiciel de gestion

Notre logiciel de gestion assure un suivi permanent de l'état du centre de soins, en affichant à la fois les informations d'hygiène et les données techniques relatives au fauteuil dentaire, afin de garantir la qualité de la documentation relative à l'hygiène.

Les utilisateurs enregistrés bénéficient d'une assistance rapide pour leurs besoins en matière de maintenance, ce qui permet d'éviter les pannes, d'améliorer les performances des postes de traitement et de réduire au minimum les temps d'arrêt.





## Valeur ajoutée : pour les cabinets dentaires

- Présentation rapide de l'état de l'appareil et gestion des profils d'utilisateurs
- Prochaine date de maintenance et accès aux documents techniques les plus récents
- Affichage des versions du logiciel et des licences
- Mesures d'hygiène enregistrées avec génération de rapports

## Valeur ajoutée : pour les techniciens

- Afficher des informations sur les composants électriques de l'appareil
- Afficher la mémoire de service et les fichiers journaux
- Préparer les rendez-vous de maintenance de manière ciblée
- Accès en direct au centre de traitement pour les demandes des clients

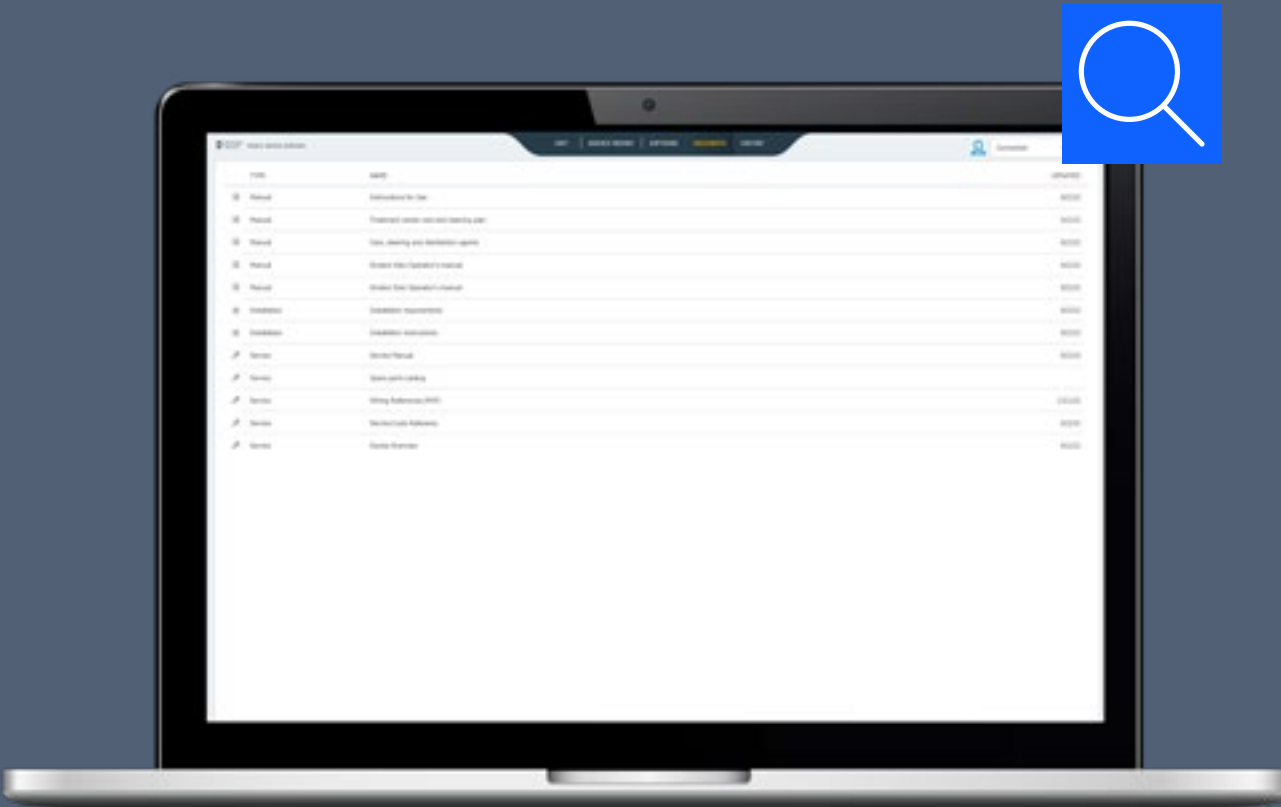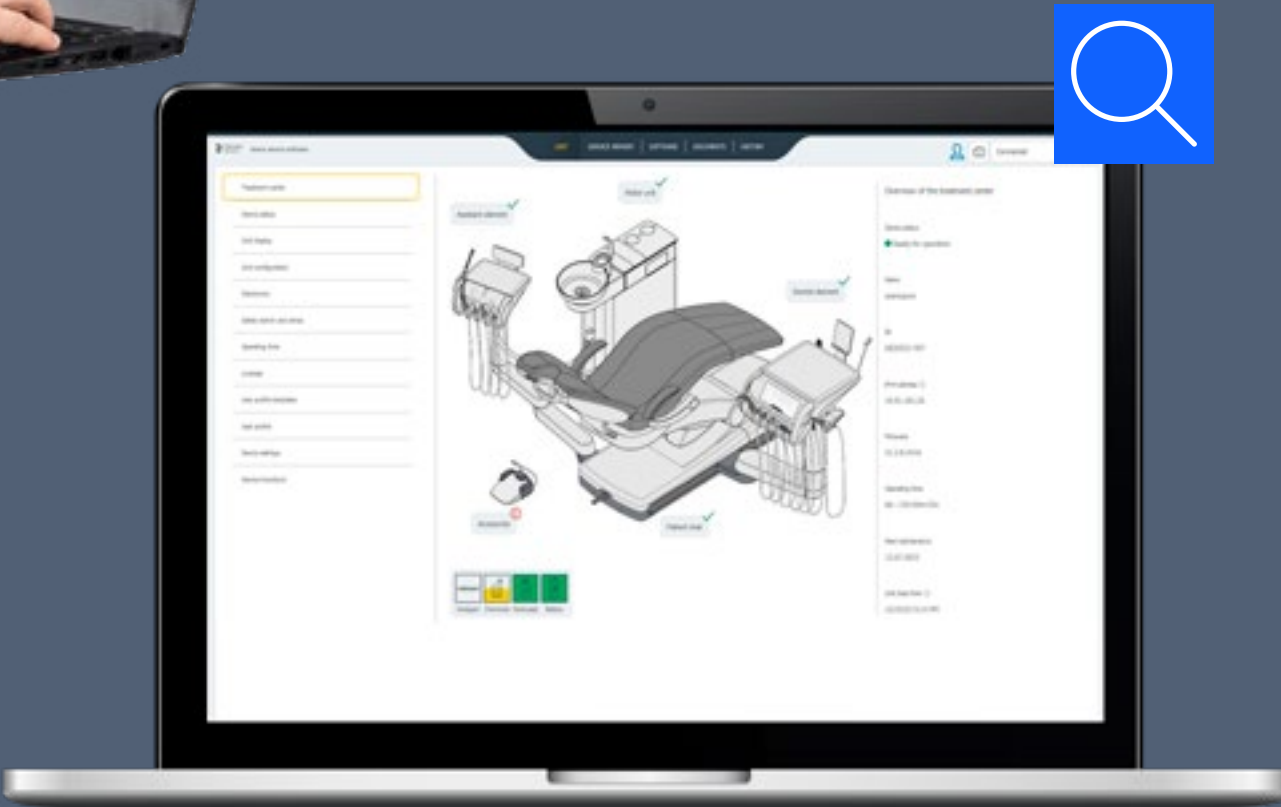




Accessibilité au réseau

## Diagnostics à distance

- Il permet de consulter les codes de service du poste de traitement
- Pour cela, le poste de traitement doit être connecté au réseau du cabinet et à Internet
- Le technicien de service peut accéder aux codes de service depuis n'importe quel emplacement via une connexion sécurisée
- Cela permet d'exécuter les diagnostics avant visite sur place et assurer un service rapide

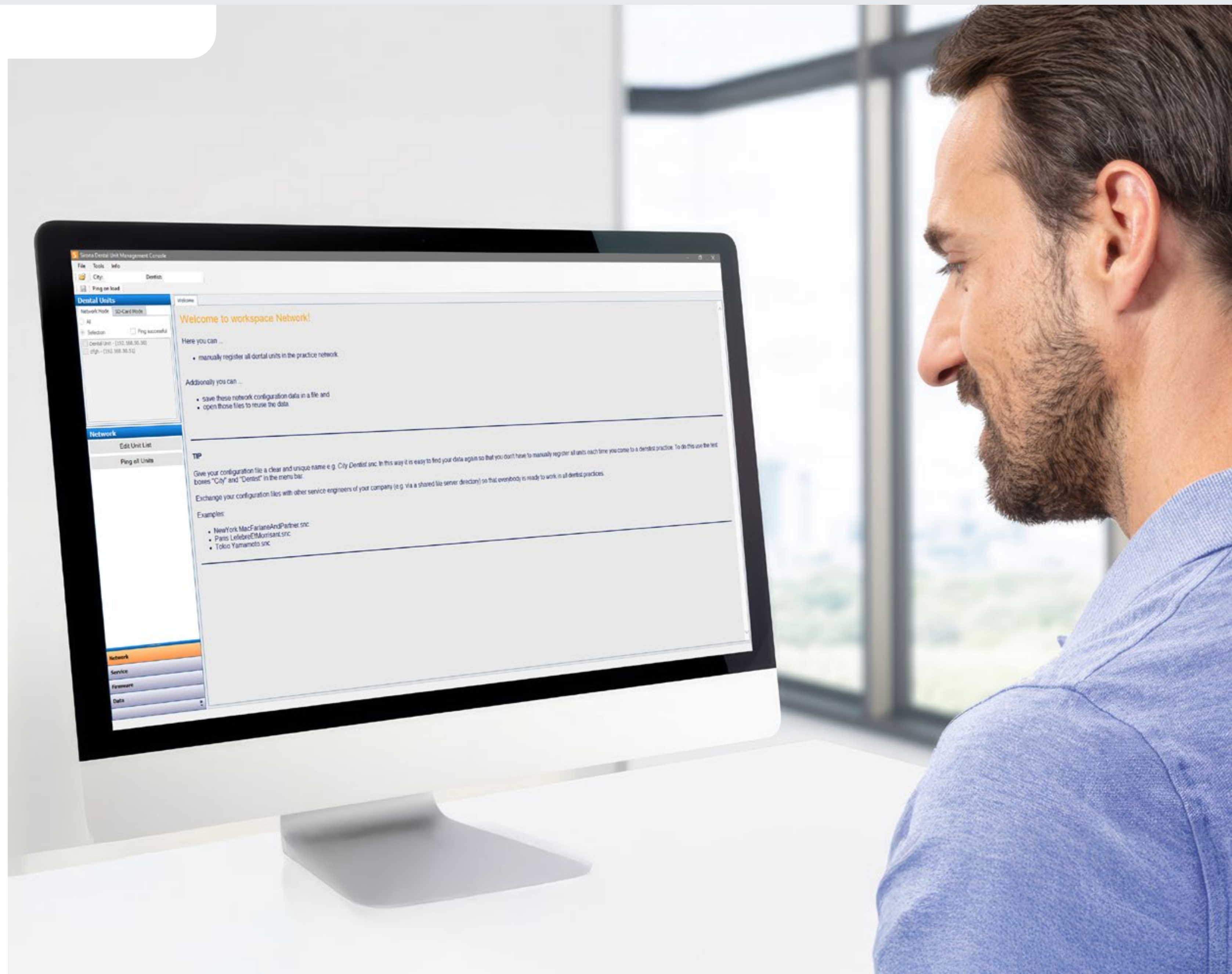

## Prévention des infections

Système d'hygiène intégré >

Système de désinfection intégré >


Nettoyage chimique du tuyau d'aspiration >

Nettoyage chimique du crachoir >

Bouteille d'eau : réserve d'eau autonome >

Centre de contrôle de l'hygiène >

Surfaces lisses >

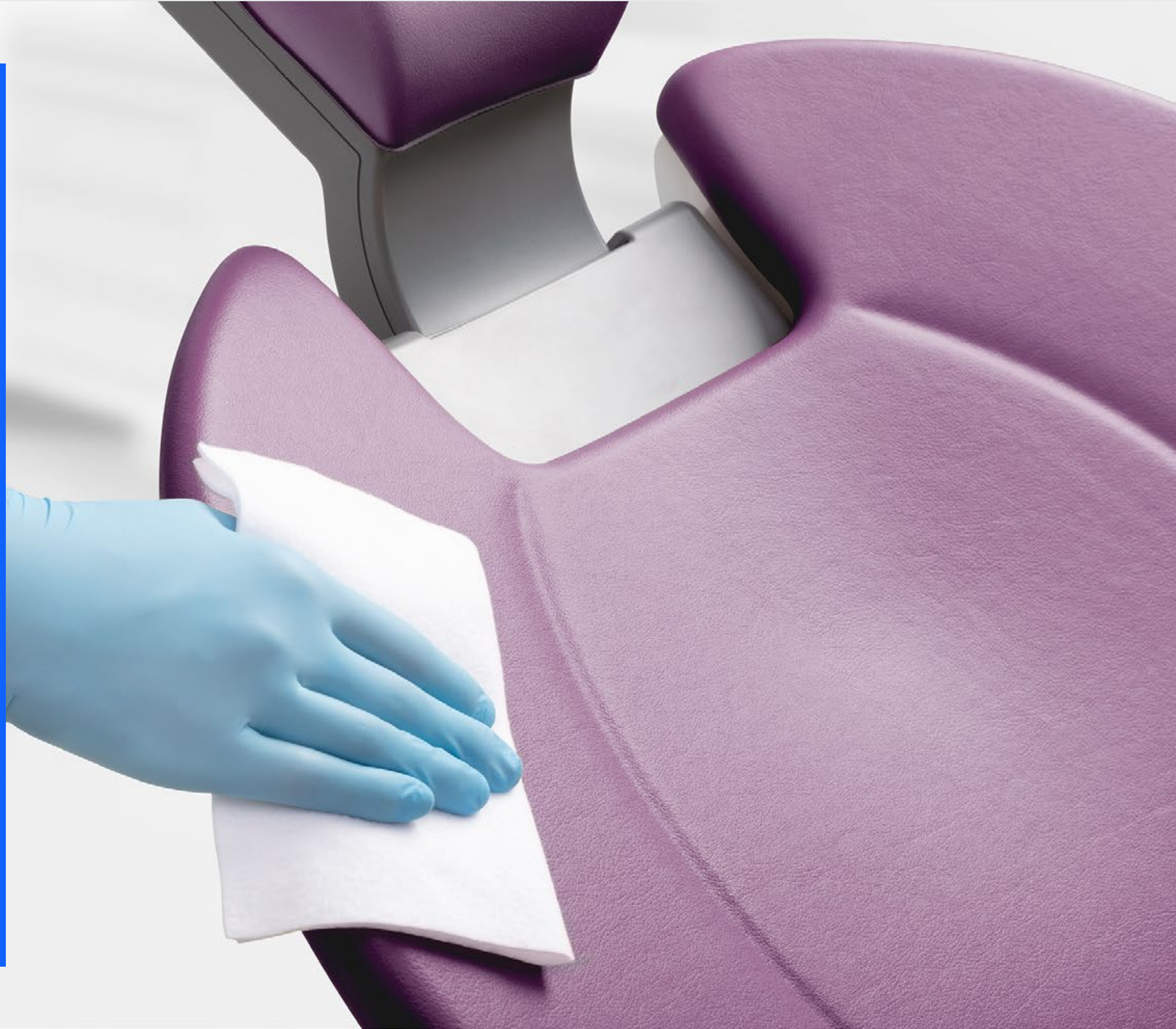



Prévention des infections

# La sécurité en toute simplicité : contrôle et prévention des infections

Un concept d'hygiène efficace est la marque d'un cabinet bien géré et une exigence fondamentale des patients. Afin de garantir des processus efficaces, intuitifs et rapides, la prévention et le contrôle des infections constituent la pierre angulaire de chaque centre de soins que nous construisons.

Nous avons équipé nos postes de traitement de concepts d'hygiène intelligents afin de vous faciliter, à vous et à l'équipe de votre cabinet, le respect des directives et des réglementations en matière d'hygiène.

Le système d'hygiène intégré aide l'équipe du cabinet grâce à des processus de rinçage et de nettoyage intelligents et automatiques. La contamination croisée est évitée dès le départ grâce à un fonctionnement sans contact.

Prévention des infections

# Système d'hygiène intégré

- ✓ Fonction de purge permettant de rincer les conduites d'eau après chaque patient
- ✓ Adaptateurs de nettoyage intégrés dans des cartouches amovibles et désinfectables par traitement thermique, destinés aux instruments et aux tuyaux d'aspiration
- ✓ Fonction de purge automatique pour rincer les conduites d'eau au début de chaque journée de travail et en soirée
- ✓ Nettoyage automatique du tuyau d'aspiration en touchant un seul bouton
- ✓ Crachoir en verre de haute qualité



Prévention des infections

# Sécurité et efficacité en un simple clic



## Système de désinfection intégré

- Un traitement permanent de la conduite d'eau avec Dentosept pour maintenir la qualité de l'eau à long terme
- Mise en place de processus de désinfection mensuels de toutes les conduites d'eau



## Nettoyage chimique du tuyau d'aspiration

- Dosage automatique d'un produit de nettoyage chimique pour le rinçage par aspiration
- Réduction du temps de maintenance quotidien



## Nettoyage chimique du crachoir

- L'ajout automatique de solution nettoyante à chaque rinçage de la cuvette garantit une meilleure hygiène et facilite le nettoyage, ce qui simplifie l'entretien.
- Le crachoir peut aussi être inclus dans le processus de nettoyage du tuyau d'aspiration

\*Nettoyage simultané des tuyaux d'aspiration possible

Prévention des infections

## Approvisionnement autonome en eau grâce à une bouteille d'eau

- ✓ Qualité de l'eau contrôlée
- ✓ Désinfection continue, purge et désinfection possible
- ✓ Option de commutation à l'alimentation en eau principale disponible
- ✓ Version sans interrupteur secteur, conforme à la norme EN 1717





Centre de contrôle de l'hygiène

## Processus d'hygiène guidés pour gagner un temps précieux

Le centre de contrôle de l'hygiène du Smart Touch indique les mesures d'hygiène à effectuer prochainement. Vous pouvez également utiliser ce centre de contrôle pour lancer des mesures d'hygiène automatiques, telles que le rinçage régulier et la désinfection intensive mensuelle. Par exemple, d'une simple pression sur un bouton, les tuyaux des instruments, les tuyaux d'aspiration et le crachoir sont automatiquement rincés.

### Une hygiène de haut niveau facilitée

- Processus d'hygiène guidés pour un rinçage régulier et une désinfection intensive mensuelle
- Centre de contrôle de l'hygiène pour suivre les mesures d'hygiène pertinentes
- Nettoyage facile des tuyaux des instruments grâce à un dispositif de désinfection intégré
- Cartouches amovibles pour un nettoyage facile des tuyaux d'aspiration
- Pièces détachables stérilisables et/ou thermo-désinfectables pour augmenter la protection contre la contamination croisée
- Exclusivité Axano : la fonction « Ambi Light » contribue au respect des mesures d'hygiène en indiquant quand un processus est en cours, ce qui permet à l'équipe du cabinet de visualiser l'état d'avancement à distance, et ainsi de gagner du temps et de réduire les déplacements.




Surfaces lisses


## Maintenance sans effort avec des surfaces faciles d'entretien

Nos postes de traitement sont exclusivement conçus avec des surfaces résistantes et faciles à nettoyer. Les éléments en plastique sont légers, robustes et agréables au toucher, tout en étant antidérapants.

### Pièces amovibles

Tous les éléments essentiels à l'hygiène peuvent être retirés, stérilisés ou désinfectés thermiquement.

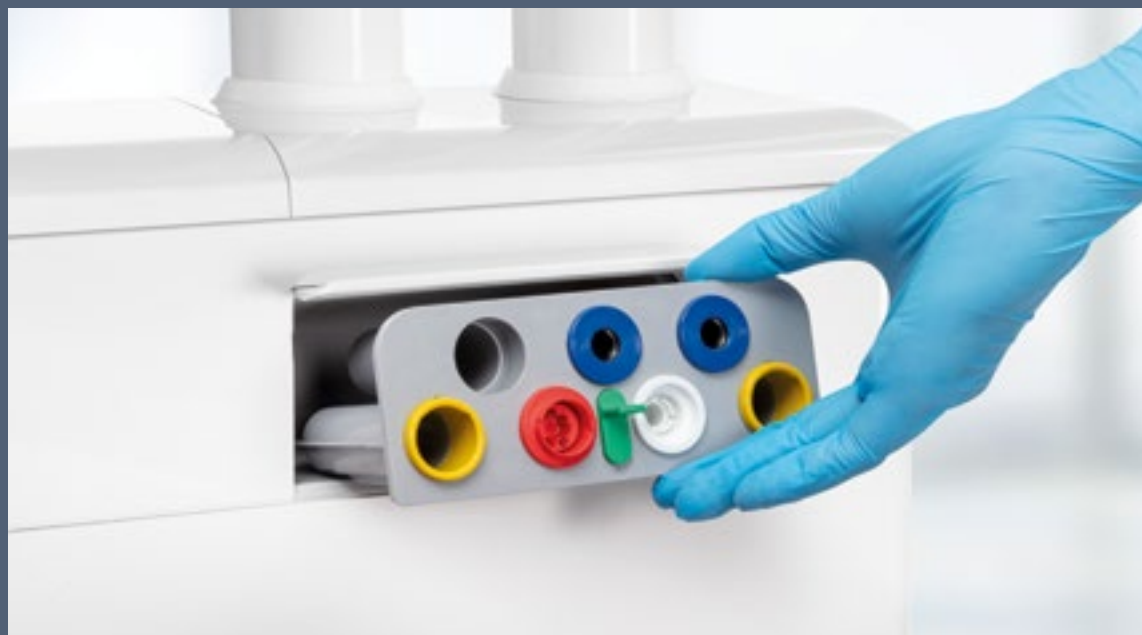

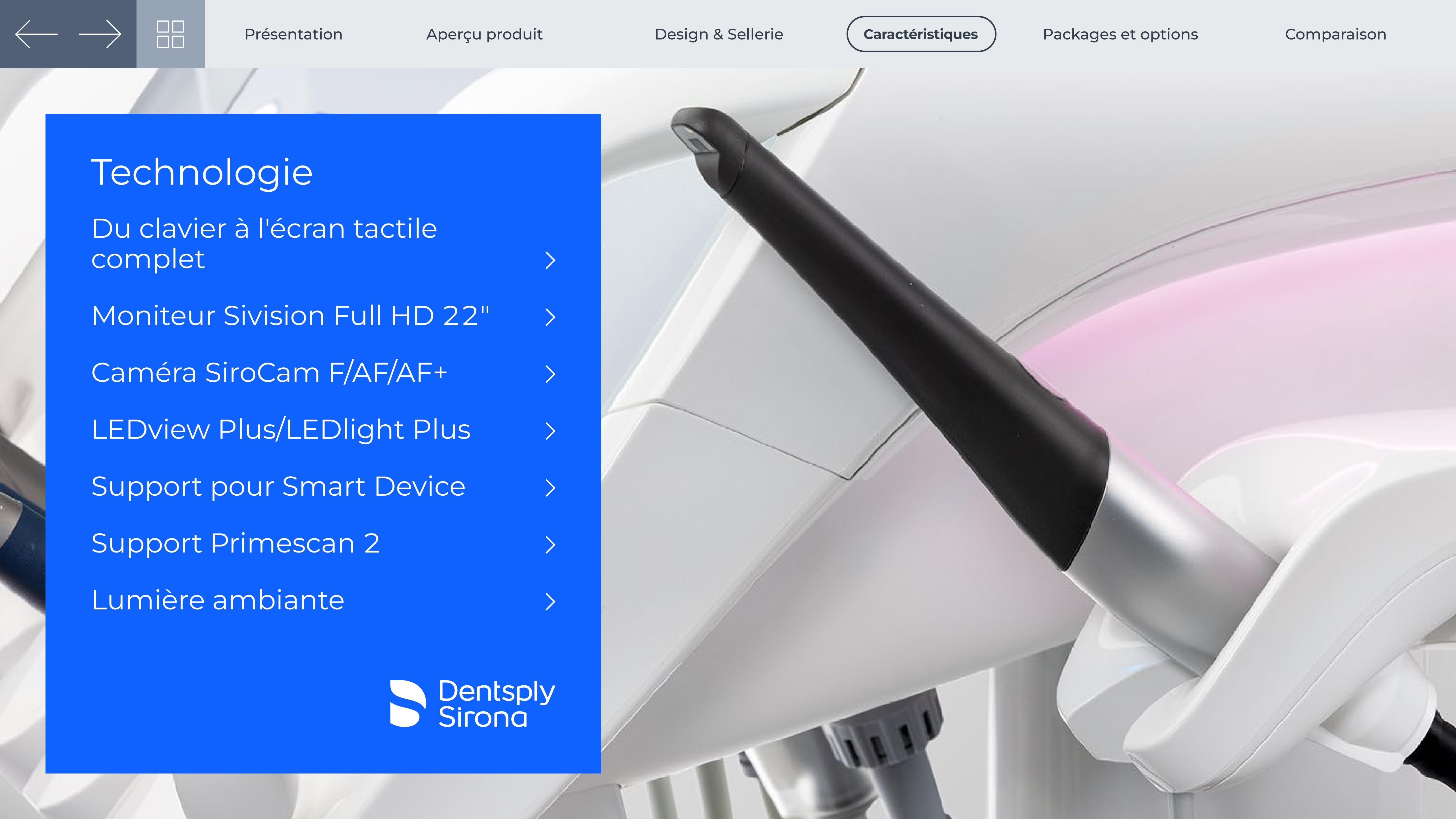

## Technologie

Du clavier à l'écran tactile complet >

Moniteur Sivision Full HD 22" >

Caméra SiroCam F/AF/AF+ >

LEDview Plus/LEDlight Plus >

Support pour Smart Device >

Support Primescan 2 >

Lumière ambiante >



Technologie

# Technologie avancée pour l'amélioration des soins dentaires

Nous nous engageons à vous permettre d'offrir des soins dentaires de haute qualité et de créer un environnement propice au confort et à la confiance.

En tirant parti des dernières avancées technologiques, nous proposons des fonctionnalités innovantes qui améliorent votre expérience thérapeutique et celle de vos patients, tout en favorisant l'efficacité des processus de travail grâce à des interfaces utilisateur intuitives.

Interface utilisateur

# Fonctionnement intuitif : facilité d'utilisation



## Smart Touch

- Le grand écran Smart Touch de 10,3 pouces offre un grand confort d'utilisation et une prise en main intuitive et conviviale
- Doté d'une vaste gamme d'options personnalisables, il s'adapte aux habitudes de travail de chaque utilisateur
- De plus, la surface en verre de haute qualité facilite le nettoyage et le rend plus efficace



## Easy Touch

- Grand confort de fonctionnement grâce à la technologie à écran tactile intuitive
- Écran multicolore de 4,3"
- Plusieurs profils d'utilisateurs
- Options supplémentaires de fonctionnement et d'affichage, par exemple l'Endo intégré avec visualisation ApexLocator



## EasyPad

- Fonctionnement clair et intuitif
- Avec un affichage à sept segments quintuple, par exemple pour l'intensité d'un instrument ou l'heure
- Indicateur d'état LED
- Jusqu'à 2 profils d'utilisateurs
- 3 boutons favoris permettant de mémoriser individuellement les réglages des instruments, tels que la vitesse et la pulvérisation

<sup>1</sup> jusqu'à 10 profils d'utilisateurs <sup>2</sup> 6 profils d'utilisateurs <sup>3</sup> 4 profils d'utilisateurs <sup>4</sup> 2 profils d'utilisateurs

Moniteur Sivision Full HD 22"

## Communiquez en toute confiance et rationalisez votre flux de travail pour augmenter l'acceptation des cas

Une consultation sur place sans effort grâce à une visualisation claire pour vous et votre patient.

Ces outils utiles vous permettent de communiquer avec les patients et offrent une transparence accrue grâce aux images intraorales, aux radiographiques et autres supports directement visibles sur le moniteur Sivision intégré de 22".

- Consultations sur place sans effort
- Visualisation claire
- Communication étroite avec les patients
- Transparence accrue



Caméra SiroCam

# Très bonne qualité d'image

Des images haute résolution et une documentation dentaire précise. Nos appareils photo offrent des images fiables et nettes pour diverses interventions dentaires, facilitant ainsi le diagnostic.



SiroCam AF+

SiroCam AF

SiroCam F

|                              |                   |                   |                        |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Focus                        | Focus automatique | Focus automatique | Focus fixe             |
| Format d'image 16:10         | ✓                 | ✓                 | ✓                      |
| Pixels (utilisables)         | 1,00 mégapixel    | 0,65 mégapixel    | 0,42 mégapixel         |
| Plage de focus               | ✓ (2–130 mm)      | ✓ (2–130 mm)      | ✓ (Focus fixe 5–20 mm) |
| Résolution d'image en direct | 824 × 514         | 824 × 514         | 824 × 514              |
| Résolution d'image fixe      | 1276 × 796        | 1024 × 640        | 824 × 514              |

LEDview Plus / LEDlight Plus

# Eclairage d'ambiance

Nous allions une technologie LED de pointe à une conception ergonomique afin d'obtenir un équilibre parfait entre luminosité, température de couleur et champ lumineux, garantissant ainsi un éclairage complet de la cavité buccale pour des soins de très haute qualité. Un capteur sans contact, la mise en marche automatique et des manchons amovibles réduisent le risque de contamination croisée.



## LEDview Plus

- Champ lumineux de 200 × 100 mm
- IRC élevé grâce aux LED multicolores
- Intensité lumineuse élevée, réglable en 7 étapes (5,000 à 40,000 lx)
- Température de couleur réglable (4,400–6,200 K)
- Mode composite vrai (conforme à la norme ISO 9680:2014)
- Capteur sans contact
- Également disponible en modèle plafonnier seul et en combinaison plafonnrière avec Heliodent Plus



## LEDlight Plus

- Champ lumineux de 160 × 80 mm
- Jusqu'à 30 000 lx d'éclairage réglable en 5 étapes
- Mode composite vrai (conforme à la norme ISO 9680:2014)
- x
- Capteur sans contact

Support pour Smart Device

## Support pour Smart Device

- ✓ Intégrer la tablette de cabinet dans votre traitement facilement
- ✓ Facile à utiliser grâce un support magnétique
- ✓ Faciliter une communication efficace avec les patients via DS Core



Support Primescan 2

# Support Primescan 2

- ✓ Pour plus de stabilité et de soins
- ✓ Garde Primescan 2 à portée de main pendant le traitement du patient
- ✓ Maintien le scanner en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé
- ✓ Facilite un flux de travail de scannage simple et ergonomique



Lumière ambiante

## Lumière ambiante

- ✓ Crée une atmosphère agréable
- ✓ Visualise les procédures d'hygiène active
- ✓ Diverses couleurs disponibles



# Packages & Options

Axano >

Axano Pure >

Sinius >

Intego Pro >

Intego >



Axano

# Package utilisateur

## Cabinet

- 2× Moteur électrique BL ISO F Flexible de turbine
- 2× Sprayvit (dentiste et élément assistant)
- Instrument à ultrasons SiroSonic TL
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus
- Jusqu'à 2 tabourets de travail à un prix réduit



# Packs en option


## Endo

- Fonction endodontique intégrant les limes Reciproc
- ApexLocator
- Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière




## Implant

- Fonction d'implantologie
- Pompe intégrée pour solution saline
- Moteur électrique BL Implant E avec la lumière
- Contre-angle implantaire 20:1

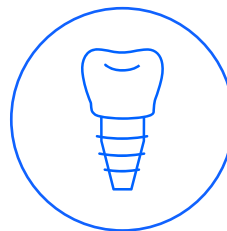

## Sivision

- Équipement vidéo dans l'élément dentiste
- SiroCam AF+
- Moniteur Sivision 22"
- Colonne de support légère avec adaptateur pour écran (supplément pour la fixation de l'écran sur le plateau)

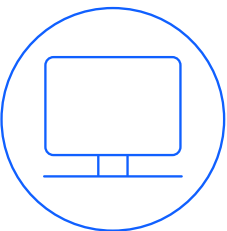

Axano

# Vos options individuelles (1)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Élément dentiste (avec Smart Touch, poignées amovibles et support pour instruments)               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Smart Delivery Pro avec réglage de la hauteur motorisé                                            | ○ |
| Sprayvit avec lumière                                                                             | ○ |
| 1er entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                                   | ● |
| 2e entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                                    | ● |
| 3e entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                                    | ● |
| 4ème entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                                  | ○ |
| Moteur électrique BL ISO F (plage de vitesses de 90 à 40 000 tr/min)                              | ○ |
| Flexible de turbine                                                                               | ○ |
| Instrument à ultrasons SiroSonic TL                                                               | ○ |
| Fonction d'implantologie                                                                          | ○ |
| Moteur électrique BL Implant E avec lumière                                                       | ○ |
| Contre-angle Implant 20:1                                                                         | ○ |
| Pompe intégrée pour solution saline                                                               | ○ |
| Fonction endodontique, y compris les systèmes de limes réciproques avec base de données des limes | ○ |
| ApexLocator                                                                                       | ○ |
| Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière                                                        | ○ |
| Interface USB                                                                                     | ● |
| Fonctionnement mains libres avec contrôle du curseur                                              | ● |
| Smart Device Support pour tablette                                                                | ○ |
| Visualisateur radiographique panoramique                                                          | ○ |
| Support Primescan 2                                                                               | ○ |

| Assise pour le patient                                                |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Positions du fauteuil spécifiques au patient                          | ● |
| Appui-tête motorisé avec réglages automatiques spécifiques au patient | ● |
| Lumière ambiante                                                      | ● |
| Sellerie Premium thermo                                               | ● |
| Sellerie Lounge avec coutures colorées sur demande                    | ○ |
| Fonction de soutien lombaire                                          | ● |
| Fonction de massage                                                   | ● |
| Accoudoir pivotant, droit                                             | ○ |
| Accoudoir, gauche                                                     | ○ |
| Commande au pied, à 4 options                                         | ● |
| Smart control sans fil                                                | ● |
| Jeu de vannes pour dispositifs externes                               | ○ |
| Coussin Booster pour les patients de petite taille                    | ○ |
| ErgoMotion                                                            | ● |
| Vitesse de déplacement ajustable                                      | ● |

La disponibilité des options et des fonctionnalités peut varier selon les pays.

Axano

# Vos options individuelles (2)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Élément assistant (avec écran tactile, support amovible)                                      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sprayvit avec lumière                                                                         | ○ |
| HVE, 2e kit HVE                                                                               | ○ |
| Aspirateur de salive                                                                          | ● |
| Dispositif d'aspiration chirurgicale                                                          | ○ |
| 2e kit HVE                                                                                    | ● |
| Support pour la lampe à polymérisation SmartLite Pro                                          | ○ |
| Connexion 12 V de qualité médicale                                                            | ○ |
| Unité d'eau                                                                                   |   |
| Système d'hygiène avec cartouches de nettoyage amovibles et fonction de nettoyage automatique | ● |
| Dispositif de désinfection avec fonction permanente de désinfection et d'assainissement       | ● |
| Nettoyage chimique des tuyaux d'aspiration et du crachoir                                     | ● |
| Soupape de crachoir pour système d'aspiration humide                                          | ● |
| Séparateur automatique                                                                        | ○ |
| Séparateur d'amalgame                                                                         | ○ |
| Crachoir amovible en verre avec fonction de pivotement motorisée                              | ● |
| Fonction Aqua (approvisionnement en eau autonome)                                             | ● |

| Communication avec les patients                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| SiroCam AF+                                                                     | ○ |
| Moniteur Sivision 22", sur plateau (plateau inclus)                             | ○ |
| Moniteur Sivision de 22" sur colonne de support lumineuse                       | ○ |
| Alimentation caméra dans l'élément dentiste                                     | ○ |
| Kit de câbles pour la connexion au PC                                           | ○ |
| Tabourets de travail (ressort à gaz long ou court en option)                    |   |
| Hugo mains libres (avec fonction de réglage de la hauteur depuis le pied)       | ○ |
| Hugo manuel (avec fonction de réglage manuel de la hauteur)                     | ○ |
| Hugo Manuel Plus (avec fonction de réglage manuel en hauteur et depuis le pied) | ○ |
| Théo : assise en forme de selle                                                 | ○ |
| Carl Manuel (avec réglage de la hauteur à 360°)                                 | ○ |
| Carl Manuel Plus (avec réglage de la hauteur à 360° et commande pour le pied)   | ○ |

Axano

# Vos options individuelles (3)

- = inclus dans l'unité de base
- = optionnel

| Options supplémentaires                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Porte-Tray                                                      | ○ |
| Modèle d'unité LEDview Plus                                     | ○ |
| Modèle de plafond LEDview Plus                                  | ○ |
| Adaptateur pour ensemble de plafond Heliodent Plus/LEDview Plus | ○ |
| Adaptateur pour le modèle unitaire Heliodent Plus               | ○ |
| Miroir du patient pour LEDview Plus                             | ○ |
| Adaptateur pour caméra pour LEDview Plus                        | ○ |

La disponibilité des options et des fonctionnalités peut varier selon les pays.






Axano Pure


# Packages utilisateur

## Essentiel

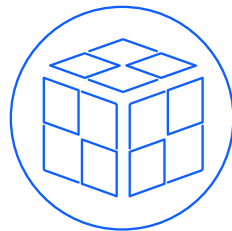

- 1× Moteur électrique BL ISO F Flexible de turbine
- 1× Sprayvit (élément pour dentiste)
- Instrument à ultrasons SiroSonic TL
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus
- Jusqu'à 2 tabourets de travail à prix réduit

## Cabinet

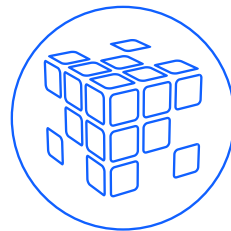

- 2× Moteur électrique BL ISO F Flexible de turbine
- Kit d'extension de 3e entraînement
- 2× Sprayvit (élément dentiste et assistant)
- Instrument à ultrasons SiroSonic TL
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus
- Jusqu'à 2 tabourets de travail à prix réduit



Axano Pure

# Packs en option


## Endo Offert

- Fonction endodontique, incluant des systèmes de réciprocité de limes
- ApexLocator
- Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière



## Confort

- Appuie-tête motorisé
- Support lombaire actif
- Sellerie Premium thermo
- Fonction de pivotement du crachoir à entraînement motorisé

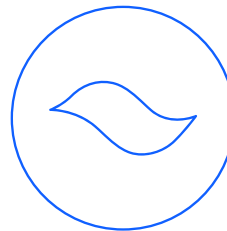


## Implant

- Fonction d'implantologie
- Pompe intégrée pour solution saline
- Moteur électrique BL Implant E avec la lumière
- Contre-angle implantaire 20:1 avec lumière



## Sivision

- Équipement de prise de vue pour l'élément dentiste
- SiroCam AF (supplément pour SiroCam AF+)
- Moniteur Sivision 22"
- Colonne de support d'éclairage avec adaptateur pour écran (supplément pour le montage de l'écran sur le plateau)

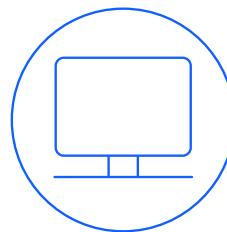

Axano Pure

# Vos options individuelles (1)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Élément dentiste (avec Smart Touch, poignées amovibles et support pour instruments)               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sprayvit avec lumière                                                                             | ○ |
| 1er entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                                   | ● |
| 2e entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                                    | ● |
| 3e entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                                    | ○ |
| Moteur électrique BL ISO F (plage de vitesses de 90 à 40 000 tr/min)                              | ○ |
| Flexible de turbine                                                                               | ○ |
| Instrument à ultrasons SiroSonic TL                                                               | ○ |
| Fonction d'implantologie                                                                          | ○ |
| Moteur électrique BL Implant E avec lumière                                                       | ○ |
| Contre-angle Implant 20:1                                                                         | ○ |
| Pompe intégrée pour solution saline                                                               | ○ |
| Fonction endodontique, y compris les systèmes de limes réciproques avec base de données des limes | ● |
| ApexLocator                                                                                       | ● |
| Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière                                                        | ● |
| Interface USB                                                                                     | ○ |
| Fonctionnement mains libres avec contrôle du curseur                                              | ● |
| Smart Device Support pour tablette                                                                | ○ |
| Visualisateur radiographique panoramique                                                          | ○ |
| Support Primescan 2                                                                               | ○ |

| Assise pour le patient                                                           |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Appui-tête à double articulation                                                 | ● |
| Appui-tête motorisé avec positions automatiques de chaise spécifiques au patient | ○ |
| Sellerie Premium                                                                 | ● |
| Sellerie Premium thermo                                                          | ○ |
| Sellerie Lounge avec coutures colorées sur demande                               | ○ |
| Fonction de support lombaire                                                     | ○ |
| Accoudoir pivotant, droit                                                        | ○ |
| Accoudoir, gauche                                                                | ○ |
| Commande au pied, à 4 options                                                    | ● |
| Smart control sans fil                                                           | ● |
| Jeu de vannes pour dispositifs externes                                          | ○ |
| Coussin Booster pour les patients de petite taille                               | ○ |
| ErgoMotion                                                                       | ● |

Axano Pure

# Vos options individuelles (2)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Élément assistant (avec écran tactile, support amovible)                                          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sprayvit avec lumière                                                                             | ○ |
| HVE                                                                                               | ● |
| Aspirateur de salive                                                                              | ● |
| Dispositif d'aspiration chirurgicale                                                              | ○ |
| 2e kit HVE                                                                                        | ○ |
| Support pour la lampe à polymérisation SmartLite Pro                                              | ○ |
| Connexion 12 V de qualité médicale                                                                | ○ |
| Unité d'eau                                                                                       |   |
| Système d'hygiène avec cartouches de nettoyage amovibles et fonction de pulvérisation automatique | ● |
| Dispositif de désinfection avec fonction permanente de désinfection et d'assainissement           | ● |
| Nettoyage chimique du tuyau d'aspiration et du crachoir                                           | ● |
| Soupape de crachoir pour système d'aspiration humide                                              | ● |
| Séparateur automatique                                                                            | ○ |
| Séparateur d'amalgame                                                                             | ○ |
| Crachoir en verre pivotant à entraînement motorisé                                                | ○ |
| Crachoir amovible en verre avec fonction de pivotement manuel                                     | ○ |
| Fonction Aqua (approvisionnement en eau autonome)                                                 | ● |

| Communication avec les patients                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| SiroCam AF/AF+                                                                  | ○ |
| Moniteur Sivision 22", sur plateau (plateau inclus)                             | ○ |
| Moniteur Sivision de 22" sur colonne de support lumineuse                       | ○ |
| Support de caméra dans l'élément dentaire                                       | ○ |
| Kit de câbles pour la connexion au PC                                           | ○ |
| Tabourets de travail (ressort à gaz long ou court en option)                    |   |
| Hugo mains libres (avec fonction de réglage de la hauteur depuis le pied)       | ○ |
| Hugo manuel (avec fonction de réglage manuel de la hauteur)                     | ○ |
| Hugo Manuel Plus (avec fonction de réglage manuel en hauteur et depuis le pied) | ○ |
| Théo : assise en forme de selle                                                 | ○ |
| Carl Manuel (avec réglage de la hauteur à 360°)                                 | ○ |
| Carl Manuel Plus (avec réglage de la hauteur à 360° et commande pour le pied)   | ○ |

Axano Pure

# Vos options individuelles (3)

- = inclus dans l'unité de base
- = optionnel

| Options supplémentaires                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| Porte-Tray                                                      | ○ |
| Modèle d'unité LEDview Plus                                     | ○ |
| Modèle de plafond LEDview Plus                                  | ○ |
| Adaptateur pour ensemble de plafond Heliodent Plus/LEDview Plus | ○ |
| Adaptateur pour le modèle unitaire Heliodent Plus               | ○ |
| Miroir du patient pour LEDview Plus                             | ○ |
| Adaptateur pour caméra pour LEDview Plus                        | ○ |






Sinius

# Packages utilisateur


## Commencer

- 1× Sprayvit M  
l'élément dentiste
- 1× Moteur électrique BL ISO E
- Éclairage de fonctionnement  
LEDview Plus

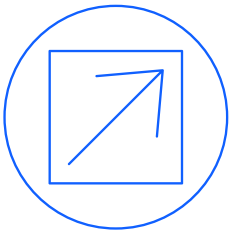


## Avancez

- Smart Control sans fil  
depuis le pied
- 1× Sprayvit M (élément pour dentiste)
- 1× Moteur électrique BL ISO C
- Instrument à ultrasons SiroSonic TL
- Éclairage de fonctionnement  
LEDview Plus
- Jusqu'à 2 tabourets de travail  
à prix réduit

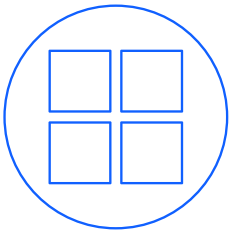

## Innovations

- Smart Control sans fil  
contrôle au pied
- 2× Sprayvit (élément dentiste  
et assistant)
- 2× Moteur électrique BL ISO C
- Instrument à ultrasons SiroSonic TL
- Éclairage de fonctionnement  
LEDview Plus
- Jusqu'à 2 tabourets de travail  
à prix réduit

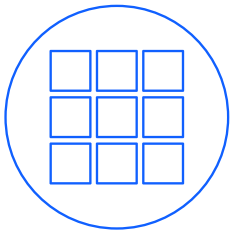



Sinius

# Packs en option


## Endo

- Fonction endodontique, intégrant les limes Reciproc
- ApexLocator
- Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière




## Confort

- Appuie-tête motorisé
- Support lombaire actif
- Sellerie Premium thermo
- Fonction de pivotement du crachoir à entraînement motorisé

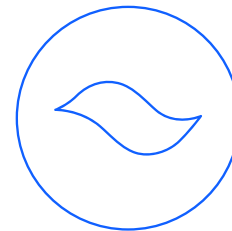


## Implant

- Fonction d'implantologie
- Pompe intégrée pour la solution saline
- Moteur électrique BL Implant
- Contre-angle implantaire 20:1

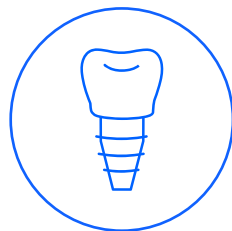

## Sivision

- Kit Sivision prêt avec Interface USB et pré-câblage
- SiroCam AF (avec supplément pour SiroCam AF+)
- Moniteur Sivision 22"
- Colonne de support légère avec adaptateur pour écran (supplément pour le support d'écran sur plateau pour la version à cart coulissant)

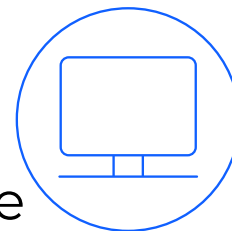

Sinius

Vos options individuelles (1)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Élément dentiste (avec EasyTouch, poignées amovibles et support pour instruments) |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Sprayvit M avec lumière                                                           | ○ |
| 1er entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                   | ● |
| 2e entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                    | ● |
| 3e entraînement (pour le moteur ou la turbine)                                    | ○ |
| Moteur électrique BL ISO E (plage de vitesses 2 000 à 40 000 tr/min)              | ○ |
| Moteur électrique BL ISO C (plage de vitesses de 90 à 40 000 tr/min)              | ○ |
| Flexible de turbine                                                               | ○ |
| Instrument à ultrasons SiroSonic TL                                               | ○ |
| Fonction endodontique avec base de données de limes                               | ○ |
| Fonctionnement des systèmes de limes réciproques                                  | ○ |
| ApexLocator                                                                       | ○ |
| Contre-angle T1 Line Endo 6 L avec lumière                                        | ○ |
| Fonction d'implantologie                                                          | ○ |
| Moteur électrique BL Implant                                                      | ○ |
| Contre-angle Implant 20:1                                                         | ○ |
| Pompe intégrée pour solution saline                                               | ○ |
| Fonctionnement mains libres avec contrôle du curseur                              | ● |
| Support pivotant pour 1 (Sinius CS) ou deux (Sinius CS, TS) plateaux standard     | ○ |
| Visualiseur radiographique panoramique (Sinius TS uniquement)                     | ○ |
| Support de caméra supplémentaire                                                  | ○ |

| Assise pour le patient                             |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Contrôle classique au pied, version par câble      | ● |
| Smart control sans fil                             | ○ |
| Contrôle du pied classique sans fil                | ○ |
| Appui-tête à double articulation                   | ● |
| Appuie-tête motorisé                               | ○ |
| Sellerie haut de gamme                             | ● |
| Sellerie Premium thermo                            | ○ |
| Sellerie Lounge avec coutures colorées sur demande | ○ |
| ErgoMotion                                         | ● |
| Fonction de soutien lombaire actif                 | ○ |
| Accoudoir pivotant, droit                          | ○ |
| Accoudoir, gauche                                  | ○ |
| Commande au pied, à 4 options                      | ● |
| Jeu de vannes pour dispositifs externes            | ○ |
| Coussin Booster pour les patients de petite taille | ○ |

Sinius

Vos options individuelles (2)

●= inclus dans l'unité de base

○= optionnel

| Élément assistant (avec écran tactile, support amovible) |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Sprayvit M avec lumière                                  | ○ |
| HVE                                                      | ● |
| Aspirateur de salive                                     | ● |
| Dispositif d'aspiration chirurgicale                     | ○ |
| 2e kit HVE                                               | ○ |
| Sateleco mini L.E.D.                                     | ○ |

| Unité d'eau                                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Système d'hygiène avec cartouches de nettoyage amovibles et fonction de purge automatique | ● |
| Dispositif de désinfection avec fonction permanente de désinfection et d'assainissement   | ○ |
| Nettoyage chimique du tuyau d'aspiration                                                  | ● |
| Vanne multi-station                                                                       | ● |
| Soupape de crachoir pour système d'aspiration humide                                      | ○ |
| Séparateur automatique                                                                    | ○ |
| Séparateur d'amalgame                                                                     | ○ |
| Crachoir amovible en verre avec fonction de pivotement manuel                             | ● |
| Crachoir amovible en verre avec fonction de pivotement motorisée                          | ○ |
| Fonction Aqua (approvisionnement en eau autonome)                                         | ● |

| Communication avec les patients                                                                         |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SiroCam AF/AF+                                                                                          | ○ |
| Écran Sivision, sur le support, avec support pour la version à Cart coulissant Sinus                    | ○ |
| Moniteur Sivision de 22" sur colonne de support lumineuse                                               | ○ |
| Alimentation électrique de la caméra par le dentiste ou l'assistant (modèles Sinus CS et TS uniquement) | ○ |
| Kit de câbles pour la connexion au PC                                                                   | ○ |

| Tabourets de travail (ressort à gaz long ou court en option)                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hugo mains libres (avec fonction de réglage de la hauteur depuis le pied)       | ○ |
| Hugo manuel (avec fonction de réglage manuel de la hauteur)                     | ○ |
| Hugo Manuel Plus (avec fonction de réglage manuel en hauteur et depuis le pied) | ○ |
| Théo : assise en forme de selle                                                 | ○ |
| Carl Manuel (avec réglage de la hauteur à 360°)                                 | ○ |
| Carl Manuel Plus (avec réglage de la hauteur à 360° et commande pour le pied)   | ○ |

Sinius

Vos options individuelles (3)

- = inclus dans l'unité de base
- = optionnel

| Options supplémentaires                                           |   |
|-------------------------------------------------------------------|---|
| Porte-Tray pour Sinius, version à cart coulissant                 | ○ |
| Modèle d'unité LEDview Plus                                       | ○ |
| Modèle de plafond LEDview Plus                                    | ○ |
| Adaptateur pour ensemble de plafond Heliodent Plus / LEDview Plus | ○ |
| Adaptateur pour le modèle unitaire Heliodent Plus                 | ○ |
| Miroir du patient pour LEDview Plus                               | ○ |
| Adaptateur pour caméra pour LEDview Plus                          | ○ |

La disponibilité des options et des fonctionnalités peut varier selon les pays.






Intego Pro & Intego Pro Ambidextre

# Packages utilisateur


## Start Pro

- Contrôle électronique du pied
- Sprayvit E dans l'élément dentiste
- 1× tuyau de turbine
- 1× Micromoteur BL ISO E
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus
- ^ Supplément pour LEDview Plus

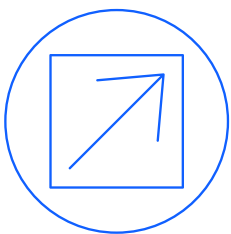


## Innovation Pro

- Pédale de commande électronique
- Sprayvit E dans l'élément dentiste
- Troisième entraînement de foret
- 1× tuyau de turbine
- 2× Micromoteurs BL ISO E
- Détartreur SiroSonic L
- Interface utilisateur EasyTouch
- Sprayvit E dans l'élément assistant
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus

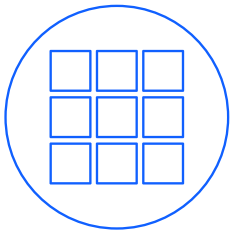

## Advance Pro

- Pédale de commande électronique
- Sprayvit E dans l'élément dentiste
- 1× tuyau de turbine
- 1× Micromoteur BL ISO E
- Détartreur SiroSonic L
- Interface utilisateur EasyTouch
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus

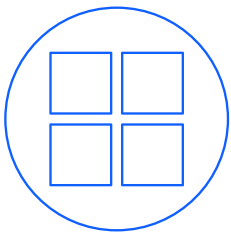



## Intego Pro & Intego Pro Ambidextre

Packs en option


### Endo Pro

- Kit de contrôle du torque intégré
- ApexLocator
- Contre-angle Endo 6 :1
- eControl



### Sivision ready

- Pour l'élément dentiste ou l'élément assistant :
- Interface USB
  - Interface réseau

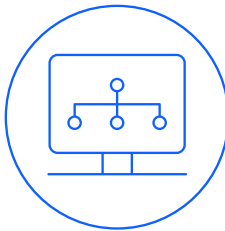


### Sivision Start

sans écran Sivision 22"

Pour l'élément dentiste ou l'élément assistant :

- Interface USB
- Interface réseau
- Fixation de l'écran sur la colonne de support d'éclairage
- SiroCam F

^ Supplément pour SiroCam AF/AF+

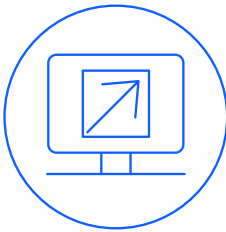


### Sivision Start

avec un moniteur Sivision 22"

Pour l'élément dentiste ou l'élément assistant :

- Interface USB
- Interface réseau
- Fixation de l'écran sur la colonne de support d'éclairage
- Moniteur Sivision 22"
- SiroCam F

^ Supplément pour SiroCam AF/AF+

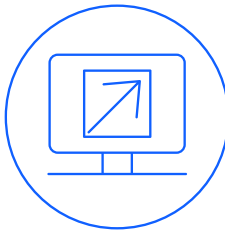

Intego Pro & Intego Pro Ambidextre

# Vos options individuelles (1)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Élément dentiste (versions TS et CS disponibles)                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Interface utilisateur EasyPad avec 2 paramètres spécifiques à l'utilisateur             | ● |
| Interface utilisateur graphique EasyTouch avec 4 paramètres spécifiques à l'utilisateur | ○ |
| Bras de support réglable en hauteur avec frein pneumatique                              | ● |
| 5 positions d'instrument                                                                | ● |
| Alimentation hydropneumatique pour 2 entraînements de forage avec fibre optique         | ● |
| Sprayvit E avec lumière                                                                 | ○ |
| Sprayvit E avec lumière (bouton d'eau sur la gauche)                                    | ○ |
| Tuyau de turbine avec lumière                                                           | ○ |
| 1 <sup>er</sup> moteur BL ISO E avec tuyau (plage de vitesses de 1 000 à 40 000 tr/min) | ○ |
| 2 <sup>e</sup> moteur BL ISO E avec tuyau (plage de vitesses de 1 000 à 40 000 tr/min)  | ○ |

| Élément dentiste (versions TS et CS disponibles)                                             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Détartreur SiroSonic L                                                                       | ○ |
| Troisième entraînement de foret                                                              | ○ |
| Lampe de polymérisation Satelec Mini LED                                                     | ○ |
| Kit de source de lumière intraorale pour turbine et Sprayvit E                               | ● |
| Contrôle du torque pour les traitements endodontiques                                        | ○ |
| eControl : étend la plage de vitesse à 100 – 40 000 tr/min                                   | ○ |
| ApexLocator intégré                                                                          | ○ |
| Contre-angle Endo 6 :1                                                                       | ○ |
| Visualisateur de rayons X intraoral                                                          | ○ |
| Tablette en silicone pour élément dentiste TS                                                | ○ |
| Support de caméra supplémentaire pour l'élément dentiste TS                                  | ○ |
| Support supplémentaire pour plateau CS, pour 1 plateau de taille standard                    | ○ |
| Support supplémentaire pour plateaux TS/CS, pouvant accueillir 2 plateaux de taille standard | ○ |
| Tablette en silicone pour l'élément dentaire CS                                              | ○ |
| Manchons en silicone amovibles pour les poignées                                             | ○ |

Intego Pro & Intego Pro Ambidextre

# Vos options individuelles (2)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Assise pour le patient                             |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 2 positions de traitement, position S et O         | ● |
| Pédale de commande pneumatique de l'instrument     | ● |
| Contrôle électronique du pied (sans fil)           | ○ |
| Boîte de jonction intégrée                         | ● |
| Système de levage du fauteuil 185 kg               | ● |
| Repose-tête plat                                   | ● |
| Appui-tête à double articulation                   | ○ |
| Sellerie haut de gamme                             | ● |
| Sellerie Lounge                                    | ○ |
| ErgoMotion                                         | ○ |
| Commande au pied, à 4 options                      | ● |
| Coussin Booster pour les patients de petite taille | ○ |
| Accoudoir droit                                    | ○ |
| Accoudoir gauche                                   | ○ |
| Jeu de vannes pour dispositifs externes            | ○ |
| Kit de réduction de la pression sous vide          | ○ |
| Kit de montage du cache                            | ○ |
| Boîte de jonction séparée                          | ○ |
| Plaque adaptatrice                                 | ○ |

| Élément assistant                                             |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Assistant de confort, idéal pour la dentisterie à deux mains* | ● |
| 4 positions de l'instrument                                   | ● |
| Aspirateur de salive et HVE                                   | ● |
| Sprayvit E avec lumière                                       | ○ |
| 2e kit HVE                                                    | ○ |
| Lampe de polymérisation Satelec Mini LED                      | ○ |
| Pad tactile                                                   | ○ |
| Source lumineuse pour Sprayvit E                              | ● |
| Tablette en silicone pour l'élément assistant                 | ○ |

| Communication avec les patients                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Interface USB dans l'élément dentiste ou assistant         | ○ |
| SiroCam F                                                  | ○ |
| SiroCam AF                                                 | ○ |
| SiroCam AF+                                                | ○ |
| Montage de l'écran sur la colonne de support de la lumière | ○ |
| Moniteur Sivision de 22" (avec alimentation intégrée)      | ○ |
| Interface réseau                                           | ○ |

Intego Pro & Intego Pro Ambidextre

# Vos options individuelles (3)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Unité d'eau                                                                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Préparé pour le dispositif de désinfection intégré                                                                                  | ● |
| Système d'hygiène avec cartouches de nettoyage amovibles et fonction de purge automatique                                           | ● |
| Crachoir avec fonction pivotante manuelle                                                                                           | ● |
| Crachoir blanc                                                                                                                      | ● |
| Crachoir en verre                                                                                                                   | ○ |
| Unité d'eau sans crachoir                                                                                                           | ○ |
| Vanne multi-station pour l'aspiration humide standard                                                                               | ● |
| Valve de crachoir pour l'aspiration humide standard                                                                                 | ○ |
| Séparateur automatique                                                                                                              | ○ |
| Séparateur d'amalgame                                                                                                               | ○ |
| Système de désinfection intégré avec système de désinfection permanent désinfection des conduites d'eau et désinfection automatique | ○ |
| Chauffe-eau                                                                                                                         | ● |
| Système de nettoyage de tuyau à aspiration                                                                                          | ● |
| Nettoyage chimique du tuyau d'aspiration                                                                                            | ○ |

| Tabourets de travail (ressort à gaz long ou court en option)                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hugo mains libres (avec fonction de réglage de la hauteur depuis le pied)       | ○ |
| Hugo manuel (avec fonction de réglage manuel de la hauteur)                     | ○ |
| Hugo Manuel Plus (avec fonction de réglage manuel en hauteur et depuis le pied) | ○ |
| Théo : assise en forme de selle                                                 | ○ |
| Carl Manuel (avec réglage de la hauteur à 360°)                                 | ○ |
| Carl Manuel Plus (avec réglage de la hauteur à 360° et commande pour le pied)   | ○ |
| Paul Manuel (avec réglage manuel de la hauteur)                                 | ○ |
| Paul Manuel Plus (avec réglage manuel et depuis le pied)                        | ○ |

| Options d'éclairage                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| LEDlight Plus                                                         | ○ |
| LEDview Plus                                                          | ○ |
| Plafonnier LEDview Plus                                               | ○ |
| Adaptation pour la combinaison de plafond LEDview Plus/Heliodent Plus | ○ |
| Adaptation pour modèle d'unité Heliodent Plus                         | ○ |
| Miroir du patient pour LEDview Plus                                   | ○ |
| Adaptateur pour caméra pour LEDview Plus                              | ○ |




Intego & Intego Ambidextre

# Packages utilisateur


Start

- Seringue standard à 3 voies
- 2x Cordons flexibles pour fibre optique
- Kit de source de lumière intraorale
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus
- ^ Supplément pour LEDview Plus

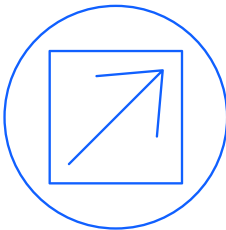


Advanced

- Pédale de commande électronique
- Sprayvit E dans l'élément dentiste
- 1x tuyau de turbine
- 1x Micromoteur BL ISO E
- Kit de source de lumière intraorale
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus
- ^ Supplément pour LEDview Plus

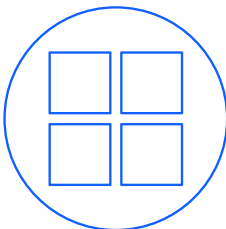

Innovation

- Pédale de commande électronique
- Sprayvit E dans l'élément dentiste
- 1x tuyau de turbine
- 1x Micromoteur BL ISO E
- Détartreur SiroSonic L
- Kit de source de lumière intraorale
- Éclairage de fonctionnement LEDview Plus

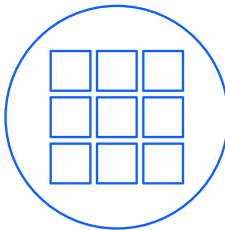



Intego & Intego Ambidextre

Packs en option


Sivision Start

sans écran Sivision 22"

Pour l'élément dentiste  
ou l'élément assistant :

- Interface USB
- Interface réseau
- Fixation de l'écran sur la colonne de support d'éclairage
- SiroCam F

^ Supplément pour SiroCam AF/AF+

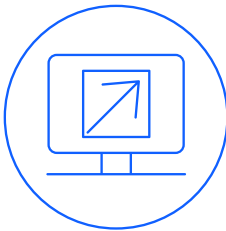


Sivision Start

avec un moniteur Sivision 22"

Pour l'élément dentiste  
ou l'élément assistant :

- Interface USB
- Interface réseau
- Fixation de l'écran sur la colonne de support d'éclairage
- Moniteur Sivision 22"
- SiroCam F


^ Supplément pour SiroCam AF/AF+

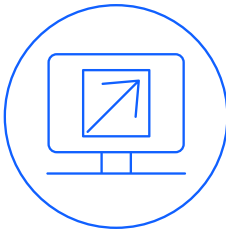

Sivision ready

Pour l'élément dentiste  
ou l'élément assistant :

- Interface USB
- Interface réseau

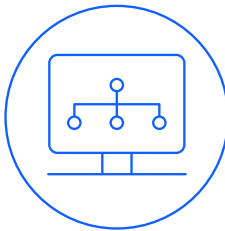

Endo Pro

- Kit de contrôle du torque intégré
- ApexLocator
- Contre-angle Endo 6:1
- eControl



Ergo

- ErgoMotion
- Système de réhaussement du siège d'une capacité de 185 kg
- Repose de bras gauche et droit
- Appui-tête à double articulation



Intego & Intego Ambidextre

# Vos options individuelles (1)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Élément dentiste (versions TS et CS disponibles)                                        |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Bras de support réglable en hauteur avec frein pneumatique                              | ● |
| 5 positions d'instrument                                                                | ● |
| Alimentation hydropneumatique pour 2 moteurs de forage avec fibre optique               | ● |
| Interface utilisateur EasyPad avec 2 paramètres spécifiques à l'utilisateur             | ● |
| Interface utilisateur EasyTouch avec 4 paramètres spécifiques à l'utilisateur           | ○ |
| Sprayvit E avec lumière                                                                 | ○ |
| Sprayvit E avec lumière (bouton d'eau sur la gauche)                                    | ○ |
| Seringue standard à 3 voies                                                             | ○ |
| Tuyau de turbine avec lumière                                                           | ○ |
| Tuyau de turbine Borden                                                                 | ○ |
| 1 <sup>er</sup> moteur BL ISO E avec tuyau (plage de vitesses de 1 000 à 40 000 tr/min) | ○ |
| 2 <sup>e</sup> moteur BL ISO E avec tuyau (plage de vitesses de 1 000 à 40 000 tr/min)  | ○ |

| Élément dentiste (versions TS et CS disponibles)                                             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Détartreur SiroSonic L                                                                       | ○ |
| 3 <sup>e</sup> raccord pour instrumentation dynamique                                        | ○ |
| Kit de source de lumière intraorale pour turbine et Sprayvit E                               | ○ |
| Contrôle du torque pour les traitements endodontiques                                        | ○ |
| eControl : étend la plage de vitesse à 100 – 40 000 tr/min                                   | ○ |
| ApexLocator intégré                                                                          | ○ |
| Contre-angle Endo 6 :1                                                                       | ○ |
| Fonction négatoscope                                                                         | ○ |
| Fonction de purge et de désinfection manuelle                                                | ○ |
| Tablette en silicone pour élément dentiste TS                                                | ○ |
| Support supplémentaire pour plateau CS, pour 1 plateau de taille standard                    | ○ |
| Support supplémentaire pour plateaux TS/CS, pouvant accueillir 2 plateaux de taille standard | ○ |
| Support de caméra supplémentaire pour l'élément dentiste TS                                  | ○ |
| Tablette en silicone pour l'élément dentaire CS                                              | ○ |
| Manchons en silicone amovibles pour les poignées                                             | ○ |

Intego & Intego Ambidextre

# Vos options individuelles (2)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Assise pour le patient                             |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 2 positions de traitement, position S et O         | ● |
| Pédale de commande pneumatique de l'instrument     | ● |
| Contrôle électronique du pied (sans fil)           | ○ |
| Boîte de jonction intégrée                         | ● |
| Système de levage du fauteuil 185 kg               | ○ |
| Repose-tête plat                                   | ● |
| Appui-tête à double articulation                   | ○ |
| Sellerie Premium                                   | ● |
| Sellerie Lounge                                    | ○ |
| ErgoMotion                                         | ○ |
| Commande au pied, à 4 options                      | ○ |
| Coussin Booster pour les patients de petite taille | ○ |
| Accoudoir droit                                    | ○ |
| Accoudoir gauche                                   | ○ |
| Jeu de vannes pour dispositifs externes            | ○ |
| Kit de réduction de la pression sous vide          | ○ |
| Kit de montage du cache                            | ○ |
| Boîte de jonction séparée                          | ○ |
| Plaque adaptatrice                                 | ○ |

| Élément assistant                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| Élément d'assistance compact, monté sur pivot directement sur le bras du crachoir | ● |
| Assistant de confort, idéal pour la dentisterie à deux mains                      | ○ |
| 4 positions de l'instrument                                                       | ● |
| Aspirateur de salive et HVE                                                       | ● |
| Sprayvit E avec lumière                                                           | ○ |
| Sprayvit E avec lumière (bouton d'eau sur la gauche)                              | ○ |
| Seringue standard à 3 voies                                                       | ○ |
| 2e kit HVE                                                                        | ○ |
| Lampe de polymérisation Satelec Mini LED                                          | ○ |
| Pad tactile                                                                       | ○ |
| Source lumineuse pour Sprayvit E                                                  | ○ |
| Tablette en silicone pour l'élément assistant de confort                          | ○ |

| Communication avec les patients                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Interface USB dans l'élément dentiste ou assistant            | ○ |
| SiroCam F                                                     | ○ |
| SiroCam AF                                                    | ○ |
| SiroCam AF+                                                   | ○ |
| Montage de l'écran sur la colonne de support de la lumière    | ○ |
| Moniteur Sivision de 22" (avec unité d'alimentation intégrée) | ○ |
| Interface réseau                                              | ○ |

Intego & Intego Ambidextre

# Vos options individuelles (3)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel

| Unité d'eau                                                                         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Préparé pour la bouteille d'eau douce                                               | ● |
| Crachoir avec fonction pivotante manuelle                                           | ● |
| Unité d'eau sans crachoir                                                           | ○ |
| Préparé pour l'aspiration humide standard                                           | ● |
| Préparé pour l'aspiration humide standard avec contrôle automatique de l'aspiration | ○ |
| Vanne multi-station                                                                 | ○ |
| Valve de crachoir pour l'aspiration humide standard                                 | ○ |
| Séparateur automatique                                                              | ○ |
| Séparateur d'amalgame                                                               | ○ |
| Bouteille d'eau potable sans raccordement au réseau public d'eau potable            | ○ |
| Bouteille d'eau potable avec raccordement au réseau public d'eau potable            | ○ |
| Chauffe-eau                                                                         | ○ |
| Système de nettoyage de tuyau à aspiration                                          | ○ |

| Tabourets de travail (ressort à gaz long ou court en option)                    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| Hugo mains libres (avec fonction de réglage de la hauteur depuis le pied)       | ○ |
| Hugo manuel (avec fonction de réglage manuel de la hauteur)                     | ○ |
| Hugo Manuel Plus (avec fonction de réglage manuel en hauteur et depuis le pied) | ○ |
| Théo : assise en forme de selle                                                 | ○ |
| Carl Manuel (avec réglage de la hauteur à 360°)                                 | ○ |
| Carl Manuel Plus (avec réglage de la hauteur à 360° et commande pour le pied)   | ○ |
| Paul Manuel (avec réglage manuel de la hauteur)                                 | ○ |
| Paul Manuel Plus (avec réglage manuel et depuis le pied)                        | ○ |

| Options d'éclairage                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| LEDlight Plus                                                         | ○ |
| LEDview Plus                                                          | ○ |
| Plafonnier LEDview Plus                                               | ○ |
| Adaptation pour la combinaison de plafond LEDview Plus/Heliodent Plus | ○ |
| Adaptation pour modèle d'unité Heliodent Plus                         | ○ |
| Miroir du patient pour LEDview Plus                                   | ○ |
| Adaptateur pour caméra pour LEDview Plus                              | ○ |



# Comparaison des postes de traitement

Tableau de comparaison  
Ergonomie et confort



Tableau de comparaison  
Fonctions de traitement,  
solutions et services



Tableau de comparaison  
Prévention des infections



Tableau de comparaison  
Technologie



Comparaison des postes de traitement

# Ergonomie et confort (1)

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel  
○ = non disponible

|                                      |                                                 | Axano | Axano Pure | Sinius                                                      | Intego Pro                         | Intego                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Concept de traitement                | Cart coulissant motorisé                        | ●     | ○          | ○                                                           | ○                                  | ○                                  |
|                                      | Cart coulissant manuel                          | ○     | ●          | ●                                                           | ○                                  | ○                                  |
|                                      | Avec bras fouet (CS)                            | ○     | ○          | ●                                                           | ●                                  | ●                                  |
|                                      | Avec cordons pendants (TS)                      | ○     | ○          | ●                                                           | ●                                  | ●                                  |
|                                      | Ambidextre                                      | ○     | ○          | ○                                                           | ○                                  | ○                                  |
| Positions de l'instrument            |                                                 | 6+2   | 6+1        | 5+1 (Cart manuel/<br>Cordons pendants TS)<br>5 (version CS) | 5+1 (version TS)<br>5 (version CS) | 5+1 (version TS)<br>5 (version CS) |
| Appui-tête                           | Appuie-tête motorisé                            | ●     | ○          | ○                                                           | ○                                  | ○                                  |
|                                      | Appui-tête à double articulation                | ○     | ●          | ●                                                           | ○                                  | ○                                  |
|                                      | Repose-tête plat                                | ○     | ○          | ○                                                           | ●                                  | ●                                  |
| Positionnement vertical de la bouche |                                                 | ●     | ○*         | ○*                                                          | ○                                  | ○                                  |
| Pédale multifonction                 | Smart Control (sans fil)                        | ●     | ●          | ○                                                           | ○                                  | ○                                  |
|                                      | Contrôle électronique depuis le pied (sans fil) | ○     | ○          | ○                                                           | ○                                  | ○                                  |
|                                      | Contrôle électronique depuis le pied (filaire)  | ○     | ○          | ●                                                           | ○                                  | ○                                  |
|                                      | Contrôle pneumatique du pied (filaire)          | ○     | ○          | ○                                                           | ●                                  | ●                                  |

Comparaison des postes de traitement

# Ergonomie et confort (2)

- = inclus dans l'unité de base
- = optionnel
- = non disponible

|                                                      |      | Axano  | Axano Pure | Sinius | Intego Pro | Intego                    |
|------------------------------------------------------|------|--------|------------|--------|------------|---------------------------|
| Fonction de massage                                  |      | ○      | ○          | ○      | ○          | ○                         |
| Support lombaire                                     |      | ●      | ○*         | ○*     | ○          | ○                         |
| ErgoMotion                                           |      | ●      | ●          | ●      | ○          | ○                         |
| Porte-Tray avec système de bras de support flexibles |      | ○      | ○          | ○      | ○          | ○                         |
| Poids max. du patient                                |      | 180 kg | 180 kg     | 165 kg | 185 kg     | 140 kg (185 kg en option) |
| Tabourets de travail                                 | Hugo | ○      | ○          | ○      | ○          | ○                         |
|                                                      | Carl | ○      | ○          | ○      | ○          | ○                         |
|                                                      | Theo | ○      | ○          | ○      | ○          | ○                         |
|                                                      | Paul | ○      | ○          | ○      | ○          | ○                         |

Comparaison des postes de traitement

# Fonctions de traitement, solutions et services

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel  
○ = non disponible

|                                    |                                                                                                                                   | Axano | Axano Pure | Sinius | Intego Pro | Intego |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------------|--------|
| Fonctions thérapeutiques intégrées | Endo avec base de limes intégrée                                                                                                  | ○     | ●          | ○      | ○          | ○      |
|                                    | Endo sans base de limes intégrée                                                                                                  | ○     | ○          | ○      | ○          | ○      |
|                                    | Implant                                                                                                                           | ○     | ○          | ○      | ○          | ○      |
|                                    | ApexLocator                                                                                                                       | ○     | ●          | ○      | ○          | ○      |
| DS Core                            |                                                                                                                                   | ○     | ○          | ○      | ○          | ○      |
| Prestation                         | Connexion réseau via un Logiciel de service pour une maintenance efficace et un support numérique lors de l'entretien obligatoire | ●     | ●          | ○      | ○          | ○      |
|                                    | Service sur site avec diagnostic des pannes via l'interface réseau ou une carte SD                                                | ○     | ○          | ●      | ●          | ●      |
|                                    | Diagnostic à distance via l'interface du réseau                                                                                   | ○     | ○          | ●      | ○          | ○      |

Comparaison des postes de traitement

# Prévention des infections

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel  
○ = non disponible

|                                                                 |                                 | Axano | Axano Pure | Sinius | Intego Pro | Intego |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|--------|------------|--------|
| Système de désinfection/<br>Approvisionnement en eau            | Système de désinfection intégré | ●     | ●          | ○      | ○          | ○      |
|                                                                 | Bouteille d'eau fraîche         | ○     | ○          | ○      | ○          | ○      |
| Centre de contrôle de l'hygiène                                 |                                 | ●     | ●          | ○      | ○          | ○      |
| Adaptateurs sanitaires intégrés pour les tuyaux des instruments |                                 | ●     | ●          | ●      | ●          | ○      |
| Nettoyage intégré du tuyau d'aspiration                         |                                 | ●*    | ●*         | ●*     | ●          | ○      |
| Nettoyage chimique du tuyau d'aspiration                        |                                 | ●*    | ●*         | ●*     | ○          | ○      |
| Aspiration sélective dans l'élément assistant                   |                                 | ●     | ●          | ●      | ○          | ○      |
| Nettoyage chimique du crachoir                                  |                                 | ●     | ●          | ○      | ○          | ○      |

Comparaison des postes de traitement

# Technologie

● = inclus dans l'unité de base  
○ = optionnel  
○ = non disponible

|                                                                  |                                                      | Axano                                                            | Axano Pure                       | Sinius                                                                                                                                     | Intego Pro                                                                                                        | Intego                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface utilisateur                                            | 10.3" Smart Touch jusqu'à 10 profils d'utilisateurs* | ●                                                                | ●                                | ○                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
|                                                                  | EasyTouch (4,3") avec 6 profils d'utilisateur        | ○                                                                | ○                                | ●                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
|                                                                  | EasyTouch (4,3") avec 4 profils d'utilisateur        | ○                                                                | ○                                | ○                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
|                                                                  | EasyPad (clavier) avec 2 profils d'utilisateur       | ○                                                                | ○                                | ○                                                                                                                                          | ●                                                                                                                 | ●                                                                                                                 |
| Ecran                                                            | 22" Moniteur Sivation                                | ○                                                                | ○                                | ○                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
| Caméra intra-orale                                               | SiroCam AF+                                          | ○                                                                | ○                                | ○                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
|                                                                  | SiroCam AF                                           | ○                                                                | ○                                | ○                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
|                                                                  | SiroCam F                                            | ○                                                                | ○                                | ○                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
| Éclairage opératoire dentaire                                    | LEDview Plus                                         | ○                                                                | ○                                | ○                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
|                                                                  | LEDlight Plus                                        | ○                                                                | ○                                | ○                                                                                                                                          | ○                                                                                                                 | ○                                                                                                                 |
| Nombre possible d'instruments dynamiques (dont les micromoteurs) |                                                      | 4 (4)                                                            | 3 (3)                            | 3 (3)                                                                                                                                      | 3 (2)                                                                                                             | 3 (2)                                                                                                             |
| Moteurs appropriés                                               |                                                      | BL ISO F<br>BL Implant E                                         | BL ISO F<br>BL Implant E         | BL ISO E<br>BL ISO C<br>BL Implant                                                                                                         | BL ISO E                                                                                                          | BL ISO E                                                                                                          |
| Déstartreur                                                      |                                                      | SiroSonic TL                                                     | SiroSonic TL                     | SiroSonic TL                                                                                                                               | SiroSonic L                                                                                                       | SiroSonic L                                                                                                       |
| Position possible de la caméra intra-orale                       |                                                      | Position de l'élément dentiste 2, 6<br>ou support supplémentaire | Élément dentiste position 5 ou 6 | Element dentiste position 5 (toutes les versions)<br><br>ou support supplémentaire (cart coulissant, TS)<br><br>Élément assistant (CS, TS) | Position de l'élément dentiste 5 (CS, TS)<br><br>ou support supplémentaire (TS)<br><br>Élément assistant (CS, TS) | Position de l'élément dentiste 5 (CS, TS)<br><br>ou support supplémentaire (TS)<br><br>Élément assistant (CS, TS) |

La disponibilité des options et des fonctionnalités peut varier selon les pays.

\*avec touches de fonction fixes, configurables ; commande du curseur pour une utilisation mains libres

# Tutoriels vidéo disponibles



Axano : Quand l'innovation rencontre la fascination



Axano Pure : Découvrez le fauteuil dentaire



Sinius : Pensé pour aller plus loin



Intego & Intego Pro : La performance en toute confiance



Intego Pro Ambidextre (TS) : Flux de travail en temps réel



Intego Ambidextre (CS) : Flux de travail en temps réel

# En savoir plus sur notre site Internet



Postes de traitement >



Axano >



Axano Pure >



Sinus >



Intego >



Centre de téléchargement >



Energo >



Systèmes de contrôle des infections >



## DENTSPLY SIRONA

Sirona Dental Systems GmbH

Fabrikstraße 31

64625 Bensheim

Allemagne

[dentsplysirona.fr](http://dentsplysirona.fr)

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

• Axano/Axano Pure. Indications : Unité de soins dentaires équipée d'accessoires, destinée à alimenter en courant les dispositifs et servir de support aux appareils et accessoires dentaires. Ce dispositif comprend un fauteuil dentaire. L'unité de soins dentaires est destinée à être utilisée dans le cadre d'un cabinet dentaire et être manipulée par des dentistes et/ou des assistants dentaires agréés. Classe / Organisme certificateur : IIa / TÜV SÜD Product Service GmbH : CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Rev : 07/2026

• Sinus. Indications : Poste de traitement dentaire destiné à alimenter les appareils dentaires en courant et à leur servir de base. Prend en charge le traitement diagnostique et thérapeutique en médecine dentaire chez l'homme. Poste de traitement dentaire équipé d'un fauteuil de traitement pour le positionnement du patient adulte et enfant. Classe / Organisme certificateur : IIa / TÜV SÜD Product Service GmbH : CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Rev : 07/2026

• Intego. Indications : Unité dentaire destinée à être utilisée chez l'être humain dans le domaine de la dentisterie et ne doit être utilisée que par des professionnels dentaires agréés. Dispositif médical installé de façon permanente. Son utilisation n'est pas autorisée dans les véhicules mobiles, sa destination implique un respect impératif du mode d'emploi. Classe / Organisme certificateur : IIa / TÜV SÜD Product Service GmbH : CE 0123. Fabricant : Sirona Dental Systems GmbH. Rev : 07/2026

